

LUNOS® プロフィーペースト

LUNOS® Prophy Paste

ハイドロキシアパタイト含有により再石灰化をサポートします。「2 in 1」ペーストはステイン除去から仕上げ研磨まで可能です。「スーパーソフト」ペーストはRDA値5以下を実現しました。

RDA28

2 in 1 ペースト

1歯面10秒でステイン除去から仕上げ研磨まで1本で完了。ミントにはフッ素1500ppm配合。棒状粒子が砕けて細粒になり小さな角が多数できることで、研磨力を維持します。




● ナチュラル
(無香料)

● オレンジ

● ミント

● 2 in 1 ペーストに含まれる研磨成分の特性(ケイ酸カルシウム)

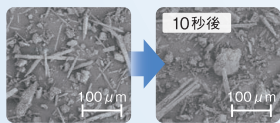

- 1歯面10秒で棒状粒子が砕けて細粒になる
- 乳歯・補綴歯にも施術可能
- 着色の再付着が少ない

フラウンホーファー研究機構、材料・システム微細構造研究所(ドイツ、ハレ・アン・デア・ザーレ)

2 in 1 ペーストとラバーカップで施術



施術前

施術中

施術後

LUNOS® プロフィーペースト 2 in 1

LUNOS® Prophy Paste Two in One

商品コード	種類	内容量	入数	価格
CPZ710A1901	ナチュラル(無香料)			
CPZ720A1901	オレンジ	100g	1本	4,400円
CPZ730A1901	ミント			

RDA 5

スーパーソフト


研磨成分にはハイドロキシアパタイトを使用。滑沢に艶のある歯表面にすることでプラークの再付着を予防。美しい歯を保ちます。インプラントや知覚過敏の患者様への使用も可能です。



● ナチュラル
(無香料)

● オレンジ

● スーパーソフトに含まれる研磨成分の特性(細粒子ハイドロキシアパタイト)

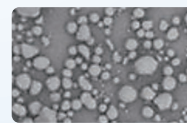

- バイオフィームとプラークの除去可能
- 歯面の滑沢化&艶出し効果
- 乳歯・インプラント・補綴歯に施術可能

フラウンホーファー研究機構、材料・システム微細構造研究所(ドイツ、ハレ・アン・デア・ザーレ)

スーパーソフトとラバーカップで施術



施術後

乳歯のステイン除去も可能

LUNOS® プロフィーペースト スーパーソフト

LUNOS® Prophy Paste Super Soft

商品コード	種類	内容量	入数	価格
CPZ740A0901	ナチュラル(無香料)			
CPZ750A0901	オレンジ	50g	1本	3,000円

販売名: LUNOSプロフィーペースト 一般医療機器 届出番号: 27B2X00268X00064

LUNOS[®] プロフィーパウダー

LUNOS[®] Prophy Powder

主成分に「トレハロース」を使用。歯と患者さんに優しい歯面清掃用パウダーです。

ジェントルクリーン(歯肉縁上用)

粒子サイズ約65 μ m。歯肉縁上のステインとプラーク除去にご使用いただけます。補綴歯にも施術可能です。



ナチュラル
(無香料)

オレンジ

スペアミント

ワイルドベリー

ペリオコンビ(歯肉縁上/縁下用)

粒子サイズ約30 μ m。歯肉縁上/縁下のバイオフィーム除去、軽いステイン除去にご使用いただけます。



ナチュラル
(無香料)

主成分「トレハロース」



SEM画像250倍 Fraunhofer IGB研究所

新タイプの糖アルコールでプラークやバイオフィームはもちろん頑固なステインもやさしく除去します。

- 食品認可済の非う蝕性天然糖質
- 水溶性に優れた“糖アルコール”
 - ▶ ポケット内に残留しない
 - ▶ 口腔粘膜の乾燥と不快感軽減
 - ▶ ユニット内部や配管内で固着しない
- 砂糖の約50%の甘味度で患者さんの不快感軽減



片手で開け閉めできる
フリップキャップ仕様

LUNOS[®] プロフィーパウダー ジェントルクリーン(縁上用)

LUNOS[®] Prophylaxis Powder Gentle Clean

商品コード	種類	内容量	入数	価格
CPZ610A2250-1	ナチュラル(無香料)	180g	1本	4,200円
CPZ620A2250-1	オレンジ			
CPZ630A2250-1	スペアミント			
CPZ650A2250-1	ワイルドベリー			

LUNOS[®] プロフィーパウダー ペリオコンビ(縁上/縁下用)

LUNOS[®] Prophylaxis Powder Perio Combi

商品コード	種類	内容量	入数	価格
CPZ640A1950-1	ナチュラル(無香料)	100g	1本	3,300円

販売名: LUNOS プロフィーパウダー 一般医療機器 届出番号: 27B2X00268X00097

Premium Plus Japan Co., Ltd. (プレミアムプラスジャパン株式会社)
〒560-0005 大阪府豊中市西緑丘1-1-31 5F
お問合せ窓口: 06-6845-0050 9:00~17:00(土・日・祝祭日を除く)

商品センター: 〒561-0805 大阪府豊中市原田南1丁目13番5号
(製造販売業)

※商品は税別価格となります。

担当販売店