

premiumTM
plus JAPAN

Scaler MaxPiezo 7+

超音波&高出力、コンパクトスケーラー

premiumTM
plus JAPAN



スケーラーチップ各種
ご用意しています

Premium Plus Japan Co., Ltd. (プレミアムプラスジャパン株式会社)

〒560-0005 大阪府豊中市西緑丘1-1-31 5F
お問合せ窓口：06-6845-0050 9:00~17:00 (土・日・祝祭日を除く)

商品センター：〒561-0805 大阪府豊中市原田南1丁目13番5号
(製造販売業)

商品のクオリティー維持・追求の為、スペック・カラー等を予告なく変更する場合がございます。掲載商品の写真は、印刷により実際のカラーと異なる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

※商品は税別価格です。

担当販売店

B1922212-02

コンパクトながら大容量の給水タンクを備えた
超音波スケーラーです。

Scaler MaxPiezo 7+

衛生的な本体デザイン

本体重量1.59kgとコンパクトで軽量なので、院内での移動や訪問診療の際に持ち運びが便利です。
スマートタッチパネルを採用したフラットなボディは清掃しやすく、衛生的な設計となっています。
※ハンドピースホルダーは取り外すことができ、オートクレーブ可能です。



軽量で持ちやすい ハンドピース

ハンドピースは人間工学に基づいてデザインされたペンタイプのグリップを備えています。軽量で先端が細いノズル形状のため、口腔内深部までアクセスすることができ、取り外しとオートクレーブが可能のため、清潔に保つことができます。

キャビテーション効果とチップの冷却をするウォータースプレー



ハンドピースから噴射される水はタッチパネルで水量調節できます。

口腔内を明るく照らすLEDライト



口腔内を明るく照らすことで、診療をスムーズに行えます。



超音波と高出力パワーで歯石の除去、
効率良く根管の拡大に使用できます。




Piezoによるパワフルなスケーリング



モード選択 **G** ジェネラル (スケーリング) **P** ペリオ **E** エンド

Piezoエンジンを搭載し、スケーリング、ペリオ、エンドの3つのモードで治療可能です。
パワフルなスケーリングで、患者さんの歯石を除去します。

多様な治療に柔軟に応える豊富な機能

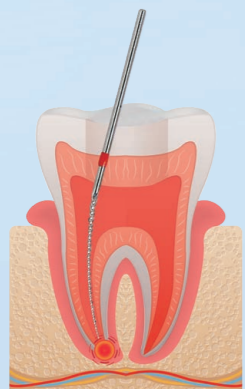

- ・スケーリング
- ・根管治療
- ・クラウン除去
- ・ガッタパーチャの除去
- ・窩洞形成

操作性の良いスマートタッチパネル




軽いタッチで水量とスケーリングの強弱を衛生的に調整できます。
適した水量と振度設定にしてください。

本体セット内容

・ファイル(#25(赤)、#20(黄))×各2本 ・チップ(G4、G5、G6、P1、P3、P4、P4D) ・エンドチャック(E1)



G4:隣接面・裂溝の除石 P1:浅い歯肉溝の除石 P4:歯肉縁下除石後の仕上げに E1:φ0.7~0.8mmのファイルホルダー
G5:歯肉縁上や歯頸部の除石 P3:深い歯周ポケット等に P4D:根管口明示に
G6:歯肉縁上や歯頸部の大きな歯石に

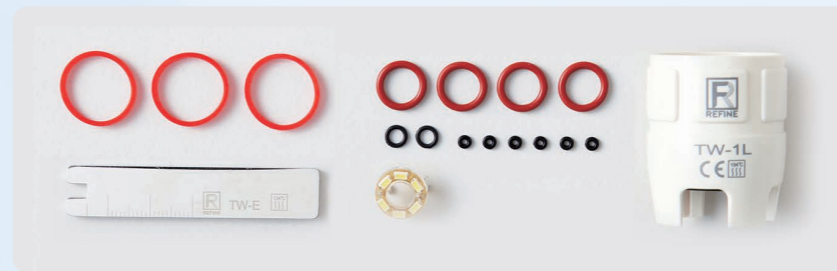

- ・メインユニット
- ・ハンドピース ・ハンドピーススケール
- ・チップ類 ・エンドファイル ・レンチ類
- ・フットスイッチ ・電源ケーブル
- ・交換用パッキン ・交換用ハンドピースLED

スケーラー MaxPiezo 7+

FC-0587 価格 138,000円

1年保証 ※本体、ハンドピースのみ一年保証です。

オートクレープOK ※ハンドピースとハンドピースホルダーのみオートクレープ可能です。

【本体仕様】

本外形寸法(mm):162×210×150mm
本体の重さ:1.59kg
電源電圧:100V/ AC 50Hz/60Hz
電源入力(VA):38
高周波出力(W):3-20
振動数(kHz):28±5
ハンドピースモデル:HP-5L



販売名: スケーラー MaxPiezo 7+ 管理医療機器 特定保守管理医療機器 認証番号 304AGBZX00091000



歯科業界に長く携わり、知識と経験を兼ね揃えたコアメンバー達によって立ち上げられた比較的新しいメーカーでありながら、現代のニーズを捉えた高品質・低価格な歯科医療機器をワールドワイドに提供し続けています。



Scaler
MaxPiezo7+

アクセサリパーツ Accessory Parts

消耗するアクセサリパーツは
個別でお買い求めいただけます。



ハンドピース
コネクター形状

スケーラーハンドピース

商品コード	入数	価格
HP-5L	1本	40,000円

販売名：スケーラー MaxPiezo 7+ 管理医療機器 特定保守管理医療機器 認証番号 304AGBZX00091000



薬液など用途に合わせてタンクを準備できます。

スケーラー MaxPiezo 7+ 給水タンク

商品コード	入数	価格
FC-0606	1個	5,000円

販売名：スケーラー MaxPiezo 7+ 管理医療機器 特定保守管理医療機器 認証番号 304AGBZX00091000



ハンドピースLEDランプ

商品コード	入数	価格
FC-0588	1個	2,500円

販売名：スケーラー MaxPiezo 7+ 管理医療機器 特定保守管理医療機器 認証番号 304AGBZX00091000

エンドファイル

商品コード	種類	入数	価格
FC-0589	エンドファイル#15		
FC-0590	エンドファイル#20	6本	1,800円
FC-0591	エンドファイル#25		

商品コード	種類	入数	価格
FC-0592	エンドファイル#30		
FC-0593	エンドファイル#35	6本	1,800円
FC-0594	エンドファイル#40		

販売名：スケーラー MaxPiezo 7+ 管理医療機器 特定保守管理医療機器 認証番号 304AGBZX00091000

Scaler Tips

スケーラーチップ

Scaler Tip

販売名：スケーラーチップ 一般医療機器 届出番号：27B2X00268X00094
販売名：スケーラー MaxPiezo 7+ 管理医療機器 特定保守管理医療機器 認証番号 304AGBZX00091000



スケーラー MaxPiezo 7+をはじめ様々な使用機種でご使用いただける、
部位に合わせて選べる豊富な品揃えの高品質スケーラーチップです。

スケーリング

用途	歯肉縁上や歯頸部の除石	前歯部のプラーク・ステイン除去	隣接面・裂溝の除石	隣接面・裂溝の除石
形状 サイズ	10.2 0.7 0.4 29.1mm	10.3 1.7 0.4 28.2mm	14.3 0.7 0.4 32.5mm	10.3 0.5 0.4 29.4mm
対応機種	MaxPiezo7+ / EMS SATELEC / NSK	MaxPiezo7+ / EMS SATELEC / NSK	MaxPiezo7+ / EMS SATELEC / NSK	MaxPiezo7+ / EMS SATELEC / NSK
商品コード	ST-G1 ST-GD1	ST-G2 ST-GD2	ST-G3 ST-GD3	ST-G4 ST-GD4
入数 / 価格	1本 1,400円	1本 1,400円	1本 1,600円	1本 1,600円

スケーリング

用途	歯肉縁上や歯頸部の除石	歯肉縁上・歯頸部の大きな歯石に	クラウン除去	ポスト除去
形状 サイズ	9.5 0.6 0.4 31.0mm	9.8 2.1 0.4 31.5mm	6.8 1.7 31.3mm	8.9 1.3 31.4mm
対応機種	MaxPiezo7+ / EMS SATELEC / NSK	MaxPiezo7+ / EMS SATELEC / NSK	MaxPiezo7+ / EMS SATELEC / NSK	MaxPiezo7+ / EMS SATELEC / NSK
商品コード	ST-G5 ST-GD5	ST-G6 ST-GD6	ST-G7 ST-GD7	ST-G8 ST-GD8
入数 / 価格	1本 1,600円	1本 1,600円	1本 1,600円	1本 1,600円

スケーリング

用途	シクルタイプ	キュレットタイプ	浅い歯肉溝の除石	左湾曲型
形状 サイズ	7.6 0.7 31.3mm	8.4 0.5 36.0mm	10.3 0.3 0.4 28.8mm	16.4 16.4 29.7mm
対応機種	MaxPiezo7+ / EMS SATELEC / NSK	MaxPiezo7+ / EMS SATELEC / NSK	MaxPiezo7+ / EMS SATELEC / NSK	MaxPiezo7+ / EMS SATELEC / NSK
商品コード	ST-G9 ST-GD9	ST-G10 ST-GD10	ST-P1 ST-PD1	ST-P2L ST-PD2L
入数 / 価格	1本 2,600円	1本 2,600円	1本 1,600円	1本 2,600円

ヘリオ

用途	左湾曲型ルートプレーニング用	右湾曲型	右湾曲型ルートプレーニング用	深い歯周ポケットなどに
形状 サイズ	16.4 7.0 Φ0.5 33.7mm	16.4 29.7mm	16.4 7.0 Φ0.5 33.7mm	14.1 Φ0.5 31.9mm
対応機種	MaxPiezo7+ / EMS SATELEC / NSK	MaxPiezo7+ / EMS SATELEC / NSK	MaxPiezo7+ / EMS SATELEC / NSK	MaxPiezo7+ / EMS SATELEC / NSK
商品コード	ST-P2LD ST-PD2LD	ST-P2R ST-PD2R	ST-P2RD ST-PD2RD	ST-P3 ST-PD3
入数 / 価格	1本 3,300円	1本 2,600円	1本 3,300円	1本 2,600円

ヘリオ

用途	フラップ後の除石など	歯肉縁下除石後の仕上げに	深い歯周ポケットに	3mm以下の歯周ポケットなどに
形状 サイズ	14.1 Φ0.6 7 31.9mm	11.2 Φ0.5 32.5mm	14 0.3 30.8mm	7.7 Φ0.5 34.3mm
対応機種	MaxPiezo7+ / EMS SATELEC / NSK	MaxPiezo7+ / EMS SATELEC / NSK	MaxPiezo7+ / EMS SATELEC / NSK	MaxPiezo7+ / EMS SATELEC / NSK
商品コード	ST-P3D ST-PD3D	ST-P4 ST-PD4	ST-P6 ST-PD6	ST-P20 ST-PD20
入数 / 価格	1本 3,300円	1本 2,600円	1本 2,600円	1本 2,600円

ヘリオ

エンド

用途	φ0.7~0.8mm用のファイルホルダー	φ0.7~0.8mm用のファイルホルダー	ガッタパーチャ側方加圧充填用	根管拡大や破折ファイル除去に
形状 サイズ	11.5 120° 22.8mm	13.5 95° 19.4mm	17.6 18.5 Φ0.6 33.0mm	17.6 12 Φ0.7 33.6mm
対応機種	MaxPiezo7+ / EMS SATELEC / NSK	MaxPiezo7+ / EMS SATELEC / NSK	MaxPiezo7+ / EMS SATELEC / NSK	MaxPiezo7+ / EMS SATELEC / NSK
商品コード	ST-E1 ST-ED1	ST-E2 ST-ED2	ST-E3 ST-ED3	ST-E3D ST-ED3D
入数 / 価格	1本 2,600円	1本 2,600円	1本 1,600円	1本 3,300円



Scaler Tips

スケーラーチップ

Scaler Tip



販売名：スケーラーチップ 一般医療機器 届出番号：27B2X00268X00094
販売名：スケーラー MaxPiezo 7+ 管理医療機器 特定保守管理医療機器 認証番号：304AGBZX00091000


スケーラー MaxPiezo 7+をはじめ様々な使用機種でご使用いただける、部位に合わせて選べる豊富な品揃えの高品質スケーラーチップです。



・チップ先端が1.0mm以上摩耗した状態では先端が適切に振動しなくなります。その場合、歯石除去効率が著しく下がり歯面に傷がつきやすくなり、患者様が痛みを感じるようになります。
・適切な振動で安全に効率よく作業を行うため、少しでも除去効率が下がったと感じた場合は新しいチップに交換してください。

注意

・チップ長15.8mm以上のチップはトルクレンチが使用できません。その場合、ホルダー用マルチレンチをご使用ください。

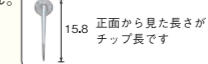

エンド			
用途	根管口明示に	ガッターパーチャ除去に	根管内異物除去
形状サイズ			
対応機種	MaxPiezo7+ / EMS SATELEC / NSK	MaxPiezo7+ / EMS SATELEC / NSK	MaxPiezo7+ / EMS SATELEC / NSK
商品コード	ST-P4D ST-PD4D	ST-E4 ST-ED4	ST-E4D ST-ED4D
入数 / 価格	1本 3,300円	1本 3,300円	1本 3,300円

エンド			
用途	根管内異物除去	バーホルダー	逆根管治療用
形状サイズ			
対応機種	MaxPiezo7+ / EMS SATELEC / NSK	MaxPiezo7+ / EMS SATELEC / NSK	MaxPiezo7+ / EMS SATELEC / NSK
商品コード	ST-E5D ST-ED5D	ST-E8 ST-ED8	ST-E10D ST-ED10D
入数 / 価格	1本 3,300円	1本 3,300円	1本 3,300円

エンド			
用途	逆根管治療用	逆根管治療用	根管内異物除去
形状サイズ			
対応機種	MaxPiezo7+ / EMS SATELEC / NSK	MaxPiezo7+ / EMS SATELEC / NSK	MaxPiezo7+ / EMS SATELEC / NSK
商品コード	ST-E11 ST-ED11	ST-E11D ST-ED11D	ST-E15 ST-ED15
入数 / 価格	1本 3,300円	1本 3,300円	1本 3,300円

窩洞形成			
用途	咬合面や歯頸部のう蝕除去	近心隣接面のう蝕除去	遠心隣接面のう蝕除去
形状サイズ			
対応機種	MaxPiezo7+ / EMS SATELEC / NSK	MaxPiezo7+ / EMS SATELEC / NSK	MaxPiezo7+ / EMS SATELEC / NSK
商品コード	ST-SB1 ST-SBD1	ST-SB2 ST-SBD2	ST-SB3 ST-SBD3
入数 / 価格	1本 3,300円	1本 3,300円	1本 3,300円

スケーリング(SIRONAスケーラー用)			
用途	窩洞形成用右半球タイプ	歯肉縁上・歯頸部の除石	前歯部のプラーク・ステイン除去
形状サイズ			
対応機種	MaxPiezo7+ / EMS SATELEC / NSK	SIRONA	SIRONA
商品コード	ST-SBR ST-SBDR	ST-GS1	ST-GS2
入数 / 価格	1本 3,300円	1本 1,600円	1本 1,600円

スケーリング(SIRONAスケーラー用)			
用途	隣接面・裂溝の除石	歯肉縁上・歯頸部の除石	歯肉縁上・歯頸部の大きな歯石に
形状サイズ			
対応機種	SIRONA	SIRONA	SIRONA
商品コード	ST-GS4	ST-GS5	ST-GS6
入数 / 価格	1本 2,000円	1本 2,000円	1本 2,000円

ペリオ(SIRONAスケーラー用)			
用途	深い歯周ポケットなどに	フラップ後の除石など	歯肉縁下除石後の仕上げに
形状サイズ			
対応機種	SIRONA	SIRONA	SIRONA
商品コード	ST-PS3	ST-PS3D	ST-PS4
入数 / 価格	1本 3,300円	1本 3,300円	1本 3,300円

ペリオ(SIRONAスケーラー用)			
用途	φ0.7~0.8mm用のファイルホルダー	ガッターパーチャ側方加圧充填用	根管口明示に
形状サイズ			
対応機種	SIRONA	SIRONA	SIRONA
商品コード	ST-ES2	ST-ES3	ST-PS4D
入数 / 価格	1本 3,300円	1本 3,300円	1本 3,300円

エンド(SIRONAスケーラー用)		窩洞形成(SIRONAスケーラー用)	
用途	根管内異物除去	ガッターパーチャ除去に	咬合面や歯頸部のう蝕除去
形状サイズ			
対応機種	SIRONA	SIRONA	SIRONA
商品コード	ST-ES4D	ST-ES5	ST-SBS1
入数 / 価格	1本 3,300円	1本 3,300円	1本 3,300円

窩洞形成(SIRONAスケーラー用)		スケーリング(KAVO SonicFlex用)	
用途	遠心隣接面のう蝕除去	窩洞形成用左半球タイプ	窩洞形成用右半球タイプ
形状サイズ			
対応機種	SIRONA	SIRONA	SIRONA
商品コード	ST-SBS3	ST-SBSL	ST-SBSR
入数 / 価格	1本 3,300円	1本 3,300円	1本 3,300円

スケーリング(KAVO SonicFlex用)		ペリオ(KAVO SonicFlex用)	
用途	歯肉縁上・歯頸部の大きな歯石に	隣接面やマージンラインに	隣接面・裂溝の除石など
形状サイズ			
対応機種	KAVO SonicFlex	KAVO SonicFlex	KAVO SonicFlex
商品コード	ST-GK2	ST-GK3	ST-GK4
入数 / 価格	1本 3,300円	1本 3,300円	1本 3,300円

スケーリング(KAVO PiezoLED用)			
用途	隣接面・裂溝の除石	隣接面・裂溝の除石	深い歯周ポケットなどに
形状サイズ			
対応機種	Kavo PiezoLED	Kavo PiezoLED	Kavo PiezoLED
商品コード	ST-201	ST-202	ST-203
入数 / 価格	1本 5,500円	1本 5,500円	1本 5,500円

▶ 関連商品

チェアサイドで使いやすい移動用カートです。
小型の器械のレイアウトにも便利で、キャスター付きなので移動も快適です。

ZILFOR **Mobile cart** *Made in Italy*



● 引き出し収納



● 電源付きタイプ (3芯タイプ)

モバイルカート 2段

Mobile Cart

商品コード	サイズ	カラー	入数	価格
MC2R	W560×D440×H815mm 20kg	ホワイト	1台	60,000円

●耐荷重(各段)約10kg ●引き出し内寸: W268×D250×H55mm
●棚サイズ: W560×D440mm
●材質: ステンレススチール 溶接タイプ(組み立てタイプではございません)
※開梱・設置・空き箱の回収はございません。


モバイルカート 3段

Mobile Cart

商品コード	電源	サイズ	カラー	入数	価格
MC3RK	電源無	W490×D360×H800mm	ホワイト	1台	45,000円
MC3RK-S	電源有	11kg			52,000円

※ノーマルタイプと電源付きタイプの2種類をご用意しております。
●耐荷重(各段)約10kg ●棚サイズ: W400×D300mm ●電源コード: 約1m
●材質: ステンレススチール 溶接タイプ(組み立てタイプではございません)
※開梱・設置・空き箱の回収はございません。

6本用の蓋付きスケアラーチップホルダーです。
高さ37mmまでのスケアラーチップが収納できます。

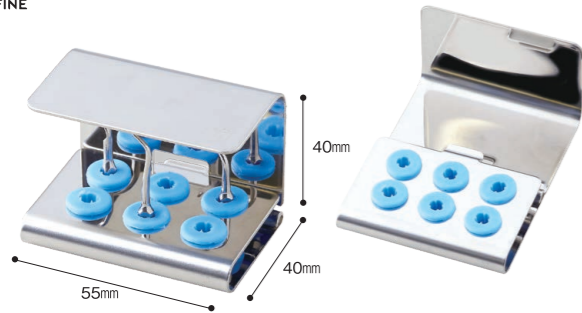


スケアラーチップホルダー

Scaler Tip Holder

商品コード	種類	入数	価格
TH02	蓋つき6本用	1個	1,600円



ファイルホルダー・FGバーホルダー用マルチレンチです。
トルクレンチに入らないチップにもご使用いただけます。

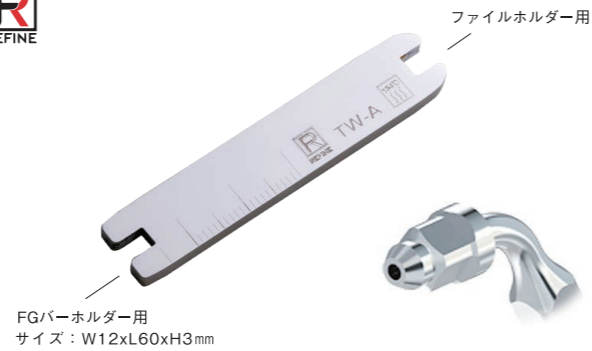

ホルダー用マルチレンチ

Multipurpose Wrench

商品コード	入数	価格
TW-A	1個	1,200円

※対応チップコード: ST-E1・ST-E2・ST-E8・ST-ES1・ST-ED1・ST-ED2・ST-ED8・ST-ES2



スケアラーチップ着脱用トルクレンチです。



トルクレンチ

Torque Wrench

商品コード	種類	入数	価格
TW-1L	EMS・SATELEC・NSK・KAVO Piezo LED用		
TS-1L	SIRONA用	1個	1,600円
TK-1L	KAVO SonicFlex用		

