

Max Cure 9・A Cure Plusの他にもキュアリングライトを多数ご用意しております。

CURING LIGHT SERIES

専用パンフレットをご用意しておりますのでお気軽にお問合せください。



製品名	C01-M(ミニ)	C01-C(クラシック)	C01-D(デュアル)	C02-M(ミニ)	C02-C(クラシック)	C02-D(デュアル)
最大光量	1,200mW/cm ²	1,500mW/cm ²	2,000mW/cm ²	1,200mW/cm ²	1,500mW/cm ²	2,500mW/cm ²
照射時間	10秒	5秒	4秒	10秒	5秒	3秒
波長域	440~480nm	440~480nm	440~480nm 390~430nm	440~480nm	440~480nm	440~480nm 390~430nm
重合深度	FULL 4.3mm SOFT CURE 4.6mm	TURBO 4.2mm FULL 4.3mm RAMP 4.1mm SOFT CURE 4.6mm	TURBO 4.4mm FULL 5.1mm RAMP 4.8mm SOFT CURE 5mm	FULL 4.3mm SOFT CURE 4.6mm	TURBO 4.4mm FULL 5.1mm RAMP 4.8mm SOFT CURE 5mm	TURBO 4.4mm FULL 5.2mm RAMP 4.9mm SOFT CURE 5.1mm
モード域	2	4	7	2	4	7
重量	84g	206g	203g	83g	187g	174g
光量計の有無	×	○	○	×	○	○
ヘッド形状	φ8mm	φ8mm	φ11mm	厚み11mm	厚み12mm	厚み12mm
価格	42,000円	48,000円	82,000円	48,000円	58,000円	88,000円

※デュアルは紫色の波長域までカバーすることで、様々な光重合材料を硬化させることができます。(硬化時間等は材料の添付文書をご確認ください)
※重合深度は4mmです。(自社測定値)

premiumTM
plus JAPAN

Curing Light

Max Cure 9・A Cure Plus



キュアリングライトに装着可能なライナー矯正用のEZアタッチメント

- 圧接することで余剰レジンのバリが減り、アタッチメント装着の効率を大幅に向上させます。
- アシスタントも不要になるため、一人でアタッチメントの設置が行えます。



動画で製品特長をご覧ください

EZアタッチメント

Pouched EZ Attachment

滅菌済み



商品コード	サイズ	カラー	入数	価格
C02-PEZA-50	φ10×H10mm	ネイビー	50個	18,000円
C02-PEZA-10			10個	4,000円

※スリーブの上から装着ください。

Max Cure 9
A Cure Plus
対応

対応機種

- ・ Max Cure 9
- ・ A Cure Plus
- ・ キュアリングライトミニC02
- ・ NEWキュアリングライトC02-C(クラシック)
- ・ NEWキュアリングライトC02-D(デュアル)
- ・ NEWキュアリングライトC01-D(デュアル)



Premium Plus Japan Co., Ltd. (プレミアムプラスジャパン株式会社)

〒560-0005 大阪府豊中市西緑丘1-1-31 5F
お問合せ窓口：06-6845-0050 9:00~17:00(土・日・祝祭日を除く)

商品センター：〒561-0805 大阪府豊中市原田南1丁目13番5号
(製造販売業)

商品のクオリティ維持・追求の為、スペック・カラー等を予告なく変更する場合がございます。掲載商品の写真は、印刷により実際のカラーと異なる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

※商品は税別価格です。

担当販売店

B2452304-01

Max Cure 9

1秒照射で2mmのレジンをスピード硬化。波長域385~515nmと広く様々な光重合材料に対応します。2つのモードでシンプル操作が可能なコストパフォーマンスを追求したキュアリングライトです。



1年保証

最大光量：2,500mW/cm²
波長域：385~515nm



薄いライトヘッド

開口量の少ないお子さまやご年配の方に優しい薄いライトヘッドです。

シンプルな2つのモードで
使いやすい光重合器
2種類のカラーをご用意

わずか
117g



Max Cure 9		
最大光量：2,500mW/cm ² 波長範囲：385~515nm		
モード	光量	照射時間
P1 TURBO	2,500mW/cm ²	1・3秒
P2 NORMAL	1,200mW/cm ²	5・10・15・20秒

便利な置くだけ充電



専用充電スタンドにハンドピースを置くだけで充電できます。

360°ヘッド回転



ヘッドを回転させることで、上顎・下顎共に容易に照射できます。

照射可能回数は約900回



フル充電で約900回ご使用いただけます。
(ノーマルモード10秒で照射した場合)

MaxCure 9

MaxCure 9

商品コード	カラー	サイズ	入数	価格
FC-0531	ホワイト	本体サイズ：φ26×260mm ライトヘッド：照射部径φ10mm	1セット	50,000円
FC-0532	パープル			

販売名：Maxキュア9 一般医療機器 特定保守管理医療機器 届出番号 27B2X00268X00115



MaxCure 9 ライトヘッド

MaxCure 9 Light Head

商品コード	サイズ	入数	価格
FC-0534	φ15mm(接続部径)	1本	18,000円

仕様

- 電源：入力DC5V/1A
- バッテリー：3.6V 2,600mAh
- 種類：リチウムイオン
- バッテリー充電時間：2時間
- 本体サイズ：φ26×260mm
- 本体重さ：117g
- ライトヘッド：φ10mm
- 充電スタンドサイズ：70×60mm
- 充電スタンド重さ：138g
- 照射可能回数：約900回※
- ※フル充電の状態での、ノーマルモード10秒で照射した場合です。

MaxCure 9 専用バッテリー

Replacement Battery

商品コード	種類	入数	価格
FC-0604	リチウムイオン	1個	8,000円

A Cure Plus

1秒照射で2mmのレジンをスピード硬化。波長域385~515nmと広く様々な光重合材料に対応します。人間工学に基づいたホールドしやすいフォルムと極薄ライトヘッドで臼歯部への照射がスムーズです。



1年保証

最大光量：2,500mW/cm²
波長域：385~515nm



極薄のライトヘッド


4つのモードで
あらゆる場面に
対応する
光重合器です

極軽の
104g



A Cure Plus		
最大光量：2,500mW/cm ² 波長範囲：385~515nm		
モード	光量	照射時間
TURBO	2,500mW/cm ²	1・3秒
NORMAL	1,200mW/cm ²	5・10・15・20秒
ORTHO	2,500mW/cm ²	3秒×10回・5秒×10回
CHECK(う蝕検知)	600mW/cm ²	30・60秒

8.5mmの極薄のライトヘッド

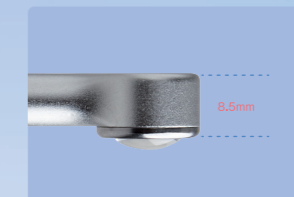

開口量の少ないお子さまやご年配の方に優しい薄いライトヘッドです。

充電スタンドライトメーター



充電スタンドにライトメーターを内蔵しています。



セット内容

- ライトヘッド
- ハンドピース
- アダプター
- バッテリー
- 充電スタンド
- 感染予防スリーブ100枚(先端25mm・先端50mm×300mm)
- ライトプロテクター
- 取扱説明書
- 保証書

仕様

- 電源：入力DC5V/1A
- バッテリー：3.7V 1,900mAh
- 種類：リチウムイオン
- バッテリー充電時間：2時間
- 本体サイズ：φ29.8×260mm
- 本体重さ：104g
- ライトヘッド：φ10mm
- 充電スタンドサイズ：80×70mm
- 充電スタンド重さ：169g
- 照射可能回数：約800回
- ※フル充電の状態での、ノーマルモード10秒で照射した場合です。

A Cure Plus 専用バッテリー

Replacement Battery

商品コード	種類	入数	価格
FC-0605	リチウムイオン	1個	8,000円

A Cure Plus

A Cure Plus

商品コード	サイズ	入数	価格
FC-0533	本体サイズ：φ29.8×260mm ライトヘッド：φ10mm	1セット	82,000円

販売名：Aキュアプラス 一般医療機器 特定保守管理医療機器 届出番号 27B2X00268X00116

A Cure Plus ライトヘッド

A Cure Plus Light Head

商品コード	サイズ	入数	価格
FC-0536	φ10mm	1本	20,000円

※ライトプロテクターはMax Cure 9とA Cure Plusの両方に使用できます。

ライトプロテクター

Light Protector

商品コード	入数	価格
FC-0538	1個	1,000円

