

premiumTM
plus JAPAN

バイオインクフロー


Bio-Ink-Flow

咬合紙トップブランド“バウシュ”が提案する床過圧部診査ペーストです。義歯による発赤部位をマーキングできる、チキソトロピー性に優れたカラーペースト（食用色素）です。



少量で細かく
コントロール

- 口腔内で識別しやすい緑色のペースト。
- 粘膜への付着性が高いペースト。
- アーラインのマーキングにも。
- 極細（先端径0.3mm）付属チップ使用で、こまかなコントロールが可能。
- ディスポーザブル ニードルチップで衛生的に使用可能。

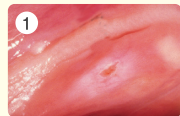

1 義歯による発赤です。



2 ニードルチップまたはマイクロアプリケーター（別売）で発赤部分にバイオインクを塗布します。



3 色が移った部分を切削します。

バイオインクフロー

Bio-Ink-Flow

商品コード	カラー	入数	価格
BK206	グリーン	1セット シリンジ1本(1ml)・ニードルチップ5本	3,000円

販売名：バイオインクフロー 一般医療機器 届出番号：27B3X00271000005

● 重度の炎症部位や化膿した部位には使用しないでください。

衛生面で安心でき、作業内容に合わせて選べるディスポーザブルのニードルチップ。
バイオインクフローにおすすめのチップです。

デリバリーチップ

Pre-bent Needle Tip



商品コード	種類	入数	価格
FC-0245	スタンダード	100本	7,000円

販売名：デリバリーチップ 一般医療機器 届出番号：27B2X00268X00045

ニードルチップ

Flowable Composite and Etching Gel Tips



商品コード	種類	カラー	入数	価格
(A) 080	20G 先端径0.9mm	ブラック		
(B) 081	23G 先端径0.6mm	ライトブルー	100本	3,000円
(C) 082	18G 先端径1.2mm	ピンク		

販売名：ニードルチップ 一般医療機器 届出番号：27B2X00268000053

Premium Plus Japan Co., Ltd. (プレミアムプラスジャパン株式会社)

〒560-0005 大阪府豊中市西緑丘1-1-31 5F

お問合せ窓口：06-6845-0050 9:00~17:00(土・日・祝祭日を除く)

商品センター：〒561-0805 大阪府豊中市原田南1丁目13番5号
(製造販売業)

※商品は税別価格となります。

担当販売店