

キュアリングライトに装着可能なアライナー矯正用のEZアタッチメント

圧接することで余剰レジンのバリが減り、アタッチメント装着の効率を大幅に向上させます。

アシスタントも不要になるため、一人でアタッチメントの設置が行えます。



照射エリアを集中させ硬化範囲を制限させます。



C02-C(クラシック)
C02-D(デュアル)
C02-M(ミニ)

EZアタッチメント ディスポーザブル 滅菌済

※スリーブの上から装着ください。

商品コード	サイズ	カラー	入数	価格
C02-PEZA-50	φ10×H10mm	ネイビー	50個	18,000円
C02-PEZA-10			10個	4,000円

対応機種 NEWキュアリングライトC02-C(クラシック)、NEWキュアリングライトC02-D(デュアル)、NEWキュアリングライトC01-D(デュアル)、キュアリングライトC02(販売終了)キュアリングライトミニC02



補助不要のアタッチメント接着

QRコードを読み込むと動画をご覧いただけます。

EZアタッチメントがセットになったスペシャルセット

NEWキュアリングライトC02 EZアタッチメントスターターキット

商品コード **FL-0102** セット価格 72,000円 | 商品コード **FL-0103** セット価格 100,000円 | 商品コード **FL-0104** セット価格 62,000円

1セット(EZアタッチメント50個入り+キュアリングライトC02-C) | 1セット(EZアタッチメント50個入り+キュアリングライトC02-D) | 1セット(EZアタッチメント50個入り+キュアリングライトミニC02)



セット内容

- ・EZアタッチメント×50
 - ・キュアリングライトC02-CまたはC02-DまたはミニC02
 - ・キュアリングライトプロテクティブライトシールド×1
 - ・125口腔内カメラ/ペン型キュアリングライトスリーブ×100(C02-CまたはC02-D)
 - ・228ペン型キュアリングライトスリーブミニ×100(ミニC02)
 - ・NEW熱保護リング・バッテリー・充電スタンド・ACアダプター(C02-CまたはC02-D)
 - ・USBケーブル(ミニC02)・取扱説明書・保証書
- ※EZアタッチメントはスリーブの上から装着ください。

NEWキュアリングライト
交換用バッテリー

商品コード **C01/2-1**

価格:8,000円

- 種類: リチウムイオン
- 入数: 1本

カラーは10色からお選びいただけます。

バッテリーはC01、C02共通です

- カラーは10色からお選びいただけます。
- ピンク ●オレンジ ●イエロー ●ライトグリーン ●ライム
 - ライトブルー ●ブルー ●ライトラベンダー ●ホワイト ●ブラック

premiumTM plus JAPAN

CURING LIGHT MINI 01,02



Premium Plus Japan Co., Ltd.(プレミアムプラスジャパン株式会社)
〒560-0005 大阪府豊中市西緑丘1-1-31 5F
お問合せ窓口: 06-6845-0050 9:00~17:00(土・日・祝祭日を除く)
商品センター: 〒561-0805 大阪府豊中市原田南一丁目13番5号
(製造販売業)

※商品は税別価格となります。

※製品のデザイン、仕様、外観、パッケージ、価格は予告なく変更する場合がございます。

担当販売店

CURING LIGHT MINI

MINI
軽量
80g台

従来の使いやすさはそのまま、
今までにない軽量な
キュアリングライトです。

波長域は440～480nm、
軽量なので使用者の負担も軽減します。

キュアリングライトC01、C02から小型軽量化を実現したキュアリングライトミニが新登場！

従来のキュアリングライトから約60%小型軽量化し、使用者の負担も軽減しました。

照射モード

モード	モード説明	照射光量	照射時間(秒)
FULL	光量 1,200mW/cm ² のモードです。	1,200mW/cm ²	5,10,15,20,25,30
SOFT	5秒間で900mW/cm ² まで上昇し、その後は900mW/cm ² で照射する。	900mW/cm ²	5,10,15,20,25,30

※3秒間ボタンを長押しすると「ビピッ」と音が鳴るので、その後ボタンを押しモードを選択します。
使用したいモードにランプが点いていることを確認し、3秒放置すると「ビピッ」と鳴りモードが固定されます。

充電コード

充電コードは汎用性の高い
USBケーブルCタイプを使用。
充電は置くだけ充電。
※ACアダプターは付属していません。



サイズ比較

従来のクラシック、デュアルと比べ、
約60%の小型軽量化に成功。

キュアリングライトC01に、小型化を実現した新ラインナップが登場！

従来の製品から約60%小型軽量化し、使用者の負担も軽減しました。

SELECT 1年保証



仕様

- 電源：入力 DC5V/1A
- バッテリー：3.6V 850mAh 種類：リチウムイオン
- バッテリー充電時間：2時間
- 本体サイズ：φ17×230mm
- 本体重さ：84g
- ライトガイド：φ8mm
- 充電スタンドサイズ：82×74mm
- 充電スタンド重さ：53g
- 自動電源 OFF 機能：60秒

セット内容

- ・ライトガイド
- ・ハンドピース
- ・バッテリー
- ・充電スタンド
- ・USBケーブルCタイプ(1m)
- ・228ペン型キュアリングライトスリーブミニ×100
- ・キュアリングライトプロテクティブライトシールド×1
- ・取扱説明書
- ・保証書

カラーは10色から
お選びいただけます

- ピンク ●オレンジ ●イエロー ●ライトグリーン
- ライム ●ライトブルー ●ブルー ●ライトラベンダー
- ホワイト ●ブラック

キュアリングライトC01ミニ

商品コード **C01-M** セット価格 42,000円

■本体サイズ：φ17×230mm ■ライトガイド：φ8mm ■入数：1セット

販売名：キュアリングライトミニ C01 一般医療機器 特定保守管理医療機器
届出番号：27B2X00268000057

キュアリングライトC01ミニ ライトガイド

商品コード **C01-M-1** 価格：10,000円

■サイズ：φ8mm ■入数：1本

キュアリングライトC02に、小型化を実現した新ラインナップが登場！

従来の製品からヘッドが1mm薄くなり、さらに約60%小型軽量化しました。

SELECT 1年保証



仕様

- 電源：入力 DC5V/1A
- バッテリー：3.6V 850mAh 種類：リチウムイオン
- バッテリー充電時間：2時間
- 本体サイズ：φ17×220mm
- 本体重さ：83g
- ライトヘッド：φ10mm
- 充電スタンドサイズ：82×74mm
- 充電スタンド重さ：53g
- 自動電源 OFF 機能：60秒

セット内容

- ・ライトヘッド
- ・ハンドピース
- ・バッテリー
- ・充電スタンド
- ・USBケーブルCタイプ(1m)
- ・228ペン型キュアリングライトスリーブミニ×100
- ・キュアリングライトプロテクティブライトシールド×1
- ・NEW熱保護リング×6
- ・取扱説明書
- ・保証書

カラーは10色から
お選びいただけます

- ピンク ●オレンジ ●イエロー ●ライトグリーン
- ライム ●ライトブルー ●ブルー ●ライトラベンダー
- ホワイト ●ブラック

キュアリングライトC02ミニ

商品コード **C02-M** セット価格 48,000円

■本体サイズ：φ17×220mm ■ライトヘッド：φ10mm ■入数：1セット

販売名：キュアリングライトミニ C02 一般医療機器 特定保守管理医療機器
届出番号：27B2X00268000058

キュアリングライトC02ミニ ライトガイド

商品コード **C02-M-1** 価格：15,000円

■サイズ：φ10mm ■入数：1本

キュアリングライトミニ 交換用バッテリー

商品コード **C01/2-M-1** 価格：8,000円

■入数：1本 ■種類：リチウムイオン

※C01-M/C02-M共通となります。

ペン型キュアリングライトスリーブミニ

商品コード **228** 価格：5,500円

■サイズ：38×250mm ■入数：500枚

※C01-M/C02-M共通となります。

C01 従来の使いやすさはそのままに、4秒照射を実現！
 2タイプの展開で、C01-D(デュアル)は青と紫の波長域を有し、さまざまな光重合材料に対応します。

口腔内にスムーズに挿入でき、
 特に舌側面への照射に適しています



NEW
 CURING
 LIGHT

クラシック

C01-C



波長範囲：440-480nm
 光量：1,500mW/cm²
 モード：4種類

5 TURBOモードで
 秒照射!!

NEW
 CURING
 LIGHT



デュアル

C01-D



波長範囲：390-430/440-480nm
 光量：2,000mW/cm²
 モード：7種類


4 TURBOモードで
 秒照射!!

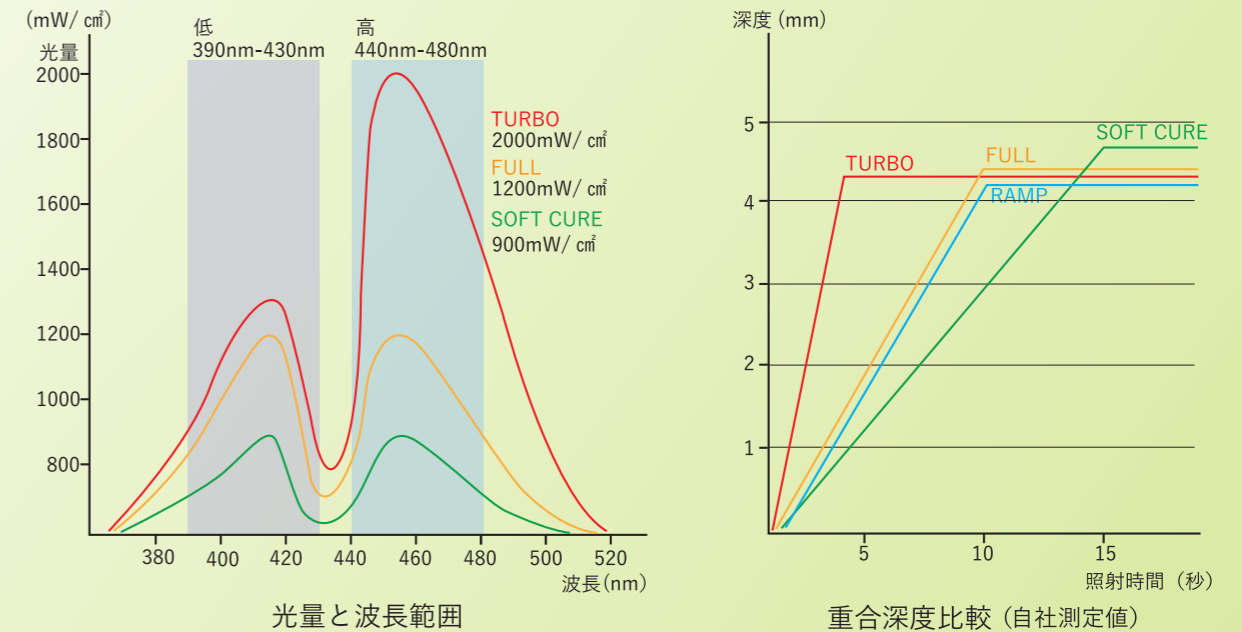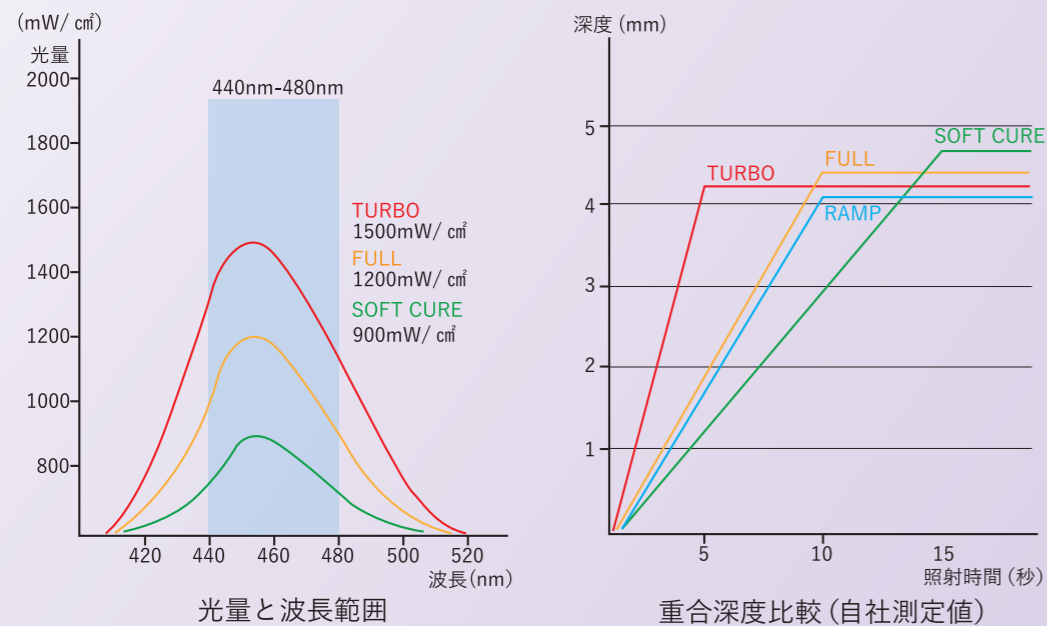

C02 より薄く進化したライトヘッドが、臼歯部への照射をサポートします!

C02-D(デュアル)は3秒照射に加え、青と紫の波長域を有し、さまざまな光重合材料に対応します。

90°の照射角度は少ない開口で遠心部への照射が可能です。

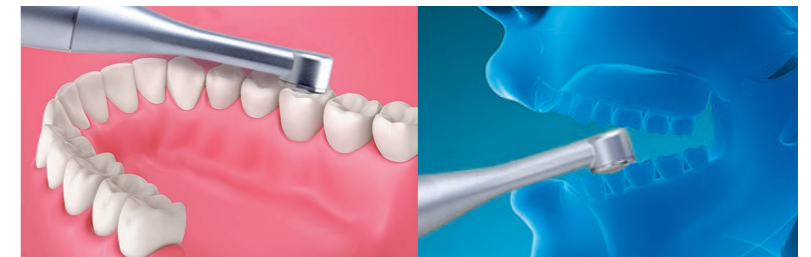

NEW
CURING
LIGHT

クラシック

C02-C

波長範囲：440-480nm
光量：1,500mW/cm²
モード：4種類

5 TURBOモードで
秒照射!!



NEW
CURING
LIGHT

デュアル


C02-D

波長範囲：390-430/440-480nm
光量：2,500mW/cm²
モード：7種類

3 TURBOモードで
秒照射!!

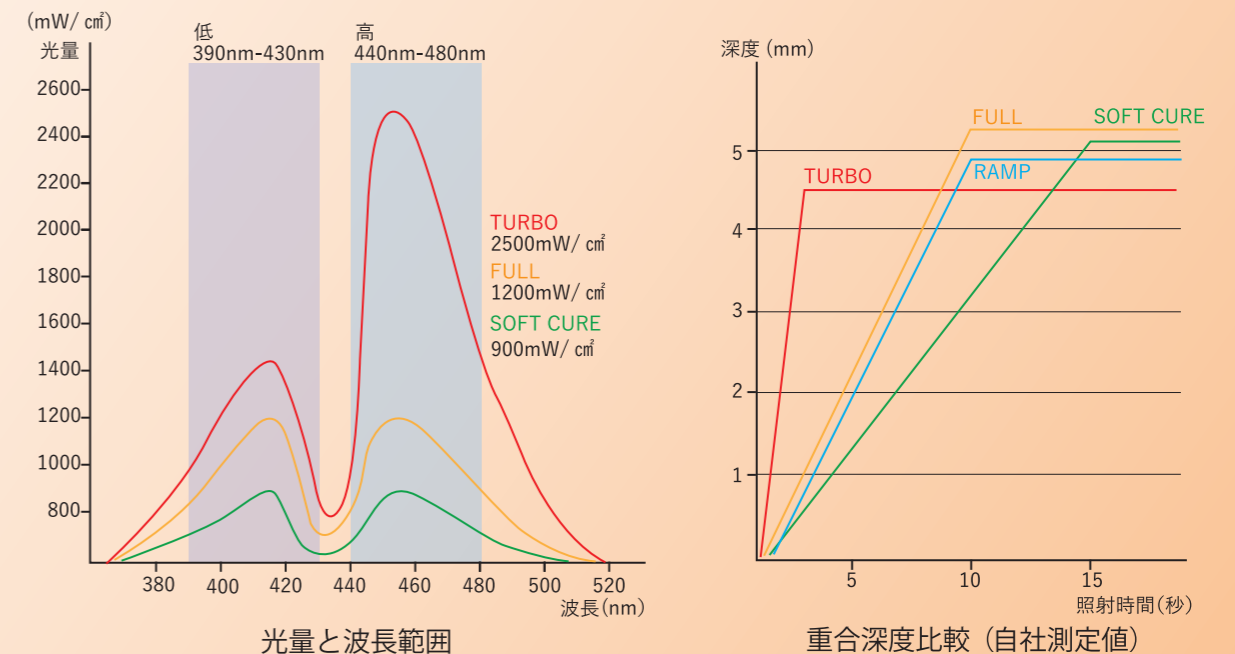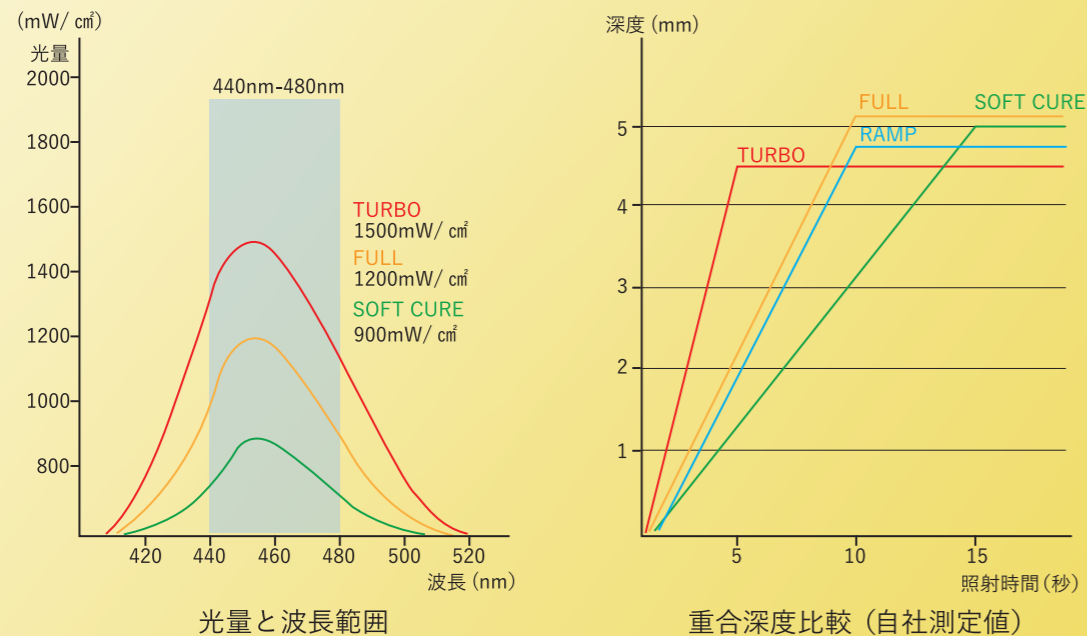

最もスタンダードなクラシック、
デュアルレンジを要する
ハイパワーモデルのデュアル。

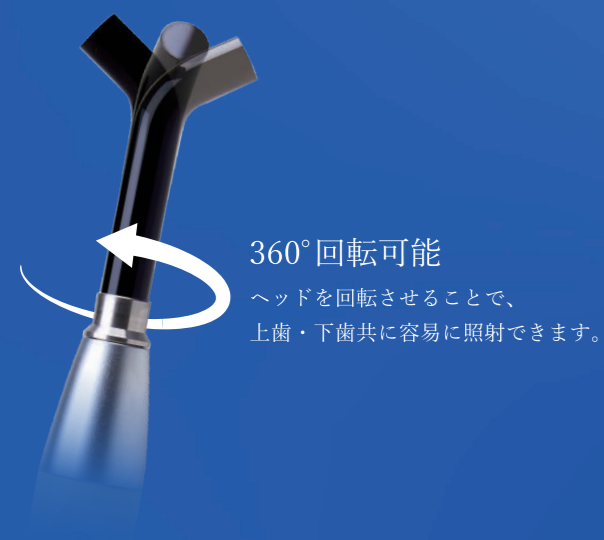


C01



ライトヘッドの厚みが約30%薄くなりました(当社比)。
NEWC02は、光が拡散しにくい設計になっています。

C02

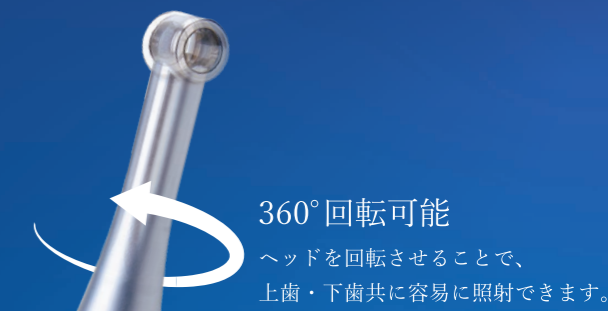

- ☑ 自社設計・自社工場での徹底した品質管理を行っております
- ☑ 咬合面・舌側面に適した照射角度と、光量は最大2,500mW/cm²のLED光重合器
- ☑ 10色展開のカラーバリエーションで簡単操作、持ち運びにも優れています
- ☑ バッテリー交換が簡単にできます

照射時間モード 照射時間切替は「TIME」ボタンを0.5秒押します。



簡単測定
照射器の光量をいつでも確認できます。
(表示の数値×100が光量となります)



簡単充電
置くだけで充電可能です。



簡単交換
バッテリーは抜くだけで交換可能です。

照射モード モード切替は「MODE」ボタンを0.5秒押します。

名称	モード設定
TACK (デュアルのみ)	仮照射に使用できます。接着性レジンセメントなどの余剰セメント除去に便利です。
TURBO	最も速く硬化させることができるモードです。光量はC02-D(2,500mW/cm ² (3秒)), C01-D(2,000mW/cm ² (4秒)), C01-C/C02-C(1,500mW/cm ² (5秒)) となります。
3'+3' (デュアルのみ)	メタルブラケットの接着に適しています。近心、遠心それぞれ3秒間照射し、照射の間は1秒間消えます。
6'+6' (デュアルのみ)	メタルブラケットやバカルチューブの接着に適しています。近心、遠心それぞれ6秒間照射し、照射の間は1秒間消えます。
FULL	光量 1,200mW/cm ² の照射モードです。
RAMP	5秒間で光量 1,200mW/cm ² まで上昇し、その後は光量をキープします。
SOFT CURE	5秒間で 900mW/cm ² まで上昇し、その後は光量をキープします。熱さに敏感な患者様に適しています。

	スペック比較					
製品画像						
製品名	C01-M(ミニ)	C01-C(クラシック)	C01-D(デュアル)	C02-M(ミニ)	C02-C(クラシック)	C02-D(デュアル)
最大光量	1,200mW/cm ²	1,500mW/cm ²	2,000mW/cm ²	1,200mW/cm ²	1,500mW/cm ²	2,500mW/cm ²
波長域	440~480nm	440~480nm	440~480nm 390~430nm	440~480nm	440~480nm	440~480nm 390~430nm
モード数	2	4	7	2	4	7
ヘッド形状						

安心のメーカー1年保証付き



NEWキュアリングライト クラシック C01-C



NEWキュアリングライト デュアル C01-D



NEWキュアリングライトC01クラシック

商品コード **C01-C** セット価格 48,000円

■本体サイズ：φ27×264mm ■ライトガイド：φ8mm ■入数：1セット
販売名：キュアリングライトC01-C 一般医療機器 特定保守管理医療機器 届出番号：27B2X00268000047

NEWキュアリングライトC01クラシック ライトガイド

商品コード **C01-C-1** 価格：8,000円 ■サイズ：φ8mm ■入数：1本

NEWキュアリングライトC01デュアル

商品コード **C01-D** セット価格 82,000円

■本体サイズ：φ27×264mm ■ライトガイド：φ11mm ■入数：1セット
販売名：キュアリングライトC01-D 一般医療機器 特定保守管理医療機器 届出番号：27B2X00268000048

NEWキュアリングライトC01デュアル ライトガイド

商品コード **C01-D-1** 価格：18,000円 ■サイズ：φ11mm ■入数：1本

カラーは10色からお選びいただけます。 ●ピンク ●オレンジ ●イエロー ●ライトグリーン ●ライム ●ライトブルー ●ブルー ●ライトラベンダー ○ホワイト ●ブラック



セット内容

- ・バッテリー・充電スタンド・ACアダプター
- ・123ペン型キュアリングライトスリーブ×100 (C01-C)
- ・123Lペン型キュアリングライトスリーブ×100 (C01-D)
- ・キュアリングライトプロテクティブライトシールド×1
- ・取扱説明書・保証書

仕様

- 電源：入力 AC100-240V,50/60Hz 出力 DC5V/1A
- バッテリー：3.6V 2,600mAh 種類：リチウムイオン
- バッテリー充電時間：2時間（フル充電の場合、20秒モードで約100回照射できます。）
- 本体サイズφ27×264mm ■本体重さ：206g (C01-C) 203g (C01-D)
- ライトガイド：φ8mm (C01-C) φ11mm (C01-D) ■充電スタンドサイズ：90×102mm
- 充電スタンド重さ：192g ■自動電源OFF機能：60秒

安心のメーカー1年保証付き



NEWキュアリングライト クラシック C02-C



NEWキュアリングライト デュアル C02-D



NEWキュアリングライトC02クラシック

商品コード **C02-C** セット価格 58,000円

■本体サイズ：φ27×257mm ■ライトヘッド：φ10mm ■入数：1セット
販売名：キュアリングライトC02-C 一般医療機器 特定保守管理医療機器 届出番号：27B2X00268000049

NEWキュアリングライトC02クラシック ライトヘッド

商品コード **C02-C-1** 価格：18,000円 ■サイズ：φ10mm ■入数：1本

NEWキュアリングライトC02デュアル

商品コード **C02-D** セット価格 88,000円

■本体サイズ：φ27×253mm ■ライトヘッド：φ10mm ■入数：1セット
販売名：キュアリングライトC02-D 一般医療機器 特定保守管理医療機器 届出番号：27B2X00268000050

NEWキュアリングライトC02デュアル ライトヘッド

商品コード **C02-D-1** 価格：25,000円 ■サイズ：φ10mm ■入数：1本

カラーは10色からお選びいただけます。 ●ピンク ●オレンジ ●イエロー ●ライトグリーン ●ライム ●ライトブルー ●ブルー ●ライトラベンダー ○ホワイト ●ブラック



セット内容

- ・バッテリー・充電スタンド・ACアダプター
- ・125口腔内カメラ/ペン型キュアリングライトスリーブ×100
- ・キュアリングライトプロテクティブライトシールド×1
- ・取扱説明書・保証書
- ・NEW熱保護リング×6

仕様

- 電源：入力 AC100-240V,50/60Hz 出力 DC5V/1A
- バッテリー：3.6V 2,600mAh 種類：リチウムイオン
- バッテリー充電時間：2時間（フル充電の場合、20秒モードで約100回照射できます。）
- 本体サイズφ27×257mm (C02-C) φ27×253mm (C02-D)
- 本体重さ：187g (C02-C) 174g (C02-D)
- ライトヘッド：φ10mm ■充電スタンドサイズ：90×102mm
- 充電スタンド重さ：192g ■自動電源OFF機能：60秒