

コストパフォーマンスに優れ、
種類も豊富なPMTC用プロフィーカップ。

Prophy Cups

プレミアムプラスジャパンの
プロフィーカップは全部で

39種類

その中でも注目商品は

タービン・ショートタービンタイプ


タービンタイプ

底面、側面どちらも使用可能、
清掃効率が飛躍的に向上します！



側面の凸凹が隣接面に入り込み、わずかな隙間も綺麗に
清掃していただけます。また、最後臼歯遠心や舌側、臼歯
部、口蓋側へのアプローチも効果的です。

ショートタービンタイプ

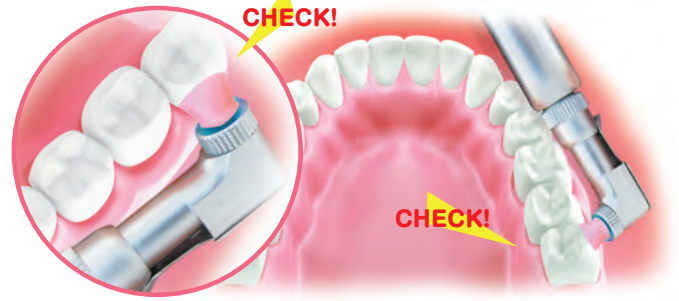

コンパクトなカップ形状で、口腔内の特に窮屈な場所への
アプローチに非常に有効的です。


タービンタイプのカップ内形状はペーストが飛び散りにくく、
より綺麗に磨いていただけるよう再設計。

大人気のPOINT




カップ内形状

ショートタービンはカップ形状が短いので、
小児や臼歯部の頬側隅角部、舌側側など
届きづらい場所を磨く場合に適しています。

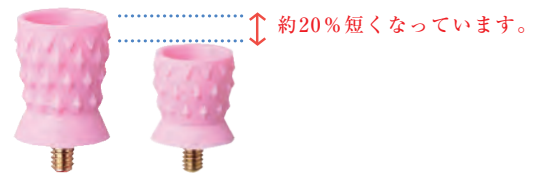

カップの柔らかさは3種類

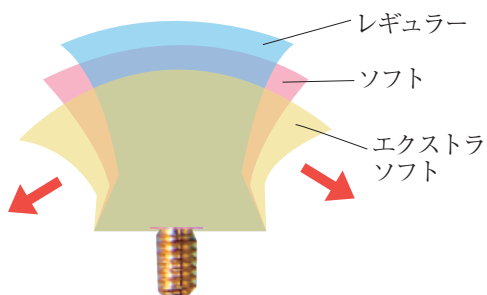

レギュラー

ソフト

エクストラソフト



スクリータイプと
コントラタイプを
ご用意しています。

※カラーバリエーションは全タイプ共通となります。

バリエーション豊富なブラシは
どのようなシチュエーションへも対応可能です。


Prophy Brushes

プレミアムプラスジャパンの
プロフィーブラシは全部で

36種類


その中でも注目商品は
マイクロタイプ・ジュニアタイプ

マイクロタイプ

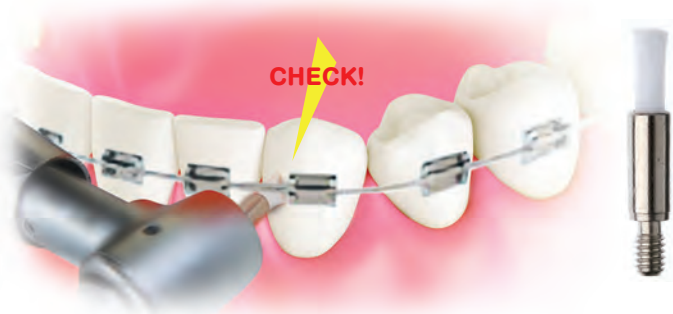

シーラント前の小窩裂溝、マージンライン、ブラケットの
清掃に適しています。

ジュニアタイプ

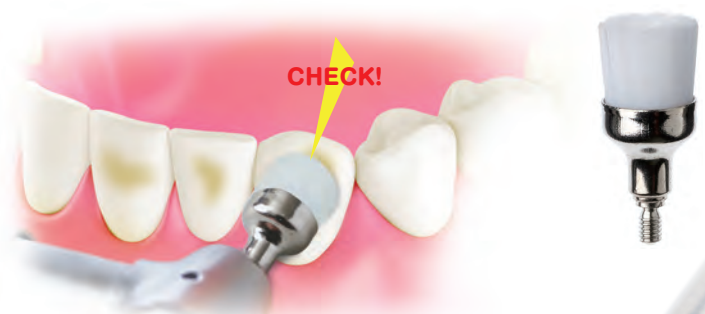


ジュニアタイプは歯の表面に付着した
特に酷いステインや歯石等を清掃できるよう
設計されたブラシ。

シーラント前の小窩裂溝、マージンライン、
ブラケットの清掃に適したマイクロタイプ。
ブラシ中央の空洞にペーストを入れる
ジュニアタイプ。



ブラシ中央の空洞にはペーストが入ります。

ブラシの柔らかさは3種類

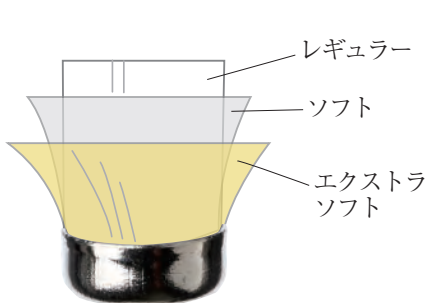

スクリュータイプと
コントラタイプを
ご用意しています。

レギュラー

ソフト

エクストラソフト



ホワイト



クリア



イエロー

詳細は下記よりご覧ください。

製品情報→予防歯科→プロフィーカップ
(プロフィーブラシ)



商品ページからチラシPDFも
ご覧いただけます。
PMTCカタログもご用意して
おりますので、お問い合わせください。

PMTC