

ソールバイト 単体チラシ

プレミアムプラスジャパンが自社研究を重ねて作り上げたハイクオリティの日本自社製品、ソールバイト。



ソールバイトスーパーファスト 単体チラシ

ソールバイトに比べ硬化が速くシャープなため、より精度の高い咬合採得が行えるスーパーファスト。

premiumTM
plus JAPAN

SOLEBITE Superfast

ソールバイト スーパーファスト

● Made in Japan

20
seconds

20秒で硬化 スピード&精確性のシリコーンバイト

口腔内保持時間20秒、トータル咬合採得時間35秒。
スピードのアドバンテージで患者様の苦痛を軽減、ケアタイムの短縮に。

PMTC カタログ

コストパフォーマンスに優れ種類も豊富なプロフィーカップとバリエーション豊富なプロフィーブラシのカタログ。



210×210mm 正方形サイズ 20 ページ カラー

PMTC カタログ

コストパフォーマンスに優れ種類も豊富なプロフィーカップとバリエーション豊富なプロフィーブラシのカタログ。



キャビネット・スツールカタログ

ヨーロッパ製のデザインと機能を兼ね備え、院内の空間を美しく演出するキャビネット・スツールのカタログ。



210×210mm 正方形サイズ 24 ページ カラー

バキュームミラー 単体チラシ

お使いのバキュームに接続、ミラーヘッドから吸引するバキュームミラーのご紹介チラシ。



バキュームミラー

● お使いのバキュームに接続。
ミラーヘッドから吸引するバキュームミラー。

● 一人診療時
バキュームのアシスタントがいない場合でも一人での診療を可能にします。

● 補綴セット時
常に吸い続けるのでミラーで圧排しながら防湿も同時にできます。

● 口腔内の狭い患者様に
タービン、ミラー、バキュームを入れるスペースがない場合に。



前後左右上下にある計22のバキューム孔が、
どのような角度でも吸い残しを許さず
且つ舌や粘膜を吸い込むことはありません。

※大きな切削片や歯石は吸引できない場合があります。

**反射率
99%**

**防曇
加工**

反射率99% 表面反射



バキュームミラー ロジウムコーティング
鏡面反射ミラー

反射率99%の鏡面反射ミラー。
ロジウムコーティング鏡面反射ミラーと比較し40%明るいミラーです。
<当社比較>

接続方法



別売「バキュームミラー用チューブ」をユニットのバキュームに挿して使用します。付属の変換アダプターでφ16mmとφ11mmに対応。

φ16mm φ11mm

φ10mm

307 別売リアダプターを使用し10mmにも取り付け可能です。

接続方法と吸引力を動画でご覧ください

バキュームミラー用チューブ(別売)



360°回転アダプター付の軽量チューブでミラー操作を妨げません。

セット内容



変換アダプター (16-11mm)
360°回転アダプター
ミラーホルダー

CM2-12 バキュームミラー用チューブ

CM24J399 3本カラーアソート

バキュームミラー
Vacuum Mirror

商品コード	種類	入数	価格
CM24J399	3本カラーアソート(No.4) (ブルー・イエロー・グリーン)	1セット	15,000円
CM2-12	バキュームミラー用チューブ		18,000円
307	アダプター-10mm	1個	900円

販売名: バキュームミラー 一般医療機器 届出番号: 2782X00268X00105
販売名: 挿入アダプター 一般医療機器 届出番号: 2782X00268X00037

**オート
クレープ
OK**

エンドゲージ付ミラー 単体チラシ

反射率99%、防曇加工済み。便利なエンドゲージ付きの軽量ミラー。



→ Piece by Piece with pleasure ←

エンドゲージ付ミラー




● 従来のステンレス製ミラートップ・ハンドルと比べ、重さは約半分の13g！

反射率
99%

防曇
加工

反射率99% 表面反射



バキュームミラー



ロジウムコーティング
表面反射ミラー

反射率99%の表面反射ミラー。ロジウムコーティング表面反射ミラーと比較し40%明るいミラーです。
<当社比較>

エンドゲージ



30mmまで1mm計みで測れる便利なエンドゲージ。診療効果をアップします。

エンドゲージ付ミラー
 Dental Mirror with Endo Gauge

商品コード	種類	入数	価格
CM141699	エンドゲージ付ミラー No.4	6本	10,000円

販売名：エンドゲージ付きミラー 一般医療機器 届出番号：278200268X100106



フィンガーグリップ付きでホールド性抜群。

Premium Plus Japan Co.,Ltd. (プレミアムプラスジャパン株式会社)
 〒563-0025 大阪府池田市城南1-4-2 2F
 〈お問合せ窓口〉072-735-7101 9:00～17:00(土・日・祝祭日を除く)
 商品センター：〒561-0805 大阪府豊中市原田南1-13-5
 (製造販売業)

※商品は税別価格となります。

担当販売店

F0842103-01

X線防護エプロン 単体チラシ

鉛当量 0.175mmPd、重さ 1.95kg の扱いやすい防護エプロンです。

premiumTM
plus JAPAN
→ Piece by Piece with pleasure ←

X線防護エプロン

- 鉛当量0.175mmPd、重さ1.95kg。
軽いので患者様の負担が少なく、
扱いやすいX線防護エプロン。
- 背面にも鉛が入っており、
X線からしっかりガードします。

前面 裏面

生地部分拡大 バイピング部分拡大

A ブルー B レッド

体の前後をしっかりガードします。
背面マジックテープ式で軽快に脱着できます。

全面が長過ぎず、座位での撮影でも背面が短いのもたつきません。

700mm
500mm
鉛当量0.175mmPd

X線防護エプロン

X-ray Protective Apron

商品コード	サイズ	カラー	入数	価格
A HBOG-1B	丈700×幅500mm	●ブルー	1着	18,000円
B HBOG-1R		●レッド		

販売名：X線防護エプロン 一般医療用 届出番号 2782X00268X00100

ディスポーザブルインスツルメント チラシ

ディスポーザブル商品3種類をご紹介します。



→ Piece by Piece with pleasure ←

ディスポーザブル インスツルメント

- 個包装滅菌済で衛生的なディスポーザブルタイプ。
- 訪問診療や往診、学校検診など幅広くご利用ください。



3in1

訪問診療にも便利で衛生的な個別包装仕様です。





ミラー
エキスプローラー
ピンセット

便利で衛生的な
個別包装仕様

滅菌済ディスポインスツルメント

Presterilized Disposable Dental Instruments

商品コード	種類	入数	価格
LK-112	ミラー		3,000円
LK-120	エキスプローラー	100本	
LK-122	ピンセット		4,000円
LK-106	3in1	20セット	2,000円

販売名：滅菌済ディスポインスツルメント 一般医療機器 届出番号：27B2X00268X00098

衛生的な使い捨ての紙トレーです。



※インスツルメントは別売です。

ペーパートレー(コーティング付)

Paper Tray

商品コード	サイズ	入数	価格
FC-0252	W230×D135×H15mm(外寸)	100枚	1,200円

※こちらの商品は袋包装になります。

曇り止め加工されているディスポーザブルミラー。



φ22mm

ディスポーザブルミラー

Disposable Mouth Mirrors

商品コード	サイズ	入数	価格
N800	全長：163mm ミラー部分：φ22mm	10本	800円

販売名：ディスポーザブルミラー 一般医療機器 届出番号：27B2X0026800005

Premium Plus Japan Co.,Ltd. (プレミアムプラスジャパン株式会社)
 〒563-0025 大阪府池田市城南1-4-2 2F
 (お問合せ窓口) 072-735-7101 9:00～17:00(土・日・祝祭日を除く)
 商品センター：〒561-0805 大阪府豊中市原田南1-13-5
 (製造販売業)

※商品は税別価格となります。

担当販売店

F0862103-01

根管洗浄関連製品 チラシ

バリエーション豊富なイリゲーションニードルと合わせて使用できるルアーロックシリンジのご紹介。



→ Piece by Piece with pleasure ←

根管洗浄関連製品

バリエーション豊富なイリゲーションニードルと合わせて使用できるルアーロックシリンジ。


● 外筒は透明なので、薬液の混濁や異物混入を容易に見えます。最小目盛から最大目盛まで、安定した気密性を保持できます。

① 1.2cc (キャップ付き)

② 3cc

③ 6cc

④ 12cc



ルアーロックシリンジ


Luer-Lock Syringe

ディスポーザブル

商品コード	種類	入数	価格
A 310W	1.2cc キャップ付き	100本	4,000円
B 240	3cc	50本	3,000円
C 241	6cc	50本	2,000円
D 242	12cc	100本	4,200円

●未減額
販売名: ルアーロックシリンジ 一般医療機器 届出番号 2762X00268X00095

● 細い根管に適した31Gの根管洗浄用ニードル。段差の2つの側孔から理想的に薬液を噴出します。

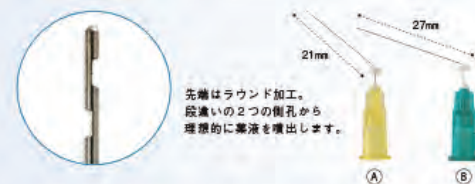

先端はラウンド加工。段差の2つの側孔から理想的に薬液を噴出します。

21mm

27mm

A B

オプティプローブ


OptiProbe Needle Tips

ディスポーザブル

商品コード	種類	カラー	入数	価格
A 221-20	31G 21mm	イエロー	20本	3,700円
B 222-20	31G 27mm	グリーン	20本	3,700円
221-50	31G 21mm	イエロー	50本	9,000円
222-50	31G 27mm	グリーン	50本	9,000円

●未減額
販売名: オプティプローブイリゲーションニードル 一般医療機器 届出番号 2762X00268X00096
※ 1.2ccシリンジ専用

● 縦長のノッチで薬液ソフトに噴出します。ニードルは自由に曲げて使用できます。



A B C

イリゲーションニードル

Irrigation Needle Tips

ディスポーザブル

商品コード	種類	カラー	入数	価格
A 238	23G	ブルー	100本	2,800円
B 239	27G	イエロー	100本	2,800円
C 232	30G	ピンク	100本	4,600円

●未減額
販売名: イリゲーションニードル 一般医療機器 届出番号 2762X00268X00090



先端φ0.7mm

先端φ0.3mm

マイクロアプリケーター
ウルトラファイン

エンドブラシ
アプリケーター

エンドブラシアプリケーター

Endo Brush Applicators

ディスポーザブル

商品コード	サイズ	カラー	入数	価格
3223	全長60mm	ブラック	100本	2,500円

Premium Plus Japan Co.,Ltd. (プレミアムプラスジャパン株式会社)
〒563-0025 大阪府池田市城南1-4-2 2F
〈お問合せ窓口〉072-735-7101 9:00 ~ 17:00 (土・日・祝祭日を除く)

商品センター: 〒561-0805 大阪府豊中市原田南1-13-5
(製造販売業)

※商品は税別価格となります。

担当販売店

F0862103-01

フロス&歯間ブラシ チラシ

オーラルケアの必須アイテム、豊富なラインナップをご用意しています。



フロス&歯間ブラシ

オーラルケアの必須アイテム。豊富なラインナップをご用意しています。

● スペシフィックフロス
ブリッジ・インプラント・矯正ブラケット等広い歯間空隙の清掃に。

50

お値打ち価格
本入

患者参考価格：
1本あたり約28円
1,400円/個（税別）



箱中央部を切り取ると
ミシン目から1本ずつ
簡単に取り出すことが
出来ます。

スムーズな清掃



フィラメント部の表面は滑らかに加工。
ガシガシとした不快感はなくスムーズに清掃できます。

狙った場所に



挿入部がまっすぐ伸びており、水分も含みにくく
狙った場所に挿入しやすくなっています。



挿入部拡大



フィラメント部拡大

スレッダー-80mm フィラメント-140mm スレッダー-80mm

スペシフィックフロス
Specific Floss

商品コード	サイズ	入数	価格
FC-0505	全長300mm(フィラメント部140mm)	50本	1,100円

● ビックミラフロス
ワックス付きのため滑りが良い、ミントフレーバーとノンフレーバーの2つのフロスが取り付け可能。



ビックミラフロス
MiraBoss Big

商品コード	サイズ	カラー	入数	価格
FC-0121	W78×D43×H103mm	ホワイト	1個	6,800円

フロス付(ホワイト：ノンフレーバー/ワックス付 ブラック：ミントブラック/ワックス付)

ラックにも固定ができます。

ビックミラフロス 替えフロス
MiraBoss Big Refills

商品コード	種類	サイズ	カラー	入数	価格
(A) FC-0122	ミントブラック/ワックス付	200m	ブラック	1本	1,000円
(B) FC-0123	ノンフレーバー/ワックス付		ホワイト		

フロス & 歯間ブラシ チラシ

オーラルケアの必須アイテム、豊富なラインナップをご用意しています。

定番のV字ストレート型。ワイヤーの根本を直角に折ることでL字になり白歯部へのアクセスも楽に行なえます。

L字に曲がります。

最小通過径 mm

(A)	(B)	(C)
<0.8	<0.9-1.0	1.1-1.2
(D)	(E)	(F)
1.3-1.5	1.6-1.8	>1.9

サイズ表記は当社規格に基づくものです。

毛(ナイロン) ワイヤー(ステンレス) 柄・キャップ(PP)

EZ歯間ブラシ

EZ Interdental Brushes

商品コード	種類	カラー	入数	価格	
(A) G800-1	SSS	ラベンダー	6本	400円	
(B) G800-2	SS	ホワイト			
(C) G800-3	S	イエロー			
(D) G800-4	M	ピンク			
(E) G800-5	L	ブルー			
(F) G800-6	LL	グリーン			
G800-ASS	アソート	-	6本(各1本)		
G800-1-B	SSSカートン	ラベンダー	6本×10	3,600円	
G800-2-B	SSカートン	ホワイト			
G800-3-B	Sカートン	イエロー			
G800-4-B	Mカートン	ピンク			
G800-5-B	Lカートン	ブルー			
G800-6-B	LLカートン	グリーン			
G800-ASS-B	アソートカートン	-			6本(各1本)×10

あたりの柔らかい歯間ブラシです。幅広ハンドルは指先でも持ちやすい形状です。

(A) (B)

ディスポーザブル歯間ブラシ

Disposable Interdental Brush

商品コード	種類	サイズ	入数	価格
(A) 3222	イントロパック	全長60mm	20本入ケース×10	4,000円
(B) 3222B	100本入り	ブラシ21mm φ0.8mm	100本	2,000円

白歯部やブラケット、インプラント等の清掃しにくい部位に最適。

137mm

120°

60° 120°

ブラシが収納できます。

I-ブロックポイントブラシ(携帯用ワンタフトブラシ)

I-Prox

商品コード	カラー	入数	価格
(A) FC-0134	※	ポイントブラシ×4個 ホルダー×1本	1,000円

※[FC-0134]は2色からお選びいただけます。●ブルー ●ピンク
※ブラシの差し込み角度を変えることで60°と120°の角度で使用可能です。
ハンドルには替えブラシの収納も可能。

I-ブロックポイントブラシ替えブラシ

I-Prox P Replacement Brushes

商品コード	入数	価格
(B) FC-0135	4個	500円

緩やかなカーブの先端で歯間部に挿入しやすく、ホルダーには歯間ブラシの替えを収納出来て便利です。替えのブラシは7サイズあり、歯間に合わせて使い分けが可能です。

115mm

120°

ブラシが収納できます。

(A) (B) (C) (D) (E) (F) (G)

ピックブラシセット(携帯用歯間ブラシセット)

Pic-Brush Set Holder with 1 Brush

商品コード	カラー	入数	価格
FC-0126	※	歯間ブラシ×1本 ホルダー×1本	500円

※[FC-0126]は2色からお選びいただけます。
●ブルー(ブラシ:ファイン付) ●ピンク(ブラシ:エクストラエクストラファイン付)

ピックブラシ替えブラシ(携帯用歯間ブラシ替えブラシ)

Pic-Brush Replacement Brushes

商品コード	種類	サイズ	カラー	入数	価格
(A) FC-0127	エクストラエクストラファイン	φ1.5mm	ピンク	6個	900円
(B) FC-0128	エクストラファイン	φ1.8mm	イエロー		
(C) FC-0129	ファイン	φ2.0mm	ホワイト		
(D) FC-0130	ミディアム	φ2.2mm	グリーン		
(E) FC-0131	ラージ	φ3.0mm	ブルー		
(F) FC-0132	エクストララージ	φ6.5mm	エンジ		
(G) FC-0133	コニカル	φ2.5~5.0mm	オレンジ		

Premium Plus Japan Co.,Ltd. (プレミアムプラスジャパン株式会社)
〒563-0025 大阪府池田市城南1-4-2 2F
(お問合せ窓口) 072-735-7101 9:00~17:00(土・日・祝祭日を除く)
商品センター (製造販売業) : 〒561-0805 大阪府豊中市原田南1-13-5
※商品は税別価格となります。

担当販売店

F0852103-01

マイクロモーター 単体チラシ

軽量で手軽に持ち運べる充電式マイクロモーター。裏面はフットコントロール付きマイクロモーター。



→ Piece by Piece with pleasure ←

マイクロモーター PRIME1210

本体1年保証

部品6ヵ月保証

- 軽量で手軽に持ち運べる充電式マイクロモーター。
- ブラシレスモーターで静音タイプ。
- 最高回転数30,000rpm。
3時間の充電で約25時間使用可能。
- 往診時でも場所を選びません。



Eタイプモーター
お使いのコントラ・ストリート (ISO規格) がご利用になれます。
(フット付のハンドピースは除きます)



HPタイプモーター



手のひらサイズでコンパクト。



使用中の動画を
ご覧ください



フバーパッド滑り止め付。
ベルトクリップ付。
正逆回転機能付き。グリーンは正回転、レッドは逆回転。

仕様

- 本体サイズ: W65 x L129 x H27mm
- 重量: 295g
- 電源: 入力AC100~240V 50/60Hz
- ハンドピース: 重量: 64g

セット内容

- ・ 本体×1
- ・ ハンドピース×1
- ・ ACアダプター×1
- ・ フバーパッド×1
- ・ ベルトクリップ×1
- ・ ケース×1
- ・ ハンドピーススタンド×1
- ・ ハンドピースホルダー×1 (Eタイプのみ)

マイクロモーター PRIME1210 (Eタイプ)

商品コード	種類	カラー	入数	価格
PRIME1210B	Eタイプ	ブラック	1セット	58,000円
PRIME1210C		ホワイト		

販売名: マイクロモーター 一般医療機器 届出番号: 2782X00368X00085

マイクロモーター PRIME1210 (HPタイプ)

商品コード	種類	カラー	入数	価格
PRIME1210HPB	HPタイプ	ブラック	1セット	60,000円
PRIME1210HPW		ホワイト		

販売名: マイクロモーター 一般医療機器 届出番号: 2782X00368X00085



HPタイプモーター
(フバーが使えます)

マイクロモーター 単体チラシ

充電式軽量小型マイクロモーターフットコントロール付き。表面は充電式マイクロモーター。



— Piece by Piece with pleasure —

マイクロモーター RENHE315

6か月保証



スピードコントローラーで出力0にするとすぐに回転をストップするクイックストップ仕様。

- 軽量小型マイクロモーターフットコントロール付き。
- 最高回転数35,000rpm。



ON/OFF
マニュアルフット切替スイッチ
正逆回転切替スイッチ
ケーブル差込口

チェアサイドでの活用例



コンパクトなモーターカートにマイクロモーターと電源線を乗せています。デンチャーや補綴物の調整に。

下記の当社取扱い商品を組み合わせています。

1. エレファントダストコレクター (ライト付を標準)
2. マイクロモーター-RENHE315
3. モーターカート3段(電源用)

使用例

仕様

- 本体サイズ: W120×D150×H80mm
- 重量: 1,110g
- 電源: 入力AC110-120V 50/60Hz
- ハンドピース重量: 220g
- 最高回転数: 35,000rpm



セット内容

- ・本体×1
- ・電源ケーブル×1
- ・ハンドピース×1
- ・フットコントロール×1
- ・ハンドピーススタンド×1
- ・カーボンブラシ×1ペア
- ・工具×1



マイクロモーター
Renhe315

商品コード	入数	価格
RENHE315	1台	35,000円

販売名: マイクロモーター 一般医療機器 届出番号: 2782X00268X00085

Premium Plus Japan Co.,Ltd. (プレミアムプラスジャパン株式会社)
〒563-0025 大阪府池田市城南1-4-2 2F
〈お問合せ窓口〉072-735-7101 9:00～17:00(土・日・祝祭日を除く)

商品センター: 〒561-0805 大阪府豊中市原田南1-13-5
(製造販売)

※商品は税別価格となります。

担当販売店

F0641912-01

MIRRORS カタログ

高品質な疎水性ミラー、エアフローシステムなど機能的なミラー商品を紹介したカタログ。



210×210mm 正方形サイズ 12 ページ カラー

デンタルアートカタログ

テイストの違う3名の人気有名作家が手がけるプレミアムプラスジャパンだけのオリジナル作品。



エヴァサクションミラー チラシ

お使いのパキュームにそのまま接続も可能、ミラーヘッドから吸引するサクションミラー。



エヴァ サクションミラー

お使いのパキュームにそのまま接続も可能
ミラーヘッドから吸引するサクションミラー



φ11mm

ライトグリーン ライトブルー ライトラベンダー オレンジ イエロー



POINT

前後左右上下にある計21のパキューム孔が、どのような角度でも吸い残しを許さず、且つ舌や粘膜を吸い込むことはありません。
※大きな切削片や歯石は吸引できない場合があります。

φ11mm φ11mm 16mm 10mm

POINT

ミラーハンドルエンドはφ11mmなのでお使いのパキュームに直接接続可能。
径が違う場合は別売3Dサクションチューブや交換アダプターをご使用ください。

別売の3Dサクションチューブには診療時に邪魔にならない軽量のサクションチューブに3Dアクセスジョイントがプリセットされています。人間工学に基づいて設計された3Dアクセスジョイントは360°回転することで操作時のチューブのねじれを防ぎ、診療・治療時の操作性が著しく向上します。

POINT

超音波洗浄時のミラーへの傷を防ぐ専用ミラー保護カバーが付属しています。

反射率98%の防曇加工表面反射ミラー。傷がついてしまった場合もミラーのみを取り換えるエコフレンドリーな交換方法を採用。



360°

詳細動画
ございます



セット内容



M7-3



M7-5



M7-P11



305 307

エヴァ サクションミラー

M7 Eva 3D HVE Suction Mirror

商品コード	種類	入数	価格
3本カラーアソート			
M7-3	ミラー 3枚セット/交換用防曇ミラー 2枚/専用ミラー交換キー 1個/専用ミラー保護カバー 3個 (ライトブルー・イエロー・ライトグリーン)		42,000円
5本カラーアソート			
M7-5	ミラー 5本/交換用防曇ミラー 4枚/専用ミラー交換キー 1個/専用ミラー保護カバー 5個/ホルダー 1個 (ライトラベンダー・ライトブルー・オレンジ・イエロー・ライトグリーン)	1セット	60,000円
M7-P11	エヴァ 3Dサクションチューブ 3Dサクションチューブ1.8m1本/ホルダー 1個		20,000円
R98-10A	交換用防曇ミラー (R98%) ミラー 10枚/プラグ10個		15,000円
305	アダプター オーフルエバキューター用/16mm		
307	アダプター オーフルエバキューター用/10mm	1個	900円

販売名: M7 サクションミラー 一般医療機器 届出番号: 12E3X00034000120
販売名: 排唾型アダプター 一般医療機器 届出番号: 27E2X0026800037

製造販売業者 株式会社アイ・メテックス


販売業者 Premium Plus Japan Co.,Ltd.
(プレミアムプラスジャパン株式会社)

〒563-0025 大阪府池田市城南1-4-2 2F
 (お問合せ窓口) 072-735-7101 9:00~17:00(土・日・祝祭日を除く)

※商品は税別価格となります。


滅菌ケース チラシ

各種インスツルメント、インプラント用ドリル、エンドファイルに適したケースをご用意。





滅菌ケース

収納したまま超音波洗浄・高圧蒸気滅菌・保管できる滅菌ケース
各種インスツルメント、インプラント用ドリル、
エンドファイルに適したケースをご用意いたしました



収納されたいインスツルメントの長さ、厚さに合わせてお選びください。
振動による傷への傷を防ぐため、超音波洗浄のみ重を外した状態で行ってください。

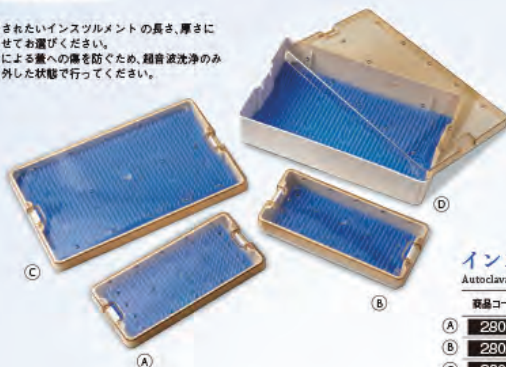




各ケースには専用のシリコンマットが1枚付属。

インスツルメント滅菌ケース

Autoclavable Instrument Case


製品コード	種類	サイズ	入数	価格
A 2801	#1	L174×W79×H18mm	1セット	8,500円
B 2802	#2	L174×W79×H28mm		18,000円
C 2803	#3	L241×W149×H17mm		22,000円
D 2806	#6	L237×W145×H54mm		

※サイズは内寸です。



ヘッド長20mm以下のドリル・バーを収納できます。

インプラント用ドリルやCAバーを収納管理できます。
超音波洗浄のみ重を開けた状態で行ってください。

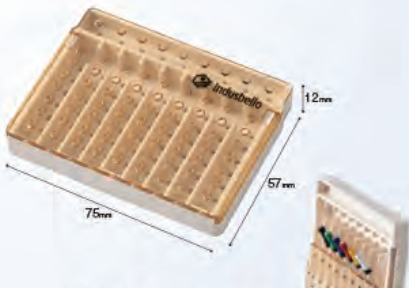

ファイルが取り出しやすい角度に飛び出る設計です。
スライド式の蓋がファイルの腐敗を防ぎます。

ドリル滅菌ケース

Autoclavable Drill Case

製品コード	種類	入数	価格
E 2807S	9孔	1個	3,800円
F 2807M	12孔		4,500円
G 2807L	15孔		5,000円

エンドファイル滅菌ケース

Endo File Case

製品コード	種類	入数	価格
2818	ファイル容量9本	1個	3,500円


Premium Plus Japan Co.,Ltd. (プレミアムプラスジャパン株式会社)
〒563-0025 大阪府池田市城南1-4-2 2F
〈お問合せ窓口〉072-735-7101 9:00～17:00(土・日・祝祭日を除く)
商品センター (製造販売) : 〒561-0805 大阪府豊中市原田南1-13-5
※商品は税別価格となります。

担当販売店

F0742008-01

マジックタッチ 単体チラシ

硬く時間のかかるジルコニアの切削を圧倒的スピードで実現したマジックタッチのご紹介。




マジックタッチ

硬く時間のかかるジルコニアの切削を圧倒的スピードで実現。

ジルコニアを撤去するケースが増えています。症例を前にして慌てる前に備えの1本を。
ポーセレン、ジルコニア、E-Max®に適したダイヤモンドバー。

- ① ダイヤモンド粒子のサイズ、形状が均一。すべての粒子が効果的に作用し短時間で切削が可能です。ポーセレンは数秒で、ジルコニアコーピングも短時間でカットします。
- ② 細かいダイヤモンド粒子は切削中の微小亀裂の発生および熱の発生を抑えます。




ジルコニアクラウンの分割除去も短時間で行えます。

拡大写真 (×400倍)

マジックタッチ

他社ブランド


均一なサイズの粒子全てが、効果的に切削を進めます。



咬合面やマージン調整にも。

YouTube

マジックタッチ スピード



ジルコニアを短時間でカットしている動画をご覧ください


STRAUSS & CO. INDUSTRIAL DIAMONDS LTD.

FG用													HP用									
エンドアクセス	ジルコニアクラウンリムーバー				舌・口蓋側				咬合面				マージン調整									
A3PF	A4PF	B4PF	M3PF	C31PF	T2PF	K2PF	K2RPF	PR2PF	PR15PF	E12PF	E7PF	E5PF	H19RPF	H27RPF	H37PF	H24PF	H13PF					
001-018	001-022	225-018	198-018	197-025	298-022	257-023	277-023	254-018	170-012	172-012	130-012	249-014										
018	022	018	018	025	022	023	023	018	012	012	012	014										
—	—	5	9	8	8	5.3	4.4	3	4	8	8	8										
19	19	19	21	21.5	20.5	20	19	19	20	22	21	21										
エンドアクセス				ジルコニアクラウンリムーバー				舌・口蓋側				咬合面				マージン調整						
入数													2									
価格																		1,800円				
MAGIC T1	○	○											○	○			○	○				
MAGIC T2	○	○											○	○			○	○				
MAGIC T3	○	○		○						○			○	○			○	○				

HP用					
商品コード	H19RPF	H27RPF	H37PF	H24PF	H13PF
ヘッドサイズ	024	033	023	024	019
ヘッド長	10	9.3	8	6.9	—
全長	44.5	44.5	44.5	44.5	44.5
入数	1				
価格	2,400円				

マジックタッチ

販売名：マジックタッチ 一般医療機器 届出番号：2782X00268000030



シリコンバースタンド チラシ

FG、CA、HP あらゆるバーをホールドするシリコンバースタンド。



シリコンバースタンド

FG、CA、HP あらゆるバーをホールドするシリコンバースタンド。
患者ごとにバーをセットしてチェアサイドに。エアロゾルから保護するカバー付き。



POINT

患者ごとにバーをセットしてチェアサイドに。

治療後はバーを挿したまま滅菌工程へ。

FG、CA、HP あらゆるバーを収納。

ひっくり返してもバーが落ちないホールド性。
滅菌中やチェアサイドでバーを紛失しない。

バー間隔が広く、抜き差しが容易。

グロメットの買い替え不要。

カバーをしたままオートクレーブ可



底に設けられたスリットやグロメットホールから高圧蒸気が行き渡る設計。
(クラスS以上のオートクレーブ)

エアロゾル感染対策に



全体をカバーし、エアロゾルからガードします。



カバー部
耐熱性・耐薬品性の高い
ポリスルホン樹脂

ベース部
医療グレードの
高耐久シリコン



5孔

10孔

25孔

25孔ラージ



動画で製品特徴を
ご覧いただけます。

シリコンバースタンド

Silicone Bur Stands

商品コード	種類	サイズ	入数	価格
FC-0491	5孔	W74×D31×H35mm	1個	3,200円
FC-0492	10孔	W74×D40×H35mm		4,500円
FC-0493	25孔	W74×D80×H35mm		5,500円
FC-0494	25孔ラージカバー	W74×D80×H72mm		7,000円

※5孔はブラック以外の6色からお選びいただけます。
※10孔、25孔、25孔ラージカバーは6色からお選びいただけます。

○ホワイト ●ピンク ●パープル ●ブルー ●オレンジ ●ブラック

オート
クレーブ
OK

シリコンエンドスタンド、オーガナイザー チラシ

カバー付きのエンドスタンド、オーガナイザー商品のご紹介。



事前に使用するファイルセット。
治療中に必要なファイルを探す時間と手間を省きます。

シリコンエンドスタンド

ファイルを覆うカバー付き。



中央のエンドゲージでエンドストップからの長さを計測。
1mm毎に深さの異なるゲージで簡単にエンドストップの位置を決定。



患者ごとにファイルをセットしてチェアサイドに。
使用前のオートクレープもカバーをしたまま可能です。
(Sクラス以上のオートクレープ)
※スポンジは含まれません。FC-0496A ガンジをお求めください。



スポンジはディスクですが、
使用前のオートクレープが可能です。



ホワイト ピンク パープル ブルー オレンジ

シリコンエンドスタンド

Silicone End Stands

商品コード	サイズ	入数	価格
FC-0495	W97×D57×H77mm	1セット	14,000円
FC-0496	スポンジ	25個	3,800円

※(FC-0495)は5色からお選びいただけます。○ホワイト ●ピンク ●パープル ●ブルー ●オレンジ



インプラント、ベニア、クラウン等補綴物を歯式に合わせてスマートに整理。
そのままオートクレープも可能です。ステンやグレースのパレットとしても。
エアロゾルから保護するカバー付き。

シリコン歯式オーガナイザー



ベース部はメディカルグレードの高耐久シリコン、カバー部は耐熱性、
耐薬品性の高いポリスホン樹脂、非常に耐久性に優れたオーガナイザーです。

シリコン歯式オーガナイザー

Autoclavable Silicone Organizer with Dental Arch Notation

商品コード	サイズ	入数	価格
FC-0497	W123×D130×H28mm	1セット	10,000円



Premium Plus Japan Co.,Ltd. (プレミアムプラスジャパン株式会社)

〒563-0025 大阪府池田市城南1-4-2 2F
〈お問合せ窓口〉072-735-7101 9:00～17:00(土・日・祝祭日を除く)

商品センター：〒561-0805 大阪府豊中市原田南1-13-5
(製造販売業)


※商品は税別価格となります。

担当販売店

F0752008-01

ゼタラボ ユーザーズガイド

ゼタラボの使用方法を写真付きでご紹介。

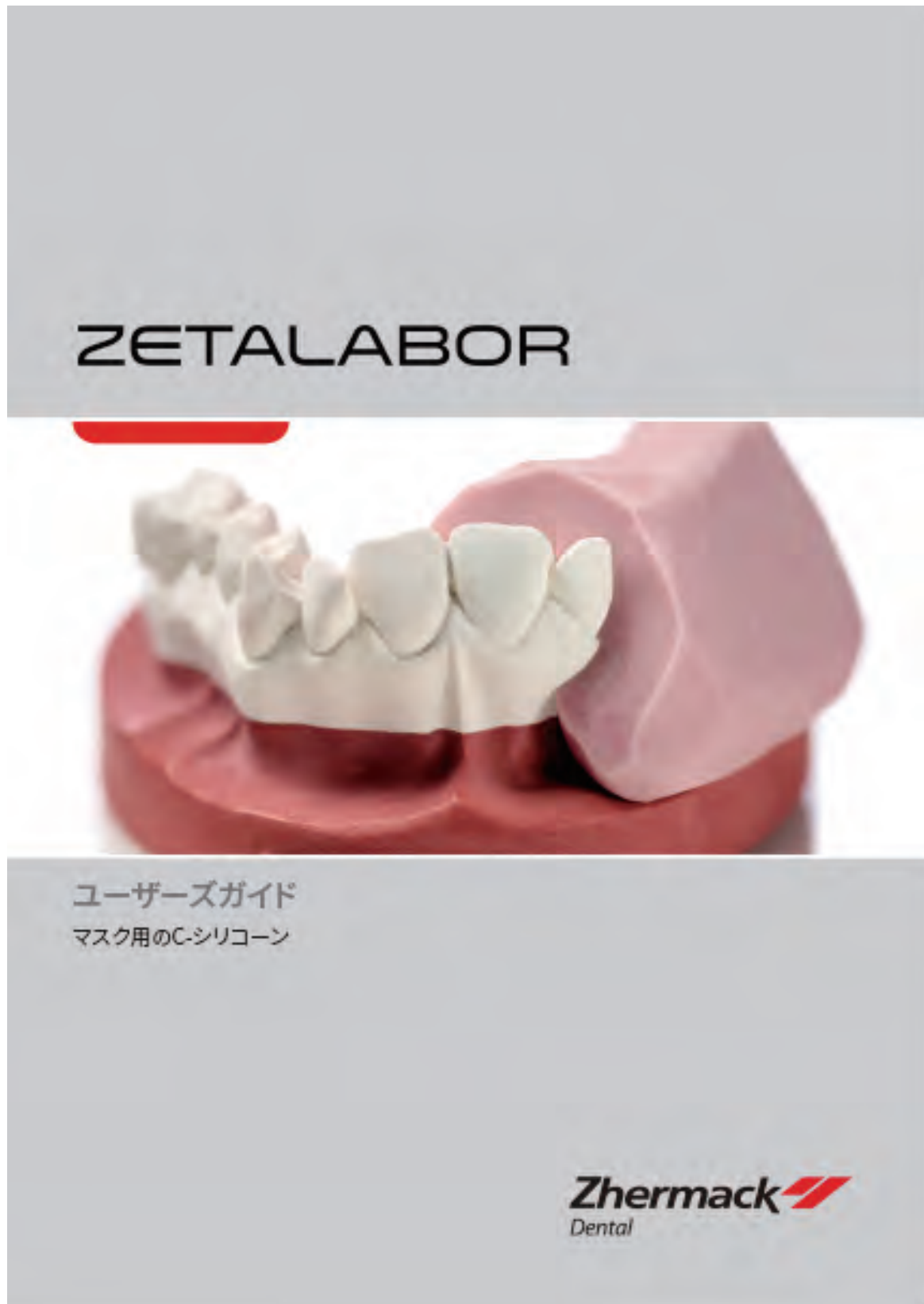

ディスポーザブル フェイスシールド単体チラシ

すぐにご利用いただける 20 枚入りのフェイスシールド。



premiumTM
plus JAPAN

ディスポーザブル
フェイスシールド
FACE SHIELD -Disposable-

- **しっかりガード!**
シールドが頭に沿ってしなるため、全体をしっかり覆います。
- **軽くて、優しくフィット!**
軽量タイプ! 頭部に優しく合わせやすい仕様を実現しています。
- **クリアな視界!**
高い透明度のシールドで、しっかり視界を確保します。



側面までしっかり覆いかぶせることができます。



ゴムは固定されているため、すぐにご利用いただけます。



使用時は保護フィルムをはがしてご利用ください。



ヘッドバンドとシールドはすべてセットとなっております。

ディスポーザブル フェイスシールド

Face Shield disposable

ディスポーザブル

商品コード	サイズ	入数	価格
1148	横33cm 縦22cm	20枚	6,000円

Premium Plus Japan Co.,Ltd. (プレミアムプラス ジャパン株式会社)

〒563-0025 大阪府池田市城南1-4-2 2F
(お問合せ窓口) 072-735-7101 9:00 ~ 17:00(土・日・祝祭日を除く)

商品センター (製造販売) : 〒561-0805 大阪府豊中市原田南1-13-5

※商品は税別価格となります。

担当販売店

F0692004-01

iBrite 単体カタログ

LED ホワイトニングライト。スタンドタイプとテーブルトップタイプの2種類をご用意。



iBRITE

毎日の彩りをサポートする。白い歯のために。

エレファントダストコレクター 単体チラシ

重量 860g の超軽量ダストコレクター。小さいですが切削粉塵をよく吸い込みます。



チェアサイドの簡単な義歯調整などに。重量860gの超軽量ダストコレクター。往診時にも軽く場所をとらないサイズです。低騒音タイプ。

**ラボでの使用も
おすすめです**

**貸出品
あります**

小さいですが切削粉塵をよく吸い込みます。
(大きい切削片の吸引は困難です)

貸出品をご用意していますので、お問い合わせください。

1年保証



「当センターではジルコニアを扱っています。ちょっとした作業時に出る切削粉を手軽によく吸い取ってくれます。粉塵の吸引力は十分ですね。」
片岡繁夫先生より



LED

先端には3灯のLEDライト付き。作業時の手元を明るく照らします。(※LED寿命時間30,000時間)



ヘッド部分

蛇腹式の吸入口は、象の長い鼻をイメージしています。360°好きな方向に曲げて使用できます。



フィルター

多層構造フィルターは本体を開けて簡単に取り外すことができます。6か月ごとに交換をお勧めします。



エレファントダストコレクター(ライト付)

Elephant Dust Collector

商品コード	サイズ	重量	入数	価格
FC-0334	205×225×140mm	860g	1台	46,000円

※AC/DCアダプター付

エレファントダストコレクター 替フィルター

Elephant Dust Collector Filter

商品コード	サイズ	入数	価格
FC-0335	175×180mm	1枚	5,000円



YouTube

エレファントダストコレクター

チェックを視聴している動画をご覧ください。
検索からご覧いただけます。

Premium Plus Japan Co.,Ltd. (プレミアムプラスジャパン株式会社)

〒563-0025 大阪府池田市城南1-4-2 2F
(お問合せ窓口) 072-735-7101 9:00~17:00(土・日・祝祭日を除く)

商品センター (製造販売) : 〒561-0805 大阪府豊中市原田南1-13-5

※商品は税別価格となります。

担当販売店

F0541901-02

インタープロキシマルダイヤモンドバー チラシ

歯間削合時の細かいコントロールが可能。切削したい幅によってそれぞれのヘッドサイズからお選びください。

premiumTM
plus JAPAN

インタープロキシマルダイヤモンドバー ディスクングの手間と時間を大幅に減らします。



この部分を当てることで
エッジを立てずに削れます。



IPR使用イメージ



施術後イメージ

動画でご覧いただくと速さがわかります。



安定かつ素早いIPR
検索からもご覧いただけます
YouTube
IPRダイヤモンドバー

インタープロキシマルダイヤモンドバーキット

歯間削合時の細かいコントロールを可能にしました。

商品コード	セット内容	入数	価格
IPRKIT1	J316SF・J316PF Z12S/SF・Z12S/PF J10F・E11S/SF E11S/PF・パースタンド	×各1	1セット 15,000円

※パースタンド：オートクレーブ滅菌可能(135℃まで)
販売名：インタープロキシマルキット 一般医療機器 届出番号：27B2X00268X00017



インタープロキシマルダイヤモンドバー

切削したい幅によって、それぞれのヘッドサイズからお選びいただけます。



これまでになかったほどです。
デリケートな作業を助けます。

	J316SF	J316PF	Z12S/SF	Z12S/PF	J10F	E11S/SF	E11S/PF
ISO No.	833-031		165-005		465-016	164-005	
種類	インタープロキシマルダイヤモンドバー						
ヘッドサイズ	0.3	0.4	0.2-0.45	0.3-0.5	0.4-1.6	0.2-0.55	0.3-0.65
ヘッド長	5		3.4		5	7	
全長	20		22		19	23.5	
タイプ	FG						
最大回転数	120,000※		450,000		300,000	450,000	
入数	2				6	2	
価格	3,000円				2,000円	3,000円	

※5倍速コントラで回転数を落としてご使用ください。

販売名：インタープロキシマルキット 一般医療機器 届出番号：27B2X00268X00017



オーソドンティックバー・ポリッシャー チラシ

強制終了時のボンド撤去用カーバイドバー・ポリッシャー。



オーソドンティックバー・ポリッシャー

IPRからボンド撤去まで全てバーで行えます。

インタープロキシマルダイヤモンドバーキットにオーソドンティックバー等を加えたキットです。

オーソドンティックキット

商品コード	セット内容	入数	価格
ORTHOKIT1	J316SF・J316PF・Z12S/SF	×各1	1セット 20,000円
	Z12S/PF・J10F・E11S/SF		
	E11S/PF・FGEF6・FG7902		
	FG-M31SF・RA7006・RA-K2RSF		
	RORTHORA17・RORTHORA16		
	バースタンド		

※バースタンド：オートクレープ滅菌可能(135℃まで)
 販売名：カーバイドバー 一般医療機器 届出番号 27B2X00268X00031
 販売名：インタープロキシマルキット 一般医療機器 届出番号 27B2X00268X00017



STRAUSS & CO.
INDUSTRIAL DIAMONDS LTD.

オーソドンティックバー・ポリッシャー

コンポジットレジンでのトリミング・フィニッシングにも使用できるEF6.FG7902に加え、矯正のボンド撤去専用カーバイドバー・ポリッシャーです。



実寸大



FG-EF6



FG7902



FG-M31SF



RA7006



RA-K2RSF



RORTHRA17



RORTHRA16

トリミングフィニッシングバー
アタッチメント・ボンド撤去

オーソドンティックバー
ボンド撤去

オーソドンティックポリッシャー
ボンド撤去・研磨

	FG-EF6	FG7902	FG-M31SF	RA7006	RA-K2RSF	RORTHRA17	RORTHRA16
種類	トリミングフィニッシングバー		オーソドンティックバー			オーソドンティックポリッシャー	
ヘッドサイズ	014	010	016	018	023	6	5
ヘッド長	6	4.5	8	1.9	4.4	7.5	10
全長	21	19	22	22	22	25	25
タイプ	FG			CA用			
最大回転数	450,000		300,000	120,000		20,000	
入数	3			5		12	
価格	4,000円		6,000円	10,000円		5,000円	

販売名：カーバイドバー 一般医療機器 届出番号 27B2X00268X00031
 販売名：インタープロキシマルキット 一般医療機器 届出番号 27B2X00268X00017



Premium Plus Japan Co.,Ltd. (プレミアムプラスジャパン株式会社)

〒563-0025 大阪府池田市城南1-4-2 2F
 〈お問合せ窓口〉072-735-7101 9:00～17:00(土・日・祝祭日を除く)

商品センター：〒561-0805 大阪府豊中市原田南1-13-5
 (製造販売業)

※商品は税別価格となります。

担当販売店

F0261710-01

バウシュ咬合紙取扱商品 希望小売価格表

Bausch
バウシュ咬合紙ジャパン株式会社
取扱商品 希望小売価格表

BAUSCH
PROGRESS
100
100 microns
Articulating Paper
Paper à articuler - Papel de articulación
Kukka artikuloiva paperi - Artikuloiva paperi
Articulaciones papeles - Papeles de articulación
REF BK 57 • 50 strips
MADE IN GERMANY
CE
LOF
20082

Bausch
Articulating Paper
with progressive color transfer
REF BK 01
300 strips • 200 µ
BAUSCH ARTICULATING PAPERS, INC.
NASHUA, NH 03063
U.S.A.

Order No.
BK 21
Arti-Fol
Articulating Paper
200 strips

Articulating Paper
blau/blue
REF BK 09

Articulating Paper
red/red
REF BK 10

Bausch Articulating Papers Japan K. K.
バウシュ咬合紙ジャパン株式会社

Bausch
...we make Occlusion visible®

MADE
IN
GERMANY

バイオインクフロー 単体チラシ

咬合紙トップブランド「バウシュ」が提案する床過圧部診査ペースト。



premiumTM plus JAPAN

バイオインクフロー

咬合紙トップブランド「バウシュ」が提案する床過圧部診査ペースト。
 義歯による発赤部位をマーキングできる、チキソトロピーに優れたカラーペースト(食用色素を用いています)。

CHECK

おすすめポイント

- ① 口腔内で識別しやすい緑色のペースト。
- ② 粘膜への付着性が高いペースト。
- ③ アーラインのマーキングにも。
- ④ 極細(先端径0.3mm)付属チップ使用で、こまかなコントロールが可能。
- ⑤ ディスポーザブル ニードルチップで衛生的に使用可能。

少量で細かく
コントロール



粘性のあるペーストです。



義歯による
発赤部分です。



ニードルチップ
又はマイクロ
ブリケーター
(器具)で発赤部
分にバイオイン
クを塗布します。



色が移った部分
を切削します。

商品コード	カラー	入数	価格
BK206	グリーン	1セット シリンジ1本(1ml) ニードルチップ5本	3,000円

●重度の炎症部位や化膿した部位には使用しないでください。
 販売名: バイオインクフロー 一般医療機器 届出番号: 27B3X00271000005

衛生面で安心。作業内容に合わせて選べる
ディスポーザブルのニードルチップ。
バイオインクフローにおすすめのチップです。






デリバリーチップ

商品コード	種類	入数	価格
A FC-0245	スタンダード	100本	5,000円

販売名: デリバリーチップ 一般医療機器 届出番号: 27B2X00268X00045

ニードルチップ

商品コード	種類	入数	価格
B 081	23G 先端径0.6mm	100本	3,000円
C 080	20G 先端径0.9mm		
D 082	18G 先端径1.2mm		

販売名: ニードルチップ 一般医療機器 届出番号: 27B2X00268000053

※商品は税別価格となります。

製造販売業者 バウシュ咬合紙ジャパン株式会社
 販売業者 Premium Plus Japan Co.,Ltd. (プレミアムプラスジャパン株式会社)
 〒563-0025 大阪府池田市城南1-4-2 2F
 (お問合せ窓口) 072-735-7101 9:00 ~ 17:00(土・日・祝祭日を除く)

担当販売店

F0461810-01

LUNOS プロフィーペースト 単体チラシ

ドイツの歯科メーカー「デュールデンタル」が立ち上げた予防歯科材ブランド商品。

premiumTM
plus JAPAN

ルノス
LUNOS®プロフィーペースト

DÜRR DENTAL
THE BEST, BY DESIGN

LUNOS®は極力研磨力を抑えて長期的に歯を守ることをコンセプトに
ドイツの歯科メーカー「デュールデンタル」が立ち上げた予防歯科材ブランドです。

2 in 1 1本でクリーニングから研磨まで可能です。



「2 in 1」ペーストは使用中に粒子が細くなり、1本で粗研磨から仕上げ研磨まで可能です。1歯10秒で仕上げ研磨まで行えます。RDA28、ケイ酸カルシウムがステインを吸着し包み込んで落とします。飛び散りにくく、操作性が良いペーストです。
ミントにはフッ素1500ppm配合。

粗研磨 0秒 → 仕上げ研磨 10秒

Super Soft 市場で初めてRDA5を実現しました。



「スーパーソフト」ペーストは市場で初めてRDA5を実現しました。研磨成分にはハイドロキシアパタイトを使用。歯面を滑沢に艶のある表面にすることでプラークの再付着を予防。美しい歯を保ちます。
インプラントや知覚過敏の患者様への使用も可能です。

LUNOS®プロフィーペースト2 in 1
LUNOS®Prophy Paste Two in One

商品コード	種類	内容量	入数	価格
CPZ710A1901	ナチュラル(無香料)			
CPZ720A1901	オレンジ	100g	1本	4,200円
CPZ730A1901	ミント			

販売名：LUNOS プロフィーペースト 一般医療機器 届出番号：2782X00268X00064

LUNOS®プロフィーペーストスーパーソフト
LUNOS®Prophy Paste Super Soft

商品コード	種類	内容量	入数	価格
CPZ740A0901	ナチュラル(無香料)			
CPZ750A0901	オレンジ	50g	1本	2,800円

販売名：LUNOS プロフィーペースト 一般医療機器 届出番号：2782X00268X00064

Premium Plus Japan Co.,Ltd. (プレミアムプラスジャパン株式会社)
〒563-0025 大阪府池田市城南1-4-2 2F
(お問合せ窓口) 072-735-7101 9:00~17:00(土・日・祝祭日を除く)

商品センター：〒561-0805 大阪府豊中市原田南1-13-5
(製造販売業)

※商品は税別価格となります。

担当販売店

F0481810-01

デグラニュレーションキット 単体チラシ

インプラント即時埋入時の抜歯窩搔爬を王立よく確実にを行うティッシュダイヤモンドバーキット。

premiumTM plus JAPAN

デグラニュレーションキット

インプラント即時埋入時等の抜歯窩搔爬を効率よく確実にを行うティッシュダイヤモンドバー。

サージカルキュレットでは難しい不良肉芽除去も短時間かつ効果的に行うことができます。
インプラントのみならず、ペリオサージェリ、エンドサージェリ、歯根端切除などにも。

STRAUSS & CO.
INDUSTRIAL DIAMONDS LTD.

- ① 4つの径のティッシュダイヤモンドバーキットです。
- ② 耐久性が高く、100ケース以上使用可能です。
- ③ 最大回転数2,500rpm。



2分25秒あたりから
デグラニュレーション
キットを使用中の様子
がご覧いただけます。

パイルアップテクニックとデグラニュレーションキットの使用例の動画です。



先細径2.8mmの細いサクシジョンチューブは
術野を妨げません。(取付部6.5mm)
専用清掃ブラシ付

デグラニュレーションキット

商品コード	セット内容	入数	価格
GRKIT1	1mm/2.5mm/3mm/3.5mm サクシジョンチューブ 洗浄ブラシ	各1本 1セット	60,000円

販売名: デグラニュレーションキット 一般医療機器 届出番号: 27B2X00068X00054



デグラニュレーションキットと抜歯創用保護材 ---生体材料の使用を念頭に置いたソケットマネジメント--- 児玉利朗先生より

抜歯窩のスムーズな治癒を目指す時、課題になるのは適切な慢性感染性肉芽組織(以下、不良肉芽)の除去である。
慢性炎症等で不良肉芽が骨壁に滑り込んでいるような症例は、不良肉芽の確実な除去が求められる反面、手技的な難易度は高くなる。親縁などに代表される従来の手用インスツルメントは、骨壁を搔爬することにより

①肉芽組織が断裂し骨面に残存する場合がみられる、②熟練の技術を要し、術者によってチェアタイムが大きく異なる、などの状況が散見される。

デグラニュレーションキットは、回転するダイヤモンドバーの先端が、肉芽組織を「絡めとって引き抜く」ような動きになっている。手用インスツルメントを用いた抜歯窩内搔爬と比較すると、肉芽除去後の骨面は術者の技量に左右されることなく均一に良好な仕上がりで、なおかつ処置時間の短縮が期待できる。軟組織修復や歯槽骨の吸収防止、歯槽境の高さや幅の保存を目的に、テルプラグ等の抜歯創用保護材を適用する場合、抜歯窩内に感染組織が残存していると、再感染を惹起し狙った効果を得られない場合があることから、とりわけそれらを含む不良肉芽の徹底的な除去が求められる。デグラニュレーションキットを併用することで、術者に左右されず、抜歯創用保護材を適切に使用できる理想的な治療環境を創造できる。

児玉 利朗 先生 / 神奈川歯科大学附属 横浜クリニック 副院長 神奈川歯科大学大学院歯学研究所 高度先進口腔医学講座 インプラント・歯周病学分野 大学院教授

コラーゲン使用吸収性局所止血材
テルプラグ
<保険適用外>

■標準価格
SSサイズ 10個入 11,000円 203702
Sサイズ 10個入 16,000円 203700
Mサイズ 5個入 19,500円 203701

製造販売元:
オリンパステルモバイオマテリアル株式会社
東京都渋谷区善徳1-50-1

販売名: テルプラグ
医療機器の分類: クラスIV 高度管理医療機器
一般的名称: コラーゲン使用吸収性局所止血材
医療機器承認番号: 20900BZ200646000

発売元: 株式会社モリタ
大阪本社 大阪府吹田市豊水町3-33-18 Tel. 06.6380.2525
東京本社 東京都台東区上野2-11-12 Tel. 03.3834.6161
お問い合わせ: お客様相談センター Tel. 0800.222.8020

Premium Plus Japan Co.,Ltd. (プレミアムプラスジャパン株式会社)

〒563-0025 大阪府池田市城南1-4-2 F
<お問合せ窓口> 072-735-7101 9:00~17:00(土・日・祝祭日を除く)

商品センター : 〒561-0805 大阪府豊中市原田南1-13-5
(製造販売元)

※商品は税別価格となります。
※製品のデザイン、仕様、外観、パッケージ、価格は予告なく変更する場合がございます。

担当販売店

F0511812-01

アンジーお子様向けグッズ 単体チラシ

患者様向けに可愛いアンジーシリーズ商品を紹介するリーフレットです。



B4 変形サイズ 巻き三つ折り カラー

プレミアムルーペ 単体チラシ

倍率3種類に加え、インディビジュアルとセンターフィックスの2タイプをご用意。



premiumTM
plus JAPAN

PREMIUM LOUPE

プレミアムルーペ

プレミアム品質で患者の明日を覗る

倍率2.5/3.0/3.5の3種類に加え、
ルーペレンズの位置を左右個別に調整できるインディビジュアルタイプと、
効率的に中央1箇所調整するセンターフィックスタイプの2種をご用意
充実したラインアップから最も適したルーペをお選びいただけます。

PREMIUM series SELECT

ファイル・リーマー 単体チラシ

コストパフォーマンスに優れたファイル・リーマーです。



→ Piece by Piece with pleasure ←

ファイル/リーマー

**● コストパフォーマンスに優れたファイル、リーマー。
Hファイル、KファイルはNiTiもご用意。**

● 数々の欧米のブランドにOEM供給しています。

● 安定した品質とコストパフォーマンスをご提供。

落下防止
穴に糸を通して落下を防止します。

すべり止め加工
凸凹がグリップ力を高めます。

R加工
穴ゆるいRがあるため持ちやすくなっています。

正確な寸法加工
ISO規格に準じた2%のテーパー。

ラバーSTOPパー
ラバーSTOPパーは、それぞれの形状、長さのものが付属しています。長さも色によって分けられているため一目で区別できます。

刃部拡大図



Hファイル Kファイル リーマー

サイズ	リーマー	Kファイル	Hファイル
21mm			
25mm			
28mm			
31mm			

形状と番号による識別



作業部長さ

20 リーマー
20 Kファイル
20 Hファイル

NiTiもおすすめ!!
#08, #10もラインナップ

湾曲した根管には、ニッケルチタンがおすすめです。根管作業長の確認にも適しています。



Kファイル/Hファイル/リーマー

種類	サイズ	入数	価格
アソート	21mm	6本	600円
	25mm		
	28mm		
	31mm		
アソート	#15~#40 (各1本)		
アソート	#45~#80 (各1本)		

販売名: Kファイル 一般医療機器 届出番号: 27B2X00268X00036
 販売名: Hファイル 一般医療機器 届出番号: 27B2X00268X00019
 販売名: リーマー 一般医療機器 届出番号: 27B2X00268X00042
 製造販売業者: プレミアムプラスジャパン株式会社

NiTi Kファイル/NiTi Hファイル

種類	サイズ	入数	価格
アソート	21mm	6本	1,200円
	25mm		
アソート	#15~#40 (各1本)		

販売名: NiTi Kファイル 一般医療機器 届出番号: 27B2X00268X00037
 販売名: NiTi Hファイル 一般医療機器 届出番号: 27B2X00268X00035
 製造販売業者: プレミアムプラスジャパン株式会社

ガッタパーチャポイント・ペーパーポイント 単体チラシ



→ Piece by Piece with pleasure ←

ガッタパーチャポイント/ペーパーポイント



医療用素材の韓国上場企業META BIOMEDは、ガッタパーチャポイントの世界市場シェア17%を占めています。(2012年 META BIOMED調べ)

● 曲げても切れにくいしなやかさ。弾力があり、緊密な充填を実現します。



ガッタパーチャポイント メインポイント

販売名：ガッタパーチャポイント 管理医療機器 認証番号：224AGBZ00001000

サイズ	商品コード	全長	入数	価格		
15	MGP-15-CD	28.5mm	120本	900円		
20	MGP-20-CD					
25	MGP-25-CD					
30	MGP-30-CD					
35	MGP-35-CD					
40	MGP-40-CD					
15-40	MGP-CD-A1					
45	MGP-45-CD					
50	MGP-50-CD					
55	MGP-55-CD					
60	MGP-60-CD					
70	MGP-70-CD					
80	MGP-80-CD					
45-80	MGP-CD-A2					
					120本	



ガッタパーチャポイント アクセサリーポイント

販売名：ガッタパーチャポイント 管理医療機器 認証番号：224AGBZ00001000

商品コード	種類	サイズ	入数	価格
Ⓐ MGPJ-FS	FS (細小)	17mm	100本	1,000円
Ⓑ MGPJ-FM	FM (細中)	21mm		
Ⓒ MGPJ-FL	FL (細大)	25mm		
Ⓓ MGPJ-S	S (小)	15mm		
Ⓔ MGPJ-M	M (中)	21mm		
Ⓕ MGPJ-L	L (大)	26mm		
Ⓖ MGPJ-LM	LM (大中)	21mm		
Ⓗ MGPJ-XL	XL (極大)	26mm		
MGPJ-A1	アソート (FS, FM, FL, M)		100本 (各25本)	

Ⓐ FS 17mm

Ⓑ FM 21mm

Ⓒ FL 25mm

Ⓓ S 15mm

Ⓔ M 21mm

Ⓕ L 26mm

Ⓖ LM 21mm

Ⓗ XL 26mm

● 滅菌済みのペーパーポイント。根管内の乾燥、止血などにお使いいただけます。

アブソーバンドペーパーポイント

販売名：アブソーバンドペーパーポイント 一般医療機器 届出番号：40B1X10003GE0077

滅菌済



サイズ	商品コード	全長	入数	価格		
15	MPP-15-CD	28.5mm	200本	600円		
20	MPP-20-CD					
25	MPP-25-CD					
30	MPP-30-CD					
35	MPP-35-CD					
40	MPP-40-CD					
15-40	MPP-CD-A1					
45	MPP-45-CD					
50	MPP-50-CD					
55	MPP-55-CD					
60	MPP-60-CD					
70	MPP-70-CD					
80	MPP-80-CD					
45-80	MPP-CD-A2					
					200本 (#15-20) 各34本 (#25-40) 各33本	
					200本 (#45-50) 各34本 (#55-80) 各33本	

製造販売業者 株式会社ジオメディ

販売業者 Premium Plus Japan Co., Ltd. (プレミアムプラスジャパン株式会社)

〒563-0025 大阪府池田市城南1-4-2 2F
 (お問合せ窓口) 072-735-7101 9:00~17:00(土・日・祝祭日を除く)

※ 商品は税別価格となります。

担当販売店

F0331712-02

インスツルメントカタログ

機能的なラインアップで用途に合わせたツールをご紹介。32ページの見応えあるカタログです。



210×210mm 正方形サイズ 32 ページ カラー