

ソールバイト 単体チラシ

プレミアムプラスジャパンが自社研究を重ねて作り上げたハイクオリティの日本自社製品、ソールバイト。



ソールバイトスーパーファスト 単体チラシ

ソールバイトに比べ硬化が速くシャープなため、より精度の高い咬合採得が行えるスーパーファスト。



The advertisement features a dynamic background of blue and white curved lines. In the top left, the text 'SOLEBITE Superfast' is prominently displayed, followed by 'ソールバイト スーパーファスト' and 'Made in Japan'. In the bottom left, there is an image of the product packaging, including two blue tubes and a box. On the right side, a circular graphic with an upward arrow and the number '20' is labeled 'seconds'. Below this, the text '20秒で硬化' and 'スピード&精確性のシリコンバイト' is shown. At the bottom right, a paragraph states: '口腔内保持時間20秒、トータル咬合採得時間35秒。スピードのアドバンテージで患者様の苦痛を軽減、チェアタイムの短縮に。'

premiumTM
plus JAPAN

SOLEBITE
Superfast

ソールバイト スーパーファスト

● Made in Japan

20
seconds

20秒で硬化
スピード&精確性のシリコンバイト

口腔内保持時間20秒、トータル咬合採得時間35秒。
スピードのアドバンテージで患者様の苦痛を軽減、チェアタイムの短縮に。

PMTC カタログ

コストパフォーマンスに優れ種類も豊富なプロフィーカップとバリエーション豊富なプロフィーブラシのカタログ。



210×210mm 正方形サイズ 20 ページ カラー

PMTC カタログ

コストパフォーマンスに優れ種類も豊富なプロフィーカップとバリエーション豊富なプロフィーブラシのカタログ。



キャビネット・スツールカタログ

ヨーロッパ製のデザインと機能を兼ね備え、院内の空間を美しく演出するキャビネット・スツールのカタログ。



210×210mm 正方形サイズ 24 ページ カラー

バキュームミラー 単体チラシ

お使いのバキュームに接続、ミラーヘッドから吸引するバキュームミラーのご紹介チラシ。



→ Piece by Piece with pleasure ←

バキュームミラー

● お使いのバキュームに接続。
ミラーヘッドから吸引するバキュームミラー。

● 一人診療時
バキュームのアシスタントがいない場合でも一人での診療を可能にします。

● 補綴セット時
常に吸引続けるのでミラーで圧排しながら防湿も同時にできます。

● 口腔内の狭い患者様に
タービン、ミラー、バキュームを入れるスペースがない場合に。



前後左右上下にある計22のバキューム孔が、
どのような角度でも吸引強さを許さず
且つ舌や粘膜を吸引込むことがありません。

※大きな切屑片や歯石は吸引できない場合があります。

**反射率
99%**

**防曇
加工**

反射率99% 表面反射



反射率99%の表面反射ミラー。
ロジウムコーティング表面反射ミラーと比較し40%明るいミラーです。

<当社比較>

バキュームミラー ロジウムコーティング表面反射ミラー

接続方法

別売「バキュームミラー用チューブ」をユニットのバキュームに挿して使用します。付属の変換アダプターでφ16mmとφ11mmに対応。



307 別売りアダプターを使用し10mmにも取り付け可能です。

φ16mm φ11mm φ10mm

ミラーホルダー 変換アダプター ユニット

接続方法と吸引力を動画でご覧ください

バキュームミラー用チューブ(別売)



360°回転アダプター付の軽量チューブでミラー操作を妨げません。

セット内容



変換アダプター (16-11mm)
360°回転アダプター
ミラーホルダー

CM2-12 **CM24-J399**
バキュームミラー用チューブ 3本カラーアセット

バキュームミラー
Vacuum Mirror

商品コード	種類	入数	価格
CM24-J399	3本カラーアセット(No.4) (ブルー・イエロー・グリーン)	1セット	15,000円
CM2-12	バキュームミラー用チューブ		18,000円
307	アダプター-10mm	1個	900円

販売名: バキュームミラー 一般医療機器 届出番号: 2762X00268X00105
販売名: 排唾管アダプター 一般医療機器 届出番号: 2762X00268X000037

**オート
クレーフ
OK**

エンドゲージ付ミラー 単体チラシ

反射率99%、防曇加工済み。便利なエンドゲージ付きの軽量ミラー。

premiumTM
plus JAPAN

— Piece by Piece with pleasure —

エンドゲージ付ミラー






● 従来のステンレス製ミラートップ・ハンドルと比べ、
重さは約半分の13g！

反射率
99%

防曇
加工


反射率99% 表面反射

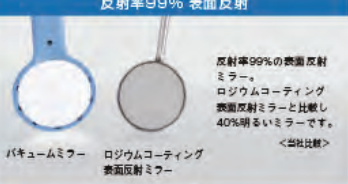

反射率99%の表面反射ミラー。
ロジウムコーティング表面反射ミラーと比較し40%明るいミラーです。
<当社比較>

バキュームミラー ロジウムコーティング表面反射ミラー

エンドゲージ

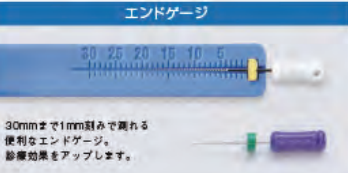

30mmまで1mm計りで測れる
便利なエンドゲージ。
診療効果をアップします。

フィンガーグリップ付きで
ホールド性抜群。

エンドゲージ付ミラー
Dental Mirror with Endo Gauge

商品コード	種 類	入 数	価 格
CM141699	エンドゲージ付ミラー No.4	6本	10,000円

販売名：エンドゲージ付ミラー 一般医療機器 届出番号：2782X00268X100106

オート
クレー
ン

Premium Plus Japan Co.,Ltd. (プレミアムプラスジャパン株式会社)
〒563-0025 大阪府池田市城南1-4-2 2F
〈お問合せ窓口〉 072-735-7101 9:00～17:00(土・日・祝祭日を除く)
商品センター：〒561-0805 大阪府豊中市原田南1-13-5
(製造販売業)

※商品は税別価格となります。

担当販売店

F0842103-01

X線防護エプロン 単体チラシ

鉛当量 0.175mmPd、重さ 1.95kg の扱いやすい防護エプロンです。

premiumTM
plus JAPAN
→ Piece by Piece with pleasure ←

X線防護エプロン

- 鉛当量0.175mmPd、重さ1.95kg。
軽いので患者様の負担が少なく、
扱いやすいX線防護エプロン。
- 背面にも鉛が入っており、
X線からしっかりガードします。

体の前後をしっかりガードします。
背面マジックテープ式で軽快に脱着できます。

全面が長過ぎず、座位での撮影でも背面が短いのもたつきません。

市地 部分拡大
バイピング部分拡大

(A) ブルー (B) レッド

X線防護エプロン
X-ray Protective Apron

商品コード	サイズ	カラー	入数	価格
(A) HB06-1B	丈700×幅500mm	ブルー	1巻	18,000円
(B) HB06-1R		レッド		

販売名：X線防護エプロン 一般医療用 品目番号：2782X00268X00100

鉛当量0.175mmPd

700mm
500mm

ディスポーザブルインスツルメント チラシ

ディスポーザブル商品3種類をご紹介します。



→ Piece by Piece with pleasure ←

ディスポーザブル インスツルメント

- 個包装滅菌済で衛生的なディスポーザブルタイプ。
- 訪問診療や往診、学校検診など幅広くご利用ください。



3in1

訪問診療にも便利で衛生的な個別包装仕様です。





ミラー
エクスプローラー
ピンセット

便利で衛生的な
個別包装仕様

滅菌済ディスポインスツルメント

Presterilized Disposable Dental Instruments

商品コード	種類	入数	価格
LK-112	ミラー		3,000円
LK-120	エクスプローラー	100本	
LK-122	ピンセット		4,000円
LK-106	3in1	20セット	2,000円

販売名：滅菌済ディスポインスツルメント 一般医療機器 届出番号：27B2X00268X00098

衛生的な使い捨ての紙トレイです。



※インスツルメントは別売です。

ペーパートレイ(コーティング付)

Paper Tray

商品コード	サイズ	入数	価格
FC-0252	W230×D135×H15mm(外寸)	100枚	1,200円

※こちらの商品は袋包装になります。

曇り止め加工されているディスポーザブルミラー。



φ22mm

ディスポーザブルミラー

Disposable Mouth Mirrors

商品コード	サイズ	入数	価格
N800	全長：163mm ミラー部分：φ22mm	10本	800円

販売名：ディスポーザブルミラー 一般医療機器 届出番号：27B2X00268X00005

Premium Plus Japan Co., Ltd. (プレミアムプラスジャパン株式会社)

〒563-0025 大阪府池田市城南1-4-2 2F
 (お問合せ窓口) 072-735-7101 9:00～17:00(土・日・祝祭日を除く)

商品センター：〒561-0805 大阪府豊中市原田南1-13-5
 (製造販売業)

※商品は税別価格となります。

担当販売店

F0862103-01

根管洗浄関連製品 チラシ

バリエーション豊富なイリゲーションニードルと合わせて使用できるルアーロックシリンジのご紹介。

premiumTM
plus JAPAN

→ Piece by Piece with pleasure ←

根管洗浄関連製品

バリエーション豊富なイリゲーションニードルと合わせて使用できるルアーロックシリンジ。

● 外筒は透明なので、薬液の混濁や異物混入を容易に発見できます。
最小目盛から最大目盛まで、安定した気密性を保持できます。

① 1.2cc (キャップ付き)

② 3cc

③ 6cc

④ 12cc

ルアーロックシリンジ

Luer-Lock Syringe

ディスポーザブル

商品コード	種類	入数	価格
① 310W	1.2cc キャップ付き	100本	4,000円
② 240	3cc	50本	3,000円
③ 241	6cc	50本	2,000円
④ 242	12cc	100本	4,200円

●未減額
販売名：ルアーロックシリンジ 一般医療機器 届出番号 2762X00268X00095

● 細い根管に適した31Gの根管洗浄用ニードル。
段差の2つの側孔から理想的に薬液を噴出します。

先端はラウンド加工。
段差の2つの側孔から
理想的に薬液を噴出します。

① 21mm

② 27mm

オプチプローブ

OptiProbe Needle Tips

ディスポーザブル

商品コード	種類	カラー	入数	価格
① 221-20	31 G 21mm	イエロー	20本	3,700円
② 222-20	31 G 27mm	グリーン	50本	9,000円
221-50	31 G 21mm	イエロー		
222-50	31 G 27mm	グリーン		

●未減額
販売名：オプチプローブイリゲーションニードル 一般医療機器 届出番号 2762X00268X00096
※ 1.2ccシリンジ専用

● 縦長のノッチで薬液ソフトに噴出します。
ニードルは自由に曲げて使用できます。

①

②

③

イリゲーションニードル

Irrigation Needle Tips

ディスポーザブル

商品コード	種類	カラー	入数	価格
① 238	23 G	ブルー	100本	2,800円
② 239	27 G	イエロー		
③ 232	30 G	ピンク		4,600円

●未減額
販売名：イリゲーションニードル 一般医療機器 届出番号 2762X00268X00090

先端φ0.7mm

先端φ0.3mm

マイクロアプリケーター
ウルトラファイン

エンドブラシアプリケーター

エンドブラシアプリケーター

Endo Brush Applicators

ディスポーザブル

商品コード	サイズ	カラー	入数	価格
3223	全長60mm	ブラック	100本	2,500円

Premium Plus Japan Co., Ltd. (プレミアムプラスジャパン株式会社)
〒563-0025 大阪府池田市城南1-4-2 2F
〈お問合せ窓口〉072-735-7101 9:00～17:00(土・日・祝祭日を除く)

商品センター：〒561-0805 大阪府豊中市原田南1-13-5
(製造販売業)

※ 商品は税別価格となります。

担当販売店

F0862103-01

フロス & 歯間ブラシ チラシ

オーラルケアの必須アイテム、豊富なラインナップをご用意しています。



フロス & 歯間ブラシ

オーラルケアの必須アイテム。豊富なラインナップをご用意しています。

● スペシフィックフロス
ブリッジ・インプラント・矯正ブラケット等広い歯間空隙の清掃に。

50
本入

患者参考価格：
1本あたり約28円
1,400円/個（税別）



箱中央部を切り取ると
ミシン目から1本ずつ
簡単に取り出すことが
出来ます。

スムーズな清掃



フィラメント部の表面は滑らかに加工。
ガシガシとした不快感はなくスムーズに清掃できます。


狙った場所に



挿入部がまっすぐ伸びており、水分も含みにくく
狙った場所に挿入しやすくなっています。



挿入部拡大

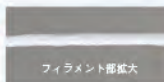

フィラメント部拡大

スレッダー 80mm フィラメント 140mm スレッダー 80mm

● ビックミラフロス
ワックス付きのため滑りが良い。ミントフレーバーとノンフレーバーの2つのフロスが取り付け可能。




ビックミラフロス
MiraFloss Big

商品コード	サイズ	カラー	入数	価格
FC-0121	W78×D43×H103mm	ホワイト	1個	6,800円

フロス付(ホワイト：ノンフレーバー/ワックス付 ブラック：ミントブラック/ワックス付)


ビックミラフロス 替えフロス
MiraFloss Big Refills

商品コード	種類	サイズ	カラー	入数	価格
(A) FC-0122	ミントブラック/ワックス付	200m	ブラック	1本	1,000円
(B) FC-0123	ノンフレーバー/ワックス付		ホワイト		

フロス & 歯間ブラシ チラシ

オーラルケアの必須アイテム、豊富なラインナップをご用意しています。

定番のJ字ストレート型。ワイヤーの根本を直角に折ることで
L字になり臼歯部へのアクセスも楽に行なえます。

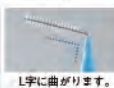


L字に曲がります。



最小通径 mm



サイズ表記は当社規格に基づくものです。

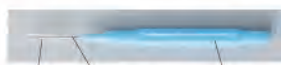

毛(ナイロン) ワイヤー(ステンレス) 柄・キャップ(PP)

あたりの柔らかい歯間ブラシです。幅広ハンドルは指先でも持ちやすい形状です。



EZ歯間ブラシ

EZ Interdental Brushes

商品コード	種類	カラー	入数	価格
(A) G800-1	SSS	ラベンダー	6本	400円
(B) G800-2	SS	ホワイト		
(C) G800-3	S	イエロー		
(D) G800-4	M	ピンク		
(E) G800-5	L	ブルー		
(F) G800-6	LL	グリーン		
G800-ASS	アソート	—	6本(各1本)	
G800-1-B	SSSカートン	ラベンダー	6本×10	3,600円
G800-2-B	SSカートン	ホワイト		
G800-3-B	Sカートン	イエロー		
G800-4-B	Mカートン	ピンク		
G800-5-B	Lカートン	ブルー		
G800-6-B	LLカートン	グリーン		
G800-ASS-B	アソートカートン	—	6本(各1本)×10	

ディスポーザブル歯間ブラシ

Disposable Interdental Brush

ディスポーザブル

商品コード	種類	サイズ	入数	価格
(A) 3222	イントロパック	全長60mm	20本入ケース×10	4,000円
(B) 3222B	100本入り	ブラシ21mm φ0.8mm	100本	2,000円

臼歯部やブラケット、インプラント等の清掃しにくい部位に最適。



ブラシが収納できます。

I-ブロックポイントブラシ(携帯用ワンタフトブラシ)

I-Prox

商品コード	カラー	入数	価格
(A) FC-0134	※	ポイントブラシ×4個 ホルダー×1本	1,000円

※[FC-0134]は2色からお選びいただけます。●ブルー ●ピンク
※ブラシの差し込み方法を変えることで60°と120°の角度で使用可能です。
ハンドルには替えブラシの収納も可能。

I-ブロックポイントブラシ替えブラシ (携帯用ワンタフトブラシ 替えブラシ)

I-Prox P Replacement Brushes

商品コード	入数	価格
(B) FC-0135	4個	500円

緩やかなカーブの先端で歯間部に挿入しやすく。
ホルダーには歯間ブラシの替えを収納出来て便利です。
替えのブラシは7サイズあり、歯間に合わせて使い分けることが可能です。



ブラシが収納できます。

ピックブラシセット(携帯用歯間ブラシセット)

Pic-Brush Set Holder with 1 Brush

商品コード	カラー	入数	価格
FC-0126	※	歯間ブラシ×1本 ホルダー×1本	500円

※[FC-0126]は2色からお選びいただけます。
●ブルー(ブラシ：ファイン付) ●ピンク(ブラシ：エクストラエクストラファイン付)

ピックブラシ替えブラシ(携帯用歯間ブラシ 替えブラシ)

Pic-Brush Replacement Brushes

商品コード	種類	サイズ	カラー	入数	価格
(A) FC-0127	エクストラエクストラファイン	φ1.5mm	ピンク	6個	900円
(B) FC-0128	エクストラファイン	φ1.8mm	イエロー		
(C) FC-0129	ファイン	φ2.0mm	ホワイト		
(D) FC-0130	ミディアム	φ2.2mm	グリーン		
(E) FC-0131	ラージ	φ3.0mm	ブルー		
(F) FC-0132	エクストララージ	φ6.5mm	エンジ		
(G) FC-0133	コニカル	φ2.5 ~ 6.0mm	オレンジ		

Premium Plus Japan Co.,Ltd. (プレミアムプラスジャパン株式会社)

〒563-0025 大阪府池田市城南1-4-2 2F

〈お問合せ窓口〉 072-735-7101 9:00 ~ 17:00(土・日・祝祭日を除く)

商品センター (製造販売) : 〒561-0805 大阪府豊中市原田南1-13-5

※商品は税別価格となります。

担当販売店

F0852103-01

マイクロモーター 単体チラシ

軽量で手軽に持ち運べる充電式マイクロモーター。裏面はフットコントロール付きマイクロモーター。



— Piece by Piece with pleasure —

マイクロモーター PRIME1210

本体1年保証
2ヶ月保証

- 軽量で手軽に持ち運べる充電式マイクロモーター。
- ブラシレスモーターで静音タイプ。
- 最高回転数30,000rpm。
3時間の充電で約25時間使用可能。
- 往診時でも場所を選びません。



HPタイプモーター



Eタイプモーター
お使いのコントラ・ストレート (ISO規格) がご利用になれます。
(フット付のハンドピースは除きます)





使用中の動画を
ご覧ください



手のひらサイズでコンパクト。



フバーパッド滑り止め付。
ベルトクリップ付。

仕様

- 本体サイズ：W65 x L129 x H27mm
- 重量：295g
- 電源：入力AC100~240V 50/60Hz
- ハンドピース：重量：64g

マイクロモーター PRIME1210 (Eタイプ)
Prime1210

商品コード	種類	カラー	入数	価格
PRIME1210B	Eタイプ	ブラック	1セット	58,000円
PRIME1210C		ホワイト		

販売名：マイクロモーター 一般医療機器 届出番号：2782X00368X00085

セット内容

- ・本体×1
- ・ハンドピース×1
- ・ACアダプター×1
- ・フバーパッド×1
- ・ベルトクリップ×1
- ・ケース×1
- ・ハンドピーススタンド×1
- ・ハンドピースホルダー×1 (Eタイプのみ)

マイクロモーター PRIME1210 (HPタイプ)
Prime1210

商品コード	種類	カラー	入数	価格
PRIME1210HPB	HPタイプ	ブラック	1セット	60,000円
PRIME1210HPW		ホワイト		

販売名：マイクロモーター 一般医療機器 届出番号：2782X00368X00085

マイクロモーター 単体チラシ

充電式軽量小型マイクロモーターフットコントロール付き。表面は充電式マイクロモーター。



— Piece by Piece with pleasure —

マイクロモーター RENHE315

6ヵ月保証



- 軽量小型マイクロモーター
フットコントロール付き。
- 最高回転数35,000rpm。

スピードコントローラーで出力0にすると
すぐに回転をストップするクイックストップ仕様。



ON/OFF
マニュアル
フット切替
スイッチ

正逆回転
切替スイッチ

ケーブル差込口

チェアサイドでの活用例



コンパクトなモデルカートに
マイクロモーターと電源線を
添わせています。
デンチャーや増設物の設置に。

下記の当社取扱い商品を
組み合わせています。

- エレファントダストコレクター
(ライト付を標準)
- マイクロモーター-RENHE315
- モデルカート3段(電源用)

使用例

仕様

- 本体サイズ: W120×D150×H80mm
- 重量: 1,110g
- 電源: 入力AC110-120V 50/60Hz
- ハンドピース重量: 220g
- 最高回転数: 35,000rpm



セット内容



- ・本体×1
- ・電源ケーブル×1
- ・ハンドピース×1
- ・フットコントロール×1
- ・ハンドピーススタンド×1
- ・カーボンブラシ×1ペア
- ・工具×1

マイクロモーター

Renhe315

商品コード	入 数	価 格
RENHE315	1台	35,000円

販売名: マイクロモーター 一般医療機器 届出番号: 2782X00268X00085

Premium Plus Japan Co.,Ltd. (プレミアムプラスジャパン株式会社)

〒563-0025 大阪府池田市城南1-4-2 2F

〈お問合せ窓口〉 072-735-7101 9:00～17:00(土・日・祝祭日を除く)

商品センター: 〒561-0805 大阪府豊中市原田南1-13-5
(製造販売業)

※ 商品は税別価格となります。

担当販売店

F0641912-01

MIRRORS カタログ

高品質な疎水性ミラー、エアフローシステムなど機能的なミラー商品を紹介したカタログ。



210×210mm 正方形サイズ 12 ページ カラー

デンタルアートカタログ

テイストの違う3名の人気有名作家が手がけるプレミアムプラスジャパンだけのオリジナル作品。



エヴァサクションミラー チラシ

お使いのパキュームにそのまま接続も可能、ミラーヘッドから吸引するサクションミラー。

premiumTM
plus JAPAN

エヴァ サクションミラー

お使いのパキュームにそのまま接続も可能
ミラーヘッドから吸引するサクションミラー

φ11mm

φ11mm

φ11mm

φ11mm

φ11mm

16mm

10mm

POINT

ミラーハンドルエンドはφ11mmなのでお使いのパキュームに直接接続可能。
径が違えば別売3Dサクションチューブや交換アダプターをご使用ください。

POINT

前後左右上下にある計21のパキューム孔が、どのような角度でも吸い残しを許さず且つ舌や粘膜を吸い込むことはありません。
※大きな切開片や歯石は吸引できない場合があります。

360°

別売の3Dサクションチューブには診療時に邪魔にならない軽量のサクションチューブに3Dアキシジョイントがプリセットされています。
人間工学に基づいて設計された3Dアキシジョイントは360°回転することで操作時のチューブのねじれを防ぎ、診療・治療時の操作性が著しく向上します。

詳細動画
ございます

超音波洗浄時のミラーへの傷を防ぐ専用ミラー保護カバーが付属しています。

反射率98%の防曇加工表面反射ミラー。傷がついてしまった場合もミラーのみを取り換えるエコフレンドリーな交換方法を採用。

セット内容

M7-3

M7-5

M7-P11

305 307

エヴァ サクションミラー

M7 Eva 3D HVE Suction Mirror

商品コード	種 類	入 数	価 格
M7-3	3本カラーアソート ミラー 3枚セット/交換用防曇ミラー 2枚/ 専用ミラー交換キー 1個/専用ミラー保護カバー 3個 (ホワイトブルー・イエロー・ライトグリーン)		42,000円
M7-5	5本カラーアソート ミラー 5本/交換用防曇ミラー 4枚/ 専用ミラー交換キー 1個/専用ミラー保護カバー 5個/ ホルダー 1個 (ライトブルー・ライトグリーン・オレンジ・イエロー・ライトグリーン)	1セット	60,000円
M7-P11	エヴァ 3Dサクションチューブ 3Dサクションチューブ1.5m1本/ホルダー 1個		20,000円
R98-10A	交換用防曇ミラー (R98%) ミラー 10枚/プラグ10個		15,000円
305	アダプター オーフルエバキューター用/16mm		
307	アダプター オーフルエバキューター用/10mm	1個	900円

販売名: M7 サクションミラー 一般医療機器 品出番号: 1263X00034000120
販売名: 防曇型アダプター 一般医療機器 品出番号: 2782X0026800037

製造販売権者 株式会社アイ・メデックス

販売権者 Premium Plus Japan Co., Ltd.
(プレミアムプラスジャパン株式会社)

〒563-0025 大阪府池田市城南1-4-2 2F
〈お問合せ窓口〉072-735-7101 9:00～17:00(土・日・祝祭日を除く)

※商品は税別価格となります。

滅菌ケース チラシ

各種インスツルメント、インプラント用ドリル、エンドファイルに適したケースをご用意。




滅菌ケース

収納したまま超音波洗浄・高圧蒸気滅菌・保管できる滅菌ケース
各種インスツルメント、インプラント用ドリル、
エンドファイルに適したケースをご用意いたしました



収納されたいインスツルメントの長さ、厚さに合わせてお選びください。
振動による傷への防ぎのため、超音波洗浄のみ
を外した状態で行ってください。

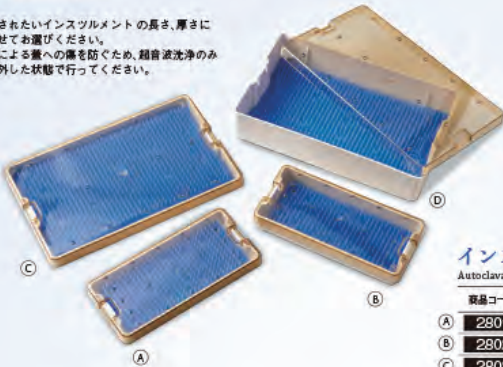


各ケースには専用のシリコンマットが1枚付属。

インスツルメント滅菌ケース

Autoclavable Instrument Case


商品コード	種 類	サイズ	入 数	価 格
A 2801	#1	L174×W79×H18mm	1セット	8,500円
B 2802	#2	L174×W79×H28mm		18,000円
C 2803	#3	L241×W149×H17mm		22,000円
D 2806	#6	L237×W145×H54mm		

※サイズは内寸です。

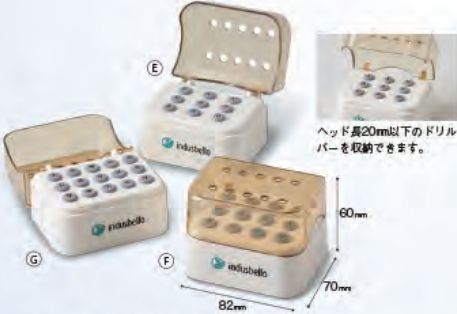

ヘッド長20mm以下のドリル・
バーを収納できます。

インプラント用ドリルやOAバーを収納管理できます。
超音波洗浄のみを付けた状態で行ってください。

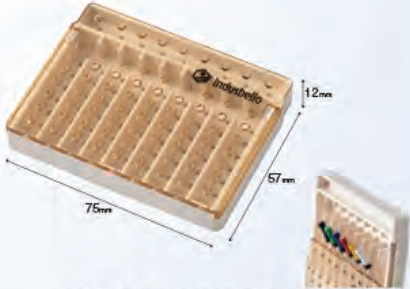

ファイルが取り出しやすい角度に飛び出る設計です。
スライド式の蓋がファイルの腐敗を防ぎます。

ドリル滅菌ケース

Autoclavable Drill Case

商品コード	種 類	入 数	価 格
E 2807S	9孔	1個	3,800円
F 2807M	12孔		4,500円
G 2807L	15孔		5,000円

エンドファイル滅菌ケース

Endo File Case

商品コード	種 類	入 数	価 格
2818	ファイル容量9本	1個	3,500円

Premium Plus Japan Co.,Ltd. (プレミアムプラスジャパン株式会社)
〒563-0025 大阪府池田市城南1-4-2 2F
〈お問合せ窓口〉072-735-7101 9:00～17:00(土・日・祝祭日を除く)
商品センター : 〒561-0805 大阪府豊中市原田南1-13-5
(製造販売業)

※商品は税別価格となります。

担当販売店

F0742008-01

マジックタッチ 単体チラシ

硬く時間のかかるジルコニアの切削を圧倒的スピードで実現したマジックタッチのご紹介。



マジックタッチ

硬く時間のかかるジルコニアの切削を圧倒的スピードで実現。

ジルコニアを撤去するケースが増えてきています。症例を前にして慌てる前に備えの1本を。
ポーセレン、ジルコニア、E-Max®に適したダイヤモンドバー。

- ① ダイヤモンド粒子のサイズ、形状が均一。すべての粒子が効果的に作用し短時間で切削が可能です。
ポーセレンは数秒で、ジルコニアコーピングも短時間でカットします。
- ② 細かいダイヤモンド粒子は切削中の微小亀裂の発生および熱の発生を抑えます。



拡大写真 (×400倍)




マジックタッチ 他社ブランド

均一なサイズの粒子全てが、効果的に切削を進めます。

ジルコニアクラウンの分割除去も短時間でできます。



咬合面やマージン調整にも。



マジックタッチ スピード



ジルコニアを短時間でカットしている動画をご覧ください

STRAUSS & CO.
INDUSTRIAL DIAMONDS LTD.

FG用										HP用							
エンドアクセス		ジルコニアクラウンリムーバー		舌・口蓋側		咬合面		マージン調整									
A3PF	A4PF	B4PF	M3PF	C31PF	T2PF	K2PF	K2RPF	PR2PF	PR15PF	E12PF	E7PF	E5PF	H19RPF	H27RPF	H37PF	H24PF	H13PF

マジックタッチ

販売名：マジックタッチ 一般医療機器 品出番号：2782X00268000030

FG用																	
商品コード	A3PF	A4PF	B4PF	M3PF	C31PF	T2PF	K2PF	K2RPF	PR2PF	PR15PF	E12PF	E7PF	E5PF				
ISO No.	001-018	001-022	225-018	198-018	197-025	298-022	257-023	277-023	254-018	170-012	172-012	130-012	249-014				
ヘッドサイズ	018	022	018	018	025	022	023	023	018	012	012	012	014				
ヘッド長	—	—	5	9	8	8	5.3	4.4	3	4	8	8	8				
全長	19	19	19	21	21.5	20.5	20	19	19	20	22	21	21				
用途	エンドアクセス		ジルコニアクラウンリムーバー				舌・口蓋側		咬合面		マージン調整						
入数	2																
価格	1,800円																
MAGIC T1	○	○					○	○		○	○		○	○			
MAGIC T2	○	○					○	○		○	○		○	○			
MAGIC T3	○	○		○			○	○		○	○		○	○			

HP用					
商品コード	H19RPF	H27RPF	H37PF	H24PF	H13PF
ヘッドサイズ	024	033	023	024	019
ヘッド長	10	9.3	8	6.9	—
全長	44.5	44.5	44.5	44.5	44.5
入数	1				
価格	2,400円				

シリコンバースタンド チラシ

FG、CA、HP あらゆるバーをホールドするシリコンバースタンド。



シリコンバースタンド

FG、CA、HP あらゆるバーをホールドするシリコンバースタンド。
患者ごとにバーをセットしてチェアサイドに。エアロゾルから保護するカバー付き。



POINT

患者ごとにバーをセットしてチェアサイドに。
治療後はバーを挿したまま滅菌工程へ。
FG、CA、HP あらゆるバーを収納。
ひっくり返してもバーが落ちないホールド性。
滅菌中やチェアサイドでバーを紛失しない。
バー間隔が広く、抜き差しが容易。
グロメットの買い替え不要。

カバーをしたままオートクレープ可



底に設けられたスリットやグロメットホールから高圧蒸気が行き渡る設計。
(クラスS以上のオートクレープ)

エアロゾル感染対策に



全体をカバーし、エアロゾルからガードします。



カバー部

耐熱性、耐薬品性の高い
ポリスルホン樹脂

ベース部

メディカルグレードの
高耐久シリコン



30mm以下のバーが収納できます

67mm以下のバーが収納できます

5孔

10孔

25孔

25孔ラージ



動画で製品特徴を
ご覧いただけます。

シリコンバースタンド

Silicone Bar Stands

商品コード	種類	サイズ	入数	価格
FC-0491	5孔	W74×D31×H35mm	1個	3,200円
FC-0492	10孔	W74×D40×H35mm		4,500円
FC-0493	25孔	W74×D80×H35mm		5,500円
FC-0494	25孔ラージカバー	W74×D80×H72mm		7,000円

※5孔はブラック以外の5色からお選びいただけます。

※10孔、25孔、25孔ラージカバーは6色からお選びいただけます。

○ホワイト ●ピンク ●パープル ●ブルー ●オレンジ ●ブラック

オート
クレープ
Q3

シリコンエンドスタンド、オーガナイザー チラシ

カバー付きのエンドスタンド、オーガナイザー商品のご紹介。



事前に使用するファイルをセット。
治療中に必要なファイルを探す時間と手間を省きます。

シリコンエンドスタンド

ファイルを覆うカバー付き。



中央のエンドゲージでエンド
ストップからの長さを計測。

1mm毎に深さの異なるゲージで簡単に
エンドストップの位置を決定。



患者ごとにファイルをセットしてチェアサイドに。
使用前のオートクレープもカバーをしたまま可能です。
(Sクラス以上のオートクレープ)
※スポンジは含まれません。FC-0496S ガンジをお求めください。



スポンジはディスポですが、
使用前のオートクレープが可能です。



ホワイト

ピンク

パープル

ブルー

オレンジ

シリコンエンドスタンド

Silicone End Stands

商品コード	サイズ	入 数	価 格
FC-0495	W97×D67×H77mm	1セット	14,000円
FC-0496	スポンジ	25個	3,800円

※(FC-0495)は5色からお選びいただけます。○ホワイト ●ピンク ●パープル ●ブルー ●オレンジ



インプラント、ペニア、クラウン等補綴物を歯式に合わせてスマートに整理。
そのままオートクレープも可能です。ステンやグレーズのパレットとしても。
エアロゾルから保護するカバー付き。

シリコン歯式オーガナイザー



ベース部はメディカルグレードの高耐久シリコン、カバー部は耐熱性、
耐薬品性の高いポリスルホン樹脂、非常に耐久性に優れたオーガナイザーです。

シリコン歯式オーガナイザー

Autoclavable Silicone Organizer with Dental Arch Notation

商品コード	サイズ	入 数	価 格
FC-0497	W123×D130×H28mm	1セット	10,000円



Premium Plus Japan Co.,Ltd. (プレミアムプラスジャパン株式会社)

〒563-0025 大阪府池田市城南1-4-2 2F

〈お問合せ窓口〉072-735-7101 9:00～17:00(土・日・祝祭日を除く)

商品センター : 〒561-0805 大阪府豊中市原田南1-13-5
(製造販売業)

※商品は税別価格となります。

担当販売店

F0752008-01

ゼタラボ ユーザーズガイド

ゼタラボの使用方法を写真付きでご紹介。



ディスポーザブル フェイスシールド単体チラシ

すぐにご利用いただける 20 枚入りのフェイスシールド。



premiumTM
plus JAPAN

ディスポーザブル
フェイスシールド
FACE SHIELD -Disposable-

- **しっかりガード!**
シールドが頭に沿ってしなるため、全体をしっかり覆います。
- **軽くて、優しくフィット!**
軽量タイプ! 頭部に優しく合わせやすい仕様を実現しています。
- **クリアな視界!**
高い透明度のシールドで、しっかり視界を確保します。



側面までしっかり覆いかぶせることができます。

ゴムは固定されているため、すぐにご利用いただけます。

使用時は保護フィルムをはがしてご利用ください。

ヘッドバンドとシールドはすべてセットとなっております。

ディスポーザブル フェイスシールド

Face Shield disposable

商品コード	サイズ	入 数	価 格
1148	横33cm 縦22cm	20枚	6,000円

ディスポーザブル

Premium Plus Japan Co.,Ltd. (プレミアムプラス ジャパン株式会社)

〒563-0025 大阪府池田市城南1-4-2 2F

〈お問合せ窓口〉 072-735-7101 9:00 ~ 17:00 (土・日・祝祭日を除く)

商品センター : 〒561-0805 大阪府豊中市原田南1-13-5
(製造販売)

※ 商品は税別価格となります。

担当販売店

F0692004-01

iBrite 単体カタログ

LED ホワイトニングライト。スタンドタイプとテーブルトップタイプの2種類をご用意。



エレファントダストコレクター 単体チラシ

重量 860g の超軽量ダストコレクター。小さいですが切削粉塵をよく吸い込みます。



チェアサイドの簡単な義歯調整などに。重量860gの超軽量ダストコレクター。
往診時にも軽く場所をとらないサイズです。低騒音タイプ。

 **ラボでの使用も
おすすめです**

**貸出品
あります**

小さいですが切削粉塵をよく吸い込みます。
(大きい切削片の吸引は困難です)

貸出品をご用意していますので、お問い合わせください。

1年保証



「当センターではジルコニアを扱っています。
ちょっとした作業時に出る切削粉を
手軽によく吸い取ってくれます。
粉塵の吸引力は十分ですね。」
片岡繁夫先生より



LED

先端には3灯のLEDライト付き。
作業時の手元を明るく照らします。
(※LED寿命時間30,000時間)



ヘッド部分

蛇腹式の吸入口は、象の長い鼻を
イメージしています。360°好き
な方向に曲げて使用できます。



フィルター

多層構造フィルターは本体を開
けて簡単に取り外すことができ
ます。6か月ごとに交換をお勧め
します。



タッチボタンで簡単操作

ファン

LED

エレファントダストコレクター(ライト付)

Elephant Dust Collector

商品コード	サイズ	重さ	入数	価格
FC-0334	205×225×140mm	860g	1台	46,000円

※AC/DCアダプター付

エレファントダストコレクター 替フィルター

Elephant Dust Collector Filter

商品コード	サイズ	入数	価格
FC-0335	175×180mm	1枚	5,000円



YouTube

エレファントダストコレクター

デックを視聴している動画をご覧ください
検索からご覧いただけます

Premium Plus Japan Co.,Ltd. (プレミアムプラスジャパン株式会社)

〒563-0025 大阪府池田市城南1-4-2 2F

〈お問合せ窓口〉072-735-7101 9:00～17:00(土・日・祝祭日を除く)

商品センター (製造販売) : 〒561-0805 大阪府豊中市原田南1-13-5

※商品は税別価格となります。

担当販売店

F0541901-02

インタープロキシマルダイヤモンドバー チラシ

歯間削合時の細かいコントロールが可能。切削したい幅によってそれぞれのヘッドサイズからお選びください。



インタープロキシマルダイヤモンドバー

ディスクングの手間と時間を大幅に減らします。



この部分を当てることで
エッジを立てずに削れます。



IPR使用イメージ



術後イメージ

動画でご覧いただくと速さがわかります。



安定かつ素早いIPR
検索からご覧いただけます
YouTube
IPRダイヤモンドバー

インタープロキシマルダイヤモンドバーキット

歯間削合時の細かいコントロールを可能にしました。

商品コード	セット内容	入数	価格
IPRKIT1	J316SF・J316PF Z12S/SF・Z12S/PF J10F・E11S/SF E11S/PF・バースタンド	×各1 1セット	15,000円

※バースタンド：オートクレーブ滅菌可能(135℃まで)
販売名：インタープロキシマルキット 一般医療機器 届出番号：27B2X00268X00017



STRAUSS & CO.
INDUSTRIAL DIAMONDS LTD.

インタープロキシマルダイヤモンドバー

切削したい幅によって、それぞれのヘッドサイズからお選びいただけます。









実寸大

これまでになかった幅です。
デリケートな作業を助けます。

	J316SF	J316PF	Z12S/SF	Z12S/PF	J10F	E11S/SF	E11S/PF
ISO No.	833-031		165-005		465-016	164-005	
種類	インタープロキシマルダイヤモンドバー						
ヘッドサイズ	0.3	0.4	0.2-0.45	0.3-0.5	0.4-1.6	0.2-0.55	0.3-0.65
ヘッド長	5		3.4		5	7	
全長	20		22		19	23.5	
タイプ	FG						
最大回転数	120,000※		450,000		300,000	450,000	
入数	2				6	2	
価格	3,000円				2,000円	3,000円	

※5値速コントラで回転数を落としてご使用ください。

販売名：インタープロキシマルキット 一般医療機器 届出番号：27B2X00268X00017



オーソドンティックバー・ポリッシャー チラシ

強制終了時のボンド撤去用カーバイドバー・ポリッシャー。



オーソドンティックバー・ポリッシャー

IPRからボンド撤去まで全てバーで行えます。

インタープロキシマルダイヤモンドバーキットにオーソドンティックバー等を加えたキットです。

オーソドンティックキット

商品コード	セット内容	入 数	価 格
ORTHOKIT1	J316SF・J316PF・Z12S/SF	×各1 1セット	20,000円
	Z12S/PF・J10F・E11S/SF		
	E11S/PF・FGEF6・FG7902		
	FG-M31SF・RA7006・RA-K2RSF		
	RORTHORA17・RORTHORA16		
パースタンド			

※パースタンド：オートクレープ減速可能(135℃まで)
販売名：カーバイドバー 一般医療機器 届出番号 27B2X00268X00031
販売名：インタープロキシマルキット 一般医療機器 届出番号 27B2X00268X00017



STRAUSS & CO.
INDUSTRIAL DIAMONDS LTD.

オーソドンティックバー・ポリッシャー

コンポジットレジン、トリミング・フィニッシングにも使用できるEF6,FG7902に加え、矯正のボンド撤去専用カーバイドバー・ポリッシャーです。



実寸大
FG-EF6



FG7902



FG-M31SF



RA7006



RA-K2RSF



RORTHORA17



RORTHORA16

トリミングフィニッシングバー
アタッチメント・ボンド撤去

オーソドンティックバー
ボンド撤去

オーソドンティックポリッシャー
ボンド撤去・研磨

	FG-EF6	FG7902	FG-M31SF	RA7006	RA-K2RSF	RORTHORA17	RORTHORA16
種類	トリミングフィニッシングバー		オーソドンティックバー		オーソドンティックポリッシャー		
ヘッドサイズ	014	010	016	018	023	6	5
ヘッド長	6	4.5	8	1.9	4.4	7.5	10
全 長	21	19	22	22	22	25	25
タイプ	FG			CA用			
最大回転数	450,000		300,000	120,000		20,000	
入 数	3			5		12	
価 格	4,000円		6,000円	10,000円		5,000円	

販売名：カーバイドバー 一般医療機器 届出番号 27B2X00268X00031
販売名：インタープロキシマルキット 一般医療機器 届出番号 27B2X00268X00017

オート
クレープ
OK135℃

Premium Plus Japan Co.,Ltd. (プレミアムプラスジャパン株式会社)

〒563-0025 大阪府池田市城南1-4-2 2F

〈お問合せ窓口〉 072-735-7101 9:00～17:00(土・日・祝祭日を除く)

商品センター：〒561-0805 大阪府豊中市原田南1-13-5
(製造販売)

※商品は税別価格となります。

担当販売店

F0261710-01

バウシュ咬合紙取扱商品 希望小売価格表

Bausch

バウシュ咬合紙ジャパン株式会社
取扱商品 希望小売価格表

Bausch Articulating Papers Japan K. K.
バウシュ咬合紙ジャパン株式会社

Bausch

...we make Occlusion visible®

**MADE
IN
GERMANY**

バイオインクフロー 単体チラシ

咬合紙トップブランド「バウシュ」が提案する床過圧部診査ペースト。

premiumTM
plus JAPAN

バイオインクフロー

咬合紙トップブランド「バウシュ」が提案する床過圧部診査ペースト。
義歯による発赤部位をマーキングできる、チキソトロピーに優れたカラーペースト（食用色素を用いています）。

CHECK

- ① 口腔内で識別しやすい緑色のペースト。
- ② 粘膜への付着性が高いペースト。
- ③ アーラインのマーキングにも。
- ④ 極細（先端径0.3mm）付属チップ使用で、こまかなコントロールが可能。
- ⑤ ディスポーザブル ニードルチップで衛生的に使用可能。

少量で細かく
コントロール

粘性のあるペーストです。

義歯による
発赤部分です。

ニードルチップ
又はマイクロア
プリケーター
（図例）で発赤部
分にバイオイン
クを塗布します。

色が移った部分
を切削します。

商品コード	カラー	入 数	価 格
BK206	グリーン	1セット シリッジ1本(1ml) ニードルチップ5本	3,000円

●重度の炎症部位や化膿した部位には使用しないでください。
販売名：バイオインクフロー 一般医療機器 届出番号：2783X00271000005

衛生面で安心。作業内容に合わせて選べる
ディスポーザブルのニードルチップ。
バイオインクフローにおすすめのチップです。

A

B

C

D

デリバリーチップ

商品コード	種 類	入 数	価 格
A FC-0245	スタンダード	100本	5,000円

販売名：デリバリーチップ 一般医療機器 届出番号：2782X00268X00045

ニードルチップ

商品コード	種 類	入 数	価 格
B 081	23G 先端径0.6mm	100本	3,000円
C 080	20G 先端径0.9mm		
D 082	18G 先端径1.2mm		

販売名：ニードルチップ 一般医療機器 届出番号：2782X00268000053

※商品は税別価格となります。

製造販売業者 バウシュ咬合紙ジャパン株式会社

販売業者 Premium Plus Japan Co.,Ltd. (プレミアムプラスジャパン株式会社)

〒563-0025 大阪府池田市城南1-4-2 2F
（お問合せ窓口）072-735-7101 9:00～17:00（土・日・祝祭日を除く）

担当販売店

F0461810-01

LUNOS プロフィーペースト 単体チラシ

ドイツの歯科メーカー「デュールデンタル」が立ち上げた予防歯科材ブランド商品。

premiumTM
plus JAPAN

ルノス

LUNOS®プロフィーペースト

DÜRR DENTAL
THE BEST, BY DESIGN

LUNOS®は極力研磨力を抑えて長期的に歯を守ることをコンセプトに
ドイツの歯科メーカー「デュールデンタル」が立ち上げた予防歯科材ブランドです。

2 in 1 1本でクリーニングから研磨まで可能です。

Super Soft 市場で初めてRDA5を実現しました。

「2 in 1」ペーストは使用中に粒子が細くなり、1本で粗研磨から仕上げ研磨まで可能です。1歯10秒で仕上げ研磨まで行えます。RDA28、ケイ酸カルシウムがステインを吸着し包み込んで落とします。飛び散りにくく、操作性が良いペーストです。ミントにはフッ素1500ppm配合。

粗研磨 0秒 仕上げ研磨 10秒

「スーパースoft」ペーストは市場で初めてRDA5を実現しました。研磨成分にはハイドロキシアパタイトを使用。歯面を滑沢に艶のある表面にすることでプラークの再付着を予防。美しい歯を保ちます。インプラントや知覚過敏の患者様への使用も可能です。

LUNOS®プロフィーペースト 2 in 1
LUNOS®Prophy Paste Two in One

商品コード	種類	内容量	入数	価格
CPZ710A1901	ナチュラル(無香料)	100g	1本	4,200円
CPZ720A1901	オレンジ			
CPZ730A1901	ミント			

販売名: LUNOS プロフィーペースト 一般医療機器 届出番号: 27B2X00268X00064

LUNOS®プロフィーペースト スーパースoft
LUNOS®Prophy Paste Super Soft

商品コード	種類	内容量	入数	価格
CPZ740A0901	ナチュラル(無香料)	50g	1本	2,800円
CPZ750A0901	オレンジ			

販売名: LUNOS プロフィーペースト 一般医療機器 届出番号: 27B2X00268X00064

Premium Plus Japan Co.,Ltd. (プレミアムプラスジャパン株式会社)

〒563-0025 大阪府池田市城南1-4-2 2F

〈お問合せ窓口〉072-735-7101 9:00～17:00(土・日・祝祭日を除く)

商品センター: 〒561-0805 大阪府豊中市原田南1-13-5
(製造販売業)

※ 商品は税別価格となります。

担当販売店

F0481810-01

デグラニュレーションキット 単体チラシ

インプラント即時埋入時の抜歯窩搔爬を王立よく確実に行うティッシュダイヤモンドバーキット。

premiumTM
plus JAPAN

デグラニュレーションキット

インプラント即時埋入時等の抜歯窩搔爬を効率よく確実に行うティッシュダイヤモンドバー。

サージカルキュレットでは難しい不良肉芽除去も短時間かつ効果的に行うことができます。
インプラントのみならず、ペリオサージェリ、エンドサージェリ、歯根端切除などにも。

STRAUSS & CO.
INDUSTRIAL DIAMONDS LTD.

- ④ 4つの径のティッシュダイヤモンドバーキットです。
- ④ 耐久性が高く、100ケース以上使用可能です。
- ④ 最大回転数2,500rpm。



2分25秒あたりから
デグラニュレーション
キットを使用する様子
がご覧いただけます。

パイルアップテクニックとデグラニュレーションキットの使用例の動画です。



先端径2.8mmの細いサクションチューブは
術野を妨げません。(取付部6.5mm)
専用清掃ブラシ付

デグラニュレーションキット

商品コード	セット内容	入数	価格
GRKIT1	1mm/2.5mm/3mm/3.5mm サクションチューブ 洗浄ブラシ	各1本 1セット	60,000 円

販売名: デグラニュレーションキット 一般医療機器 届出番号: 27B2X00268X0054



デグラニュレーションキットと抜歯創用保護材

---生体材料の使用を念頭に置いたソケットマネジメント--- 児玉利朗先生より

抜歯窩のスムーズな治癒を目指す時、課題になるのは適切な慢性感染性肉芽組織(以下、不良肉芽)の除去である。

慢性炎症等で不良肉芽が骨壁に潜り込んでいるような症例は、不良肉芽の確実な除去が求められる反面、手技的な難易度は高くなる。視認などに代表される従来の手用インスツルメントは、骨壁を搔爬することにより

①肉芽組織が断裂し骨壁に残存する場合がみられる、②熟練の技術を要し、術者によってチェックタイムが大きく異なる、などの状況が散見される。

デグラニュレーションキットは、回転するダイヤモンドバーの先端が、肉芽組織を「絡めとって引き抜く」ような動きになっている。手用インスツルメントを用いた抜歯窩内搔爬と比較すると、肉芽除去後の骨壁は術者の技量に左右されることがなく均一に良好な仕上がりで、なおかつ処置時間の短縮が期待できる。軟組織修復や歯槽骨の吸収防止、歯槽境の高さや幅の保存を目的に、テルプラグ等の抜歯創用保護材を適用する場合、抜歯窩内に感染組織が残存していると、再感染を惹起し狙った効果を得られない場合があることから、とりわけそれらを含む不良肉芽の徹底的な除去が求められる。


デグラニュレーションキットを併用することで、術者に左右されず、抜歯創用保護材を適切に使用できる理想的な治癒環境を創造できる。

児玉 利朗 先生 / 神奈川歯科大学附属 横浜クリニック副院長 神奈川歯科大学大学院歯学研究科 高度先進口腔医学講座 インプラント・歯周病学分野 大学院教授

コラーゲン使用吸収性局所止血材

テルプラグ

<保険適用外>

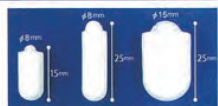

■標準価格			
SSサイズ	10個入	11,000円	203702
Sサイズ	10個入	16,000円	203700
Mサイズ	5個入	19,500円	203701

製造販売元:
オリンパステルモバイオマテリアル株式会社
東京都渋谷区笹塚1-50-1

販売名: テルプラグ
医療機器の分類: クラスIV 高度管理医療機器
一般的名称: コラーゲン使用吸収性局所止血材
医療機器承認番号: 20900B2Z00646000



会員専用サイト登録ページ

発売元: 株式会社モリタ
大阪本社 大阪府吹田市豊水町3-33-18 Tel. 06.6380.2525
東京本社 東京都台東区上野2-11-12 Tel. 03.3834.6161
お問い合わせ: お客様相談センター Tel. 0800.222.8020

Premium Plus Japan Co., Ltd. (プレミアムプラス ジャパン株式会社)

〒563-0025 大阪府池田市城南1-4-2 2F

〈お問合せ窓口〉 072-735-7101 9:00 ~ 17:00 (土・日・祝祭日を除く)

商品センター: 〒561-0805 大阪府豊中市原田南1-13-5

(製造販売所)

※商品は税別価格となります。

※製品のデザイン、仕様、外観、パッケージ、価格等は予告なく変更する場合がございます。

担当販売店

F0511812-01

アンジーお子様向けグッズ 単体チラシ

患者様向けにかわいいアンジーシリーズ商品を紹介するリーフレットです。



B4 変形サイズ 巻き三つ折り カラー

プレミアムルーペ 単体チラシ

倍率3種類に加え、インディビジュアルとセンターフィックスの2タイプをご用意。



premiumTM
plus JAPAN

PREMIUM LOUPE

プレミアムルーペ

プレミアム品質で患者の明日を覗る

倍率2.5/3.0/3.5の3種類に加え、
ルーペレンズの位置を左右個別に調整できるインディビジュアルタイプと、
効率的に中央1箇所調整するセンターフィックスタイプの2種をご用意
充実したラインアップから最も適したルーペをお選びいただけます。

PREMIUM
series

SELECT

ファイル・リーマー 単体チラシ

コストパフォーマンスに優れたファイル・リーマーです。



— Piece by Piece with pleasure —

ファイル/リーマー

● コストパフォーマンスに優れたファイル、リーマー。
Hファイル、KファイルはNiTiもご用意。

● 数々の欧米のブランドにOEM供給しています。

● 安定した品質とコストパフォーマンスをご提供。



落下防止
穴に糸を通して落下を防止します。

すべり止め加工
凸凹がグリップ力を高めます。

R加工
穴ゆいRがあるため持ちやすくなっています。

正確な寸法加工
ISO規格に準じた2%のテーパー。

ラバーストッパー
ラバーストッパーは、それぞれの形状、長さのものが付属しています。長さも色によって分けられているため一目で区別できます。


刃部拡大図



Hファイル Kファイル リーマー

	リーマー	Kファイル	Hファイル
21mm			
25mm			
28mm			
31mm			

形状と番号による識別

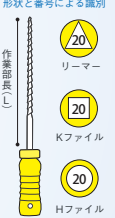

作業部(長さ)

20 リーマー
20 Kファイル
20 Hファイル



パッケージの外からでも太さを確認できます。



L21mm ASS. 15/40

Kファイル/Hファイル/リーマー

種 類	サイズ	入 数	価 格
#08 #10 #15 #20 #25 #30 #35 #40 #45 #50 #55 #60 #70 #80	21mm	6本	600円
	25mm		
	28mm		
アソート #15~#40(各1本)	31mm		
アソート #45~#80(各1本)			

販売名: Kファイル 一般医療機器 届出番号: 27B2X00268X00036
販売名: Hファイル 一般医療機器 届出番号: 27B2X00268X00019
販売名: リーマー 一般医療機器 届出番号: 27B2X00268X00042
製造販売業者: プレミアムプラスジャパン株式会社

NiTiもおすすめ!!
#08、#10もラインナップ

湾曲した根管には、ニッケルチタンがおすすめです。根管作業長の確認にも適しています。





L21mm ASS. 45/80

NiTi Kファイル/NiTi Hファイル

種 類	サイズ	入 数	価 格
#08 #10 #15 #20 #25 #30 #35 #40	21mm	6本	1,200円
	25mm		
アソート #15~#40(各1本)			

販売名: NiTi Kファイル 一般医療機器 届出番号: 27B2X00268X00037
販売名: NiTi Hファイル 一般医療機器 届出番号: 27B2X00268X00035
製造販売業者: プレミアムプラスジャパン株式会社

ガッ タパーチャポイント・ペーパーポイント 単体チラシ



ガッタパーチャポイント/ペーパーポイント



医療用素材の韓国上場企業META BIOMEDは、ガッタパーチャポイントの世界市場シェア17%を占めています。(2012年 META BIOMED調べ)

- 曲げても切れにくいしなやかさ。弾力があり、緊密な充填を実現します。



ガッターパーチャポイント メインポイント

販売名：ガッパバーチャポイント 管理医療機器 認証番号：224AGBZI00001000

サイズ	商品コード	全長	入 数	価 格
15	MGP-15-CD	28.5mm	120本	900円
20	MGP-20-CD			
25	MGP-25-CD			
30	MGP-30-CD			
35	MGP-35-CD			
40	MGP-40-CD			
15-40	MGPCD-A1		120本(各20本)	
45	MGP-45-CD		120本	
50	MGP-50-CD			
55	MGP-55-CD			
60	MGP-60-CD			
70	MGP-70-CD			
80	MGP-80-CD	120本(各20本)		
45-80	MGPCD-A2			



ガッターチャポイント アクセサリーポイント

販売名：ガッタパーチャポイント 管理医療機器 認証番号：224AGBZI00001000

	商品コード	種 類	サイズ	入 数	価 格
(A)	MGPU-FS	FS(細小)	17mm	100本	1,000円
(B)	MGPU-FM	FM(細中)	21mm		
(C)	MGPU-FL	FL(細大)	25mm		
(D)	MGPU-S	S(小)	15mm		
(E)	MGPU-M	M(中)	21mm		
(F)	MGPU-L	L(大)	26mm		
(G)	MGPU-LM	LM(大中)	21mm		
(H)	MGPU-XL	XL(特大)	26mm		
	MGPU-A1	アソビ フック型 (FS・FM・LM)		100本(各25本)	

- (A) FS 17mm (B) FM 21mm (C) FL 25mm
(D) S 15mm (E) M 21mm (F) L 26mm
(G) LM 21mm (H) XL 26mm
- ※実寸 SIZE**

- 滅菌済みのペーパーポイント。
根管内の乾燥、止血などにお使いいただけます。

アブソーバンドペーパーポイント

販売名: アブソーバンド ペーパーポイント 一般医療機器 国出番号: 40B1X10003GE0077

滅菌済



サイズ	商品コード	全長	入 数	価 格
15	MPP-15-CD	28.5mm	200本	600円
20	MPP-20-CD			
25	MPP-25-CD			
30	MPP-30-CD			
35	MPP-35-CD			
40	MPP-40-CD			
15-40	MPPCD-A1			
45	MPP-45-CD			
50	MPP-50-CD			
55	MPP-55-CD			
60	MPP-60-CD	200本		
70	MPP-70-CD			
80	MPP-80-CD			
45-80	MPPCD-A2			

製造販売業者 株式会社ジオメディ

販売業者 **Premium Plus Japan Co.,Ltd.** (プレミアムプラス ジャパン株式会社)
〒563-0025 大阪府池田市城南1-4-2 2F
〈お問合せ窓口〉 072-735-7101 9:00～17:00(土・日・祝祭日を除く)

※商品は税別価格となります。

担当販売店

F0331712-02

インスツルメントカタログ

機能的なラインアップで用途に合わせたツールをご紹介します。32ページの見応えあるカタログです。



210×210mm 正方形サイズ 32 ページ カラー

アクアスプリントサーモ 単体チラシ

premiumTM
plus JAPAN

→ Piece by Piece with pleasure ←

アクアスプリント サーモ



- 約10分のチェアタイムで完成！その日のうちにお渡しできる顎関節症疼痛緩和用スプリント。
- 熱可塑サーマルパッドを患者様の下顎に圧接してフィットさせます。手軽に個人スプリントが完成します。
- 口腔内に挿入すると左右のウォーターパッドにより咬合圧が左右均等に分散され、顎関節周辺の筋肉をリラックスさせることができます。



サーマルパッド ウォーターパッド



AQUASPLINT classic
HABACH Thermo-plate dental therapy

アメリカ矯正歯科学会 in Chicago 2011
にてアクアスプリントの臨床結果が発表されています。詳細はお問合わせください。

使用方法







- 80℃のお湯に2～3分浸漬しサーマルパッドが透明になるのを待つ。
- 透明になったサーマルパッドを冷水で10秒間冷却する。
- 下顎に圧接し5分間保持する。冷水で口腔内をすすぎ、口腔内を冷却する。
- サーマルパッドが白くなり凝固したことを確認し除去する。(1～5は繰り返し行うことができます。)
- サーマルパッドの余剰部分はハサミ等で除去する。

・装着時間 1日10時間以内(就寝時8時間、日中2時間) ・4週間使用しても症状改善が見られない場合は咬合以外の疼痛原因を検討する。



セット内容

- ・スプリント台
- ・リテーナーボックス×1
- ・取扱説明書×1

アクアスプリント サーモ

Aquasprint Thermo

商品コード	入 数	価 格
AQ2	1セット	12,000円

販売名: アクアスプリントサーモ 一般医療機器 届出番号: 2782X00268X00107

Premium Plus Japan Co.,Ltd. (プレミアムプラスジャパン株式会社)
〒563-0025 大阪府池田市城南1-4-2 2F
(お問合せ窓口) 072-735-7101 9:00～17:00(土・日・祝祭日を除く)

商品センター (製造販売業) : 〒561-0805 大阪府豊中市原田南1-13-5

※ 商品は税別価格となります。

担当販売店

F0982106-01

AFR ミニレグ 単体チラシ

premiumTM
plus JAPAN
— Piece by Piece with pleasure —

AFRミニレグ



● 下顎の限界運動を記録し、水平的顎間関係を定めるためにご利用いただけるゴシックアーチ描記装置です。

● 一つのサイズでどの顎形状にも装着でき、事前準備も最小限で大幅時間短縮。

● 記録の保管も可能なスケールラベル付き。
※パウシュ8μアルティフォルと一緒にご利用ください。



使用方法

1




描記板と描記針を脱着後、パテ、シリコンバイト材等を描記板に盛り、口腔内に装着する。
※推奨製品ゾールバイト

2



描記針も同じ要領で口腔内に装着する。
※推奨製品ゾールバイト

3

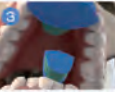

タッピングを何度か行い、顎のストレスを解消する。

4



パウシュアルティフォルを描記板に渡す。

5



ゴシックアーチの描記を行う。

6



描記針をCRに合わせ、CRバイトワックスで咬合位置を記録する。

7



CRバイトワックスを使用し、上下顎の位置関係を咬合器上で合わせる。

※スケールラベルを使用の際は、記録を必要とする際はスケールラベルを両面シールで描記板に貼付し、パウシュアルティフォル8μを描記針と描記板の接点にて、記録する。

セット内容



① ゴシックアーチトレーサー
・描記板×5
・描記針×5
・CRバイトワックス×5
・スケールラベル×10
・両面シール×10



② ゴシックアーチ スターターセット
・描記板×1
・描記針×1
・CRバイトワックス×2
・スケールラベル×2
・両面シール×2



③ CRバイトワックス
・CRバイトワックス×10

AFRミニレグ
AFR-Mini-Reg

		ディスプレイザブル	
商品コード	種類	入数	価格
① AFR100	ゴシックアーチトレーサー		8,000円
② AFR101	ゴシックアーチ スターターセット	1セット	4,000円
③ AFR102	ゴシックアーチ CRバイトワックス		

販売名：AFR ミニレグ 一般医療機器 届出番号：27B3X00271000007