

NEW PRODUCTS CATALOG 2023-2024



日本本社
〒560-0005 大阪府豊中市西緑丘1-1-31 5F
〈お問合せ窓口〉
Tel.06-6845-0050
[9:00～17:00(土・日・祝祭日を除く)]

商品センター(製造販売業)
〒561-0805 大阪府豊中市原田南1丁目13番5号



商品のクオリティー維持・追求の為、スペック・カラー・価格等を予告なく変更する
場合がございます。本カタログ掲載商品の写真は、印刷により実際のカラーと異なる
場合がございますので、あらかじめご了承ください。

2023年4月発行

担当販売店

プレミアムプラスジャパン新商品をいち早くお届け

premiumTM
plus JAPAN

NEW PRODUCTS LINE UP



MaxPiezo7+ P6

エアフロークリアミラー P8



フュージョンアンテリア
マトリックス

P12

Cファイル P14



リハスプリント P14



Max Cure 9

P10

A Cure Plus

P11



DPPEユニフォーム

P15




Scaler MaxPiezo7+

コンパクトながら大容量の給水タンクを備えた超音波スケーラーです。
超音波と高出力パワーで歯石の除去、効率良く根管の拡大に使用できます。



衛生的な本体デザイン

本体重量1.59kgとコンパクトで軽量なので、
院内での移動や訪問診療の際に持ち運びが便利です。

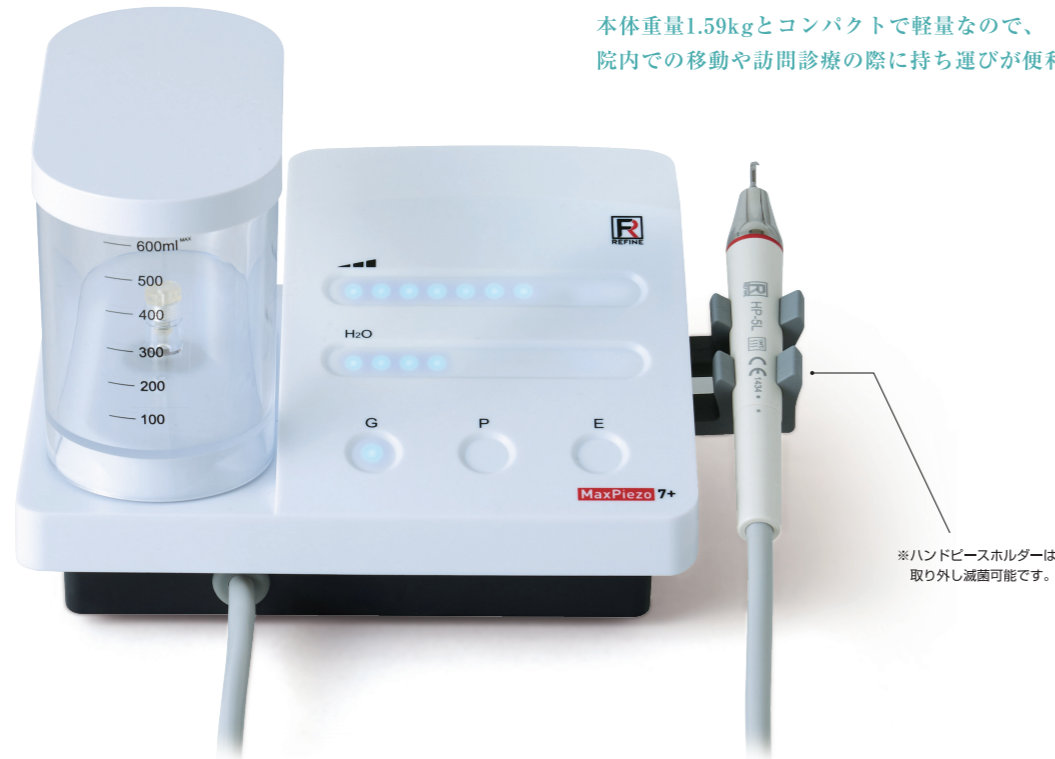


※ハンドピースホルダーは
取り外し滅菌可能です。

セット内容



・ファイル(#25(赤)、#20(黄))×各2本 ・チップ(G4、G5、G6、P1、P3、P4、P4D) ・エンドチャック(E1)

G4: 隣接面・裂溝の除石 P1: 浅い歯肉溝の除石 P4: 歯肉縁下除石後の仕上げに E1: Φ0.7~0.8mmのファイルホルダー
G5: 歯肉縁上や歯頸部の除石 P3: 深い歯周ポケット等に P4D: 根管口明示 ※EMSのチップと互換性があります。
G6: 歯肉縁上や歯頸部の大きな歯石に

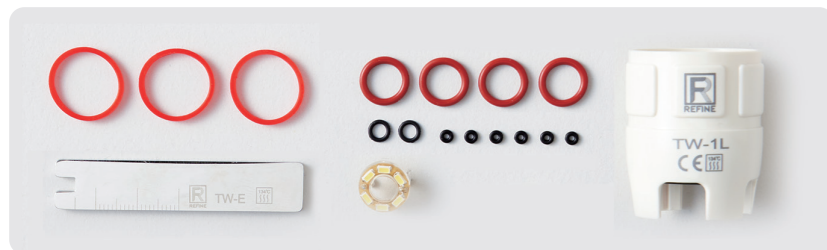

- ・メインユニット
- ・ハンドピース ・ハンドピースケーブル
- ・チップ類 ・エンドファイル ・レンチ類
- ・フットスイッチ ・電源ケーブル
- ・交換用パッキン ・交換用ハンドピースLED

操作性の良いスマートタッチパネル



軽いタッチで水量とスケーリングの強弱を衛生的に調整できます。適した水量と振動設定にしてください。

Piezoによるパワフルなスケーリング



モード選択 G ジェネラル (スケーリング) P ベリオ E エンド

Piezoエンジンを搭載し、スケーリング、ベリオ、エンドの3つのモードで治療可能です。パワフルなスケーリングで、患者さんの歯石を除去します。

キャビテーション効果とチップの冷却をするウォータースプレー




ハンドピースから噴射される水はタッチパネルで適した量に調節できます。

軽量で持ちやすいハンドピース



ハンドピースは人間工学に基づいてデザインされたペンタイプのグリップを備えています。軽量で先端が細いノズル形状のため、口腔内深部までアクセスすることができ、取り外しとオートクレープが可能のため、清潔に保つことができます。
※ハンドピースをオートクレープの際、LEDライトを外してください。

多様な治療に柔軟に応える豊富な機能

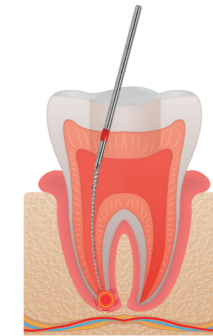

- ・スケーリング
- ・根管治療
- ・クラウン除去
- ・ガッタパーチャの除去
- ・窩洞形成

口腔内を明るく照らすLEDライト



口腔内を明るく照らすことで、診療をスムーズに行えます。

仕様

本外形寸法(mm): 165×210×150mm
本体の重さ: 1.59kg
電源電圧: 100V/ AC 50Hz/60Hz
電源入力(VA): 38
高周波出力(W): 3-20
振動数(kHz): 28±5
ハンドピースモデル: HP-5L



1年保証

※本体、ハンドピースのみ一年保証です。



※ハンドピースとハンドピースホルダーのみオートクレープ可能です。
※ハンドピースをオートクレープで滅菌する際、LEDライトを外してください。

スケーラー MaxPiezo7+

Scaler MaxPiezo7+

商品コード	入数	価格
FC-0587	1セット	138,000円

販売名: スケーラー MaxPiezo7+ 管理医療機器 特定保守管理医療機器 認証番号 304AGBZX00091000

スケーラー MaxPiezo7+ アクセサリーパーツ

Scaler MaxPiezo7+

商品コード	種類	入数	価格
HP-5L	スケーラーハンドピース	1本	40,000円
FC-0588	ハンドピースLEDランプ	1個	2,500円
FC-0589	エンドファイル#15	6本	1,800円
FC-0590	エンドファイル#20		

商品コード	種類	入数	価格
FC-0591	エンドファイル#25	6本	1,800円
FC-0592	エンドファイル#30		
FC-0593	エンドファイル#35		
FC-0594	エンドファイル#40		

販売名: スケーラー MaxPiezo7+ 管理医療機器 特定保守管理医療機器 認証番号 304AGBZX00091000

エアフロークリアミラー

エアーを噴射し続けミラーに付く水滴や唾液を吹き飛ばし、クリアな状態を保ちます。
30層のセラミックコーティングで高反射率かつ高耐久のミラーです。



カラーバリエーション

カラーバリエーションが豊富な6本カラーアソート、3本カラーアソートからお選びいただけます。




エアー噴射によるクリーンな視界



診療時の患者さんの呼気によるミラーの曇りや治療時の注水等による水滴の付着を防止することで、常にクリーンな視野を確保することができます。

反射率99%の表面反射ミラー

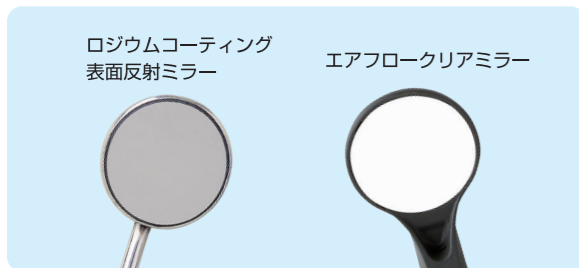

ミラーへの エア噴射システム



接続方法




エアフロークリアミラー (6本カラーアソート)

Air Flow Clear Mirrors

商品コード	種類	入数	価格
CM34J699	6本カラーアソート(No.4)	1セット	53,000円

販売名: エアクリンミラー 一般医療機器 届出番号: 27B2X00268X00114

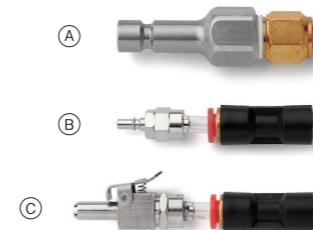

エアフロークリアミラー エアソースコネクター


Air Flow Clear Mirrors

商品コード	種類	入数	価格
① CM3-12-2	モリタ・ヨシダ用		4,000円
② CM3-12-3	タカラベルモント用	1個	
③ CM3-12-5	ユニバーサル1/4		5,000円

注意

ご使用の際にはエア供給口が必要です。
ユニットにエア供給口がない場合はユニットメーカーにお問い合わせください。また、上記エアソースコネクターが接続できないエア供給口の場合もユニットメーカーにお問い合わせください。当社では設置作業・配管分岐作業の施工、手配は致しかねます。

接続構造

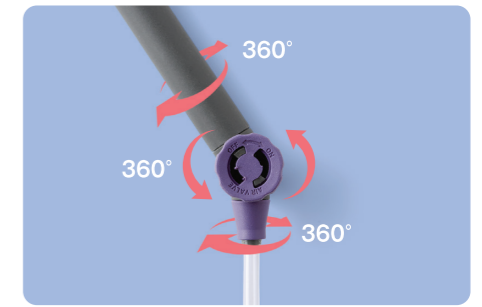

人間工学に基づいて設計されたジョイントは360°回転することで操作時のチューブのねじれを防ぎます。

エアバルブでエア流量調整が可能



エアフロークリアミラー (3本カラーアソート)

Air Flow Clear Mirrors

商品コード	種類	入数	価格
CM34J399	3本カラーアソート(No.4)	1セット	28,000円

販売名: エアクリンミラー 一般医療機器 届出番号: 27B2X00268X00114



エアフロークリアミラー アクセサリー

Air Flow Clear Mirrors

商品コード	種類	入数	価格
CM3-12	アクセサリパック	1セット	30,000円

Max Cure 9

1秒照射で2mmのレジンをスピード硬化。波長域385~515nmと広く様々な光重合材料に対応します。2つのモードでシンプル操作が可能なコストパフォーマンスを追求したキュアリングライトです。



1年保証

最大光量：2,500mW/cm²
波長域：385~515nm



薄いライトヘッド

開口量の少ないお子さまやご年配の方に優しい薄いライトヘッドです。

シンプルな2つのモードで
使いやすい光重合器



Max Cure 9		
最大光量：2,500mW/cm ² 波長範囲：385~515nm		
モード	光量	照射時間
P1 TURBO	2,500mW/cm ²	1・3秒
P2 NORMAL	1,200mW/cm ²	5・10・15・20秒

便利な置くだけ充電



専用充電スタンドにハンドピースを置くだけで充電できます。

360°ヘッド回転



ヘッドを回転させることで、上歯・下歯共に容易に照射できます。


MaxCure 9

商品コード	カラー	サイズ	入数	価格
FC-0531	ホワイト	本体サイズ：φ26×255mm ライトヘッド：φ15mm	1セット	50,000円
FC-0532	パープル			

販売名：Maxキュア9 一般医療機器 特定保守管理医療機器 届出番号 27B2X00268X00115

MaxCure 9 ライトヘッド

商品コード	サイズ	入数	価格
FC-0534	φ15mm	1本	18,000円

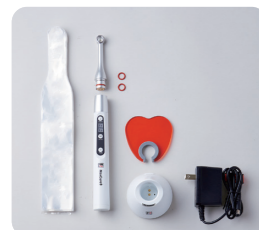

セット内容

- ・ライトヘッド
- ・ハンドピース
- ・アダプター
- ・バッテリー
- ・充電スタンド
- ・感染予防スリーブ100枚
- ・ライトプロテクター
- ・取扱説明書
- ・保証書

仕様

- ・電源：入力DC5V/1A
- ・バッテリー：3.6V 2,600mAh
- ・種類：リチウムイオン
- ・バッテリー充電時間：2時間
- ・本体サイズ：φ26×255mm
- ・本体重量：117g
- ・ライトヘッド：φ15mm
- ・充電スタンドサイズ：70×60mm
- ・充電スタンド重量：138g
- ・照射可能回数：約900回*
- ※フル充電の状態、ノーマルモード10秒で照射した場合です。



A Cure Plus

1秒照射で2mmのレジンをスピード硬化。波長域385~515nmと広く様々な光重合材料に対応します。人間工学に基づいたホールドしやすいフォルムと極薄ライトヘッドで臼歯部への照射がスムーズです。



1年保証

最大光量：2,500mW/cm²
波長域：385~515nm




極薄のライトヘッド

4つのモードで
あらゆる場面にも対応する
光重合器です



A Cure Plus		
最大光量：2,500mW/cm ² 波長範囲：385~515nm		
モード	光量	照射時間
TURBO	2,500mW/cm ²	1・3秒
NORMAL	1,200mW/cm ²	5・10・15・20秒
ORTHO	2,500mW/cm ²	3秒×10回・5秒×10回
CHECK(う蝕検知)	600mW/cm ²	30・60秒

8.5mmの極薄のライトヘッド

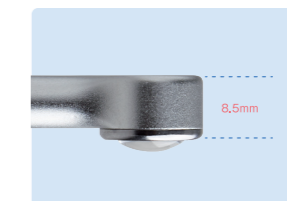

開口量の少ないお子さまやご年配の方に優しい薄いライトヘッドです。

充電スタンドライトメーター



充電スタンドにライトメーターを方に優しい薄いライトヘッドです。

A Cure Plus

商品コード	サイズ	入数	価格
FC-0533	本体サイズ：φ78×280mm ライトヘッド：φ10mm	1セット	82,000円

販売名：Aキュアプラス 一般医療機器 特定保守管理医療機器 届出番号 27B2X00268X00116

A Cure Plus ライトヘッド

商品コード	サイズ	入数	価格
FC-0536	φ10mm	1本	20,000円

ライトプロテクター

商品コード	入数	価格
FC-0538	1個	1,000円

※ライトプロテクターはMax Cure 9とA Cure Plusの両方に使用できます。



セット内容

- ・ライトヘッド
- ・ハンドピース
- ・アダプター
- ・バッテリー
- ・充電スタンド
- ・感染予防スリーブ100枚
- ・ライトプロテクター
- ・取扱説明書
- ・保証書

仕様

- ・電源：入力DC5V/1A
- ・バッテリー：3.6V 2,600mAh
- ・種類：リチウムイオン
- ・バッテリー充電時間：2時間
- ・本体サイズ：φ78×280mm
- ・本体重量：104g
- ・ライトヘッド：φ10mm
- ・充電スタンドサイズ：80×70mm
- ・充電スタンド重量：169g
- ・照射可能回数：約800回*
- ※フル充電の状態、ノーマルモード10秒で照射した場合です。



フュージョンアンテリアマトリックスシステム

Ⅲ・Ⅳ級窩洞の充填にご使用いただける高精度の前歯用マトリックスシステムです。バンドとウェッジ各サイズをセットにしたキットも用意しております。




高精度の充填に役立ちます

緩やかな湾曲により、唇側から舌側まで頸部縁をしっかりと保護します。

バンドを歯牙に密着させることにより、理想的な解剖学的構造を維持することができます。

厚さ0.038ミリメートルで歯の形状に近いためスムーズに歯間部へ挿入できます。

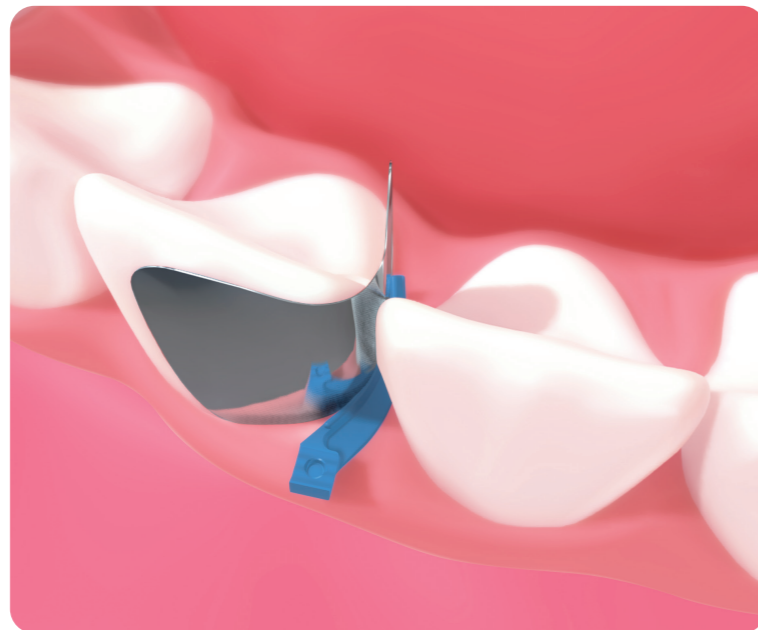

フュージョンアンテリアマトリックスバンド



50枚入 (単品)



ショート
厚さ:0.038ミリメートル




ロング
厚さ:0.038ミリメートル

- ステンレス鋼を使用していますので、装着時およびコンポジットレジン圧縮の際、変形しにくくなっています。
- 歯肉-切縁方向および唇側-舌側方向に理想的な解剖学的湾曲が得られます。



フュージョンアンテリアウェッジ

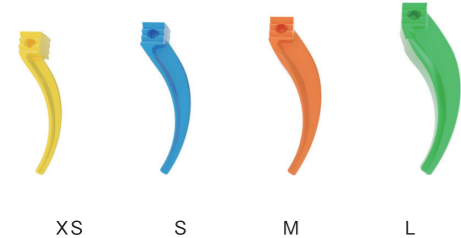

XS S M L

セパレータストラット



サービカルインターフェイス

- XS/S/M/Lの4サイズ展開です。
- T字型形状は歯間部スペースに深く入り込み、ブラケットライアングルを最小限に抑えます。
- テーパー状のセパレータストラットは圧力の大きさを調節し、近心接触をコントロールすることができます。

アンテリアマトリックスバンド2サイズとアンテリアウェッジ4サイズがフルセットになったお得なキットです。



①

②

フュージョンアンテリアマトリックスキット

Fusion Anterior Matrix System

商品コード	種類	入数	価格
① ANK01	バンド×各50 ウェッジ×各25	1セット	58,000円
② ANK02	バンド×各25 ウェッジ×各10		32,000円

販売名: フュージョンアンテリアマトリックスシステム 一般医療機器 届出番号: 27B2X00268X00117



アンテリアウェッジ4サイズがセットになったキットです。



①

②

フュージョンアンテリア ウェッジキット


Fusion Anterior Wedge

商品コード	種類	入数	価格
① ANK4	ウェッジ×各100	合計400個	56,000円
② ANK4-M	ウェッジ×各50	合計200個	29,000円

販売名: フュージョンアンテリアマトリックスシステム 一般医療機器 届出番号: 27B2X00268X00117




アンテリアマトリックスバンドとアンテリアウェッジはそれぞれ好みのサイズを用意しています。

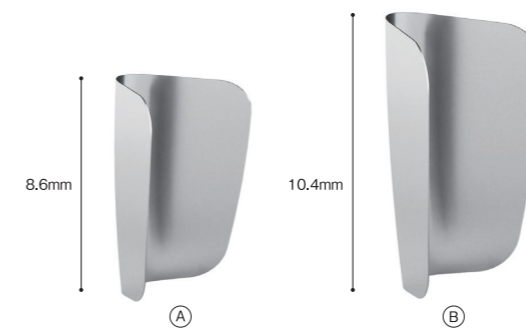

①

②

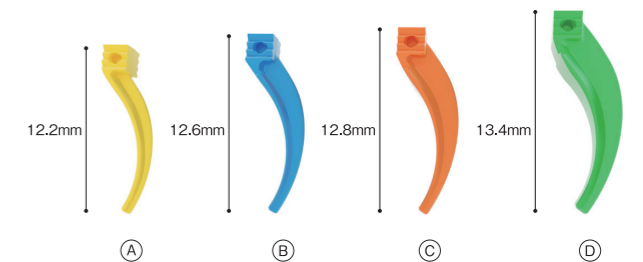

①

②

③

④

フュージョンアンテリアマトリックスバンド

Fusion Anterior Matrix Bands

商品コード	種類	入数	価格
① AN100-M	ショート	50個	25,000円
② AN200-M	ロング		

販売名: フュージョンアンテリアマトリックスシステム 一般医療機器 届出番号: 27B2X00268X00117



フュージョンアンテリア ウェッジ

Fusion Anterior Wedge


商品コード	種類	カラー	入数	価格
① ANYL	XS	イエロー	100個	16,000円
② ANBL	S	ブルー		
③ ANOR	M	オレンジ		
④ ANGR	L	グリーン		

販売名: フュージョンアンテリアマトリックスシステム 一般医療機器 届出番号: 27B2X00268X00117



Cファイル

石灰化による閉塞部や狭窄した根管の穿通にご使用いただけます。

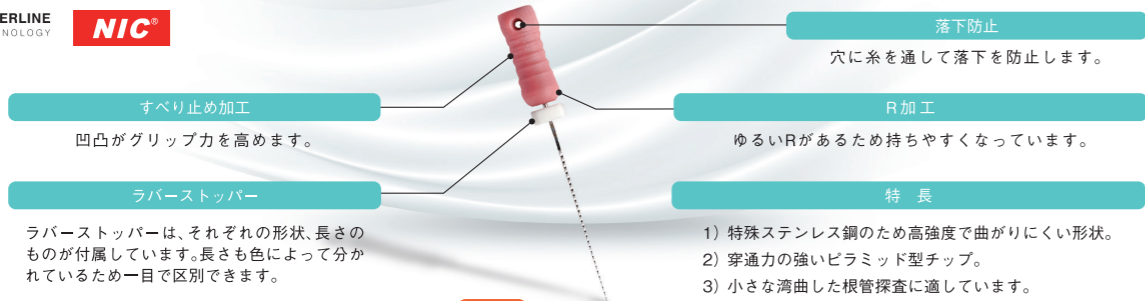

Cファイル

S.S.C-Files

販売名：Cファイル 一般医療機器 届出番号：27B2X00268X00118

	06	08	10	12	15	6-10	8-15
先端径	0.06	0.08	0.10	0.12	0.15	アソート	アソート*
19mm	HSC 019 006	HSC 019 008	HSC 019 010	HSC 019 012	HSC 019 015	HSC 019 A01	HSC 019 A02
21mm	HSC 021 006	HSC 021 008	HSC 021 010	HSC 021 012	HSC 021 015	HSC 021 A01	HSC 021 A02
25mm	HSC 025 006	HSC 025 008	HSC 025 010	HSC 025 012	HSC 025 015	HSC 025 A01	HSC 025 A02
入数	6本						
価格	1,400円						

*08・10・15×各2本です。

リハスプリント

3種類の硬さから選べる顎関節症疼痛緩和用スプリントです。既成のスプリントのため、当日お渡し可能です。



咬合高径を考慮した嵌合位 & 特徴的な表面構造で密着性向上



セット内容 ・スプリント台 ・リテーナーボックス ・取扱説明書

リハスプリント

RehaSplint

商品コード	種類	入数	価格
(A) RS-200	ハード	1セット	6,000円
(B) RS-201	ミディアム		
(C) RS-202	ソフト		

販売名：リハスプリント 一般医療機器 届出番号：27B3X00271000008

注意

- 使用期間は30日間以内とすること。
- 装着時に嘔吐反射がある場合には、使用を中止すること。
- 本品が破損した場合は使用を中止すること。
- 本品は装着前後に水で洗浄し、必要に応じて少量の歯磨きペースト等で洗浄すること。
- 一般的には本品の使用により筋緊張と疼痛が緩和した後、補綴又は矯正治療により永久固定に進む。緩和しない場合は、別の原因が考えられるため、本品の使用を中止し診察を受けること。

DPPE

Dental Uniform

DPPEユニフォームはスプレーミストによるエアロゾル感染からあなたの身を^{まも}る、全く新しい歯科医療用プロテクションウェアです。

*DPPEはDental Personal Protective Equipmentの略称です。

キャップ



- 髪の毛をエアロゾルからシャットアウトします。
- 洗練されたデザイン。

ネックガード



- DPPEの個人防護具です。
- 露出している首をエアロゾルからガードします。
- ユニフォームの首回りにフィットして隙間を遮断します。

ユニフォーム



- エアロゾルが付着しにくいシンプルでフラットなデザインです。
- エアロゾルが侵入しにくい形状に縫製。
- ピンクとシルバーの2種類のタグをご用意。



「Etak®」による
抗菌・抗ウイルス
機能繊維加工

&

エアロゾルの
付着を防ぐ
静電気防止効果

DPPEサイズ表

	S	M	L	LL	3L
首回り	43	44.5	46	47.5	49.5
着丈	69	71	74	77	78
バスト	98	104	110	116	124
肩幅	38	44	46	48	51
袖丈	20	20	21	22	23

ピンクタグのDPPEは3サイズ、シルバータグのDPPEは4サイズよりお選びいただけます。

DPPEユニフォーム

DPPE Uniform

商品コード	カラー	種類	入数	価格
DC-0158		S	1着	18,000円
DC-0159	ピンク(タグ)	M		
DC-0160		L		
DC-0161		M	5着セット	85,000円
DC-0162	シルバー(タグ)	L		
DC-0163		LL		
DC-0164		3L		

商品コード	カラー	種類	入数	価格
DC-0158-B		S	1着	18,000円
DC-0159-B	ピンク(タグ)	M		
DC-0160-B		L		
DC-0161-B		M	5着セット	85,000円
DC-0162-B	シルバー(タグ)	L		
DC-0163-B		LL		
DC-0164-B		3L		

抗菌・抗ウイルス機能繊維加工技術

クレンジ
CLEANSE®

繊維表面をEtak®でコーティングし特定の細菌やウイルスの増殖を抑制します。その数は99%に減少、約20種類の細菌・真菌・ウイルスに対する効果が確認済みです。

固定化抗菌成分

イーatak
Etak® Etak

広島大学大学院二川浩樹教授が開発。口腔内の治療や洗浄に用いる消毒薬が基材です。

Etakコーティングは毎日の滅菌クリーニングで50回程度の耐久性で定期的に新品に交換する必要があります。

スタッフ1名に5着セットを支給、毎日クリーニングすると250日の使用が可能です。