

歯科ユニットにエア供給口があれば簡単に取り付けられます。

● 接続方法



● 接続構造



人間工学に基づいて設計されたジョイントは360°回転することで操作時のチューブのねじれを防ぎます。

● エアバルブでエア流量調整が可能



ジョイント部分のエアバルブを調節することで、エア流量の調整が可能です。



エアフロークリアミラー (6本カラーアソート) オート
クレープ
G3

Air Flow Clear Mirrors

商品コード	種類	入数	価格
CM34J699	6本カラーアソート (No.4)	1セット	53,000円

販売名: エアクリーンミラー 一般医療機器 届出番号: 27B2X00268X00114




エアフロークリアミラー (3本カラーアソート) オート
クレープ
G3

Air Flow Clear Mirrors

商品コード	種類	入数	価格
CM34J399	3本カラーアソート (No.4)	1セット	28,000円

販売名: エアクリーンミラー 一般医療機器 届出番号: 27B2X00268X00114

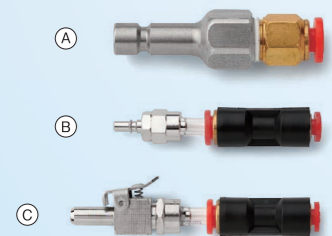

エアフロークリアミラー エアソースコネクター

Air Flow Clear Mirrors Air Source

商品コード	種類	入数	価格
CM3-12-2	モリタ・ヨシダ用	1個	4,000円
CM3-12-3	タカラベルモント用		4,000円
CM3-12-5	ユニバーサル1/4		5,000円



エアフロークリアミラー アクセサリー

Air Flow Clear Mirrors Accessory

商品コード	種類	入数	価格
CM3-12	アクセサリパック	1セット	30,000円


注意

ご使用の際にはエア供給口が必要です。ユニットにエア供給口がない場合はユニットメーカーにお問い合わせください。また、上記エアソースコネクターが接続できないエア供給口の場合もユニットメーカーにお問い合わせください。当社では設置作業・配管分岐作業の施工、手配は致しかねます。

premiumTM
plus JAPAN

DENTAL
MIRRORS
with FUNCTION

それぞれの特性を兼ね備えた3種のミラー

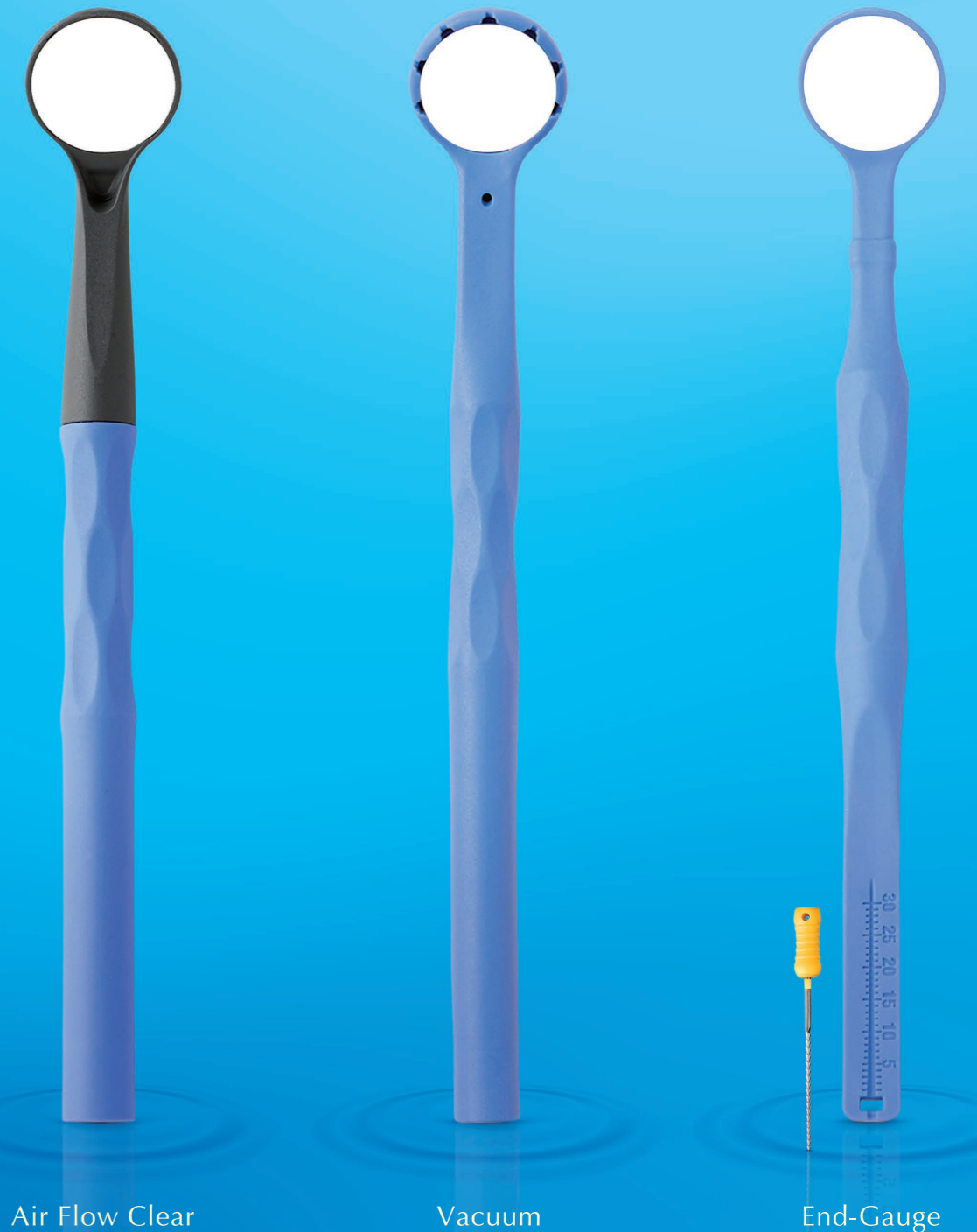

premiumTM
plus JAPAN

Premium Plus Japan Co., Ltd. (プレミアムプラスジャパン株式会社)

〒560-0005 大阪府豊中市西緑丘1-1-31 5F

お問合せ窓口: 06-6845-0050 9:00~17:00 (土・日・祝祭日を除く)

商品センター: 〒561-0805 大阪府豊中市原田南1丁目13番5号 (製造販売業)

商品のクオリティ維持・追求の為、スペック・カラー等を予告なく変更する場合がございます。掲載商品の写真は、印刷により実際のカラーと異なる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

※商品は税別価格です。

担当販売店

B2442304-01



Air Flow Clear Mirror

エアフロークリアミラー

エアを噴射し続けミラーに付く水滴と曇りを吹き飛ばし、クリアな状態を保ちます。30層のセラミックコーティングで高反射率かつ高耐久のミラーです。



動画で製品特長をご覧ください

ミラーへの エア噴射システム

噴射口よりエアを鏡面に向け吹き出し続け、水滴と曇りを吹き飛ばします。

エア噴射口

● カラーバリエーション

カラーバリエーションが豊富な6本カラーアソートと3本カラーアソートからお選びいただけます。



グレー グリーン パープル レッド イエロー ブルー


● エア噴射によるクリーンな視界



診療時の患者さんの呼吸によるミラーの曇りや治療時の注水等による水滴の付着を防止することで、常にクリーンな視界を確保することができます。

● 反射率99%の表面反射ミラー

ロジウムコーティング表面反射ミラー エアフロークリアミラー

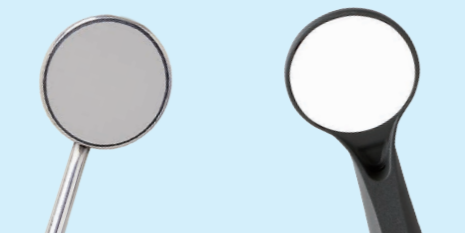

Vacuum Mirror

バキュームミラー

ミラーヘッドのバキューム孔から吸引し、どのような角度からでも吸い残しを許しません。お使いのバキュームに接続するだけでご使用いただけるのでスムーズに導入いただけます。ひとりでの診療時や補綴セット時、口腔内が狭い患者さんの診療時にもおすすめです。

※大きな切削片や歯石は吸引できない場合があります。



動画で製品特長をご覧ください

- 片面・両面タイプをご用意
- 3色カラーアソート
- 反射率99%の表面反射ミラー



ロジウムコーティング表面反射ミラー バキュームミラー

ミラー表面は30層のセラミックコーティングで高耐久・高反射率。反射率99%の表面反射ミラー。ロジウムコーティング表面反射ミラーと比較し40%明るいミラーです。

片面タイプ



しっかりと術野を確保し、吸引しながらミラーをご使用いただけます。

両面タイプ




両面タイプのミラーは頬圧排時でもハンドルや手が術野をさまたげません。またチークリトラクターとして使用しながら反対面で口腔内を明るく照らします。

しっかり吸引

- ✓ お使いのバキュームに接続
- ✓ ひとり診療時
- ✓ 補綴セット時
- ✓ 口腔内の狭い患者さん

● バキューム接続

別売「バキュームミラー用チューブ」をユニットのバキュームに挿して使用します。付属の変換アダプターでφ16mmとφ11mmに対応可能です。

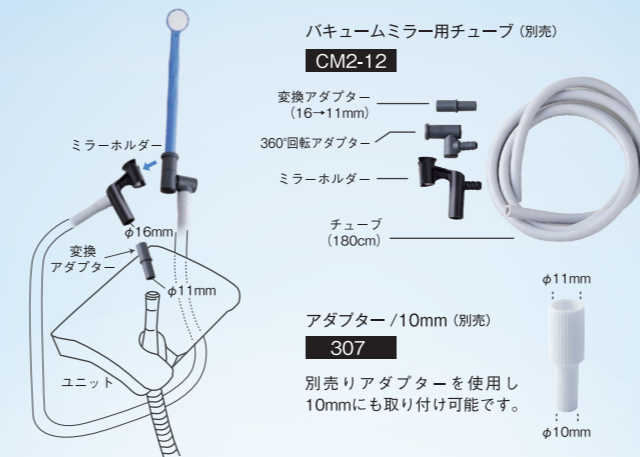

バキュームミラー

商品コード	種類	入数	価格
CM24J399	片面タイプ 3本カラーアソート (No.4)		20,000円
CM24J399D	両面タイプ 3本カラーアソート (No.4)	1セット	25,000円
CM2-12	バキュームミラー用チューブ180cm		22,000円
307	アダプター /10mm	1個	1,500円

販売名：バキュームミラー 一般医療機器 届出番号：27B2X00268X00105
販売名：排唾管アダプター 一般医療機器 届出番号：27B2X00268X00037





Dental Mirror with Endo Gauge

エンドゲージ付ミラー

ミラーグリップには30mmまで1mm刻みで測れるエンドゲージが付属しているため、診療効率を向上させます。ミラー表面は30層のセラミックコーティング加工されており、治療時撮影にも効果を発揮する高反射ミラーです。また、顕微鏡下での治療を妨げず、顕微鏡での根管治療に最適なミラーです。

● エンドゲージ

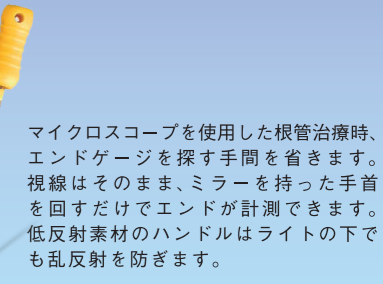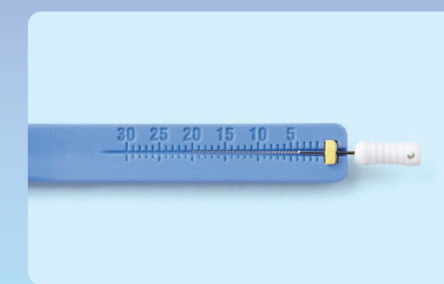

顕微鏡を使用した根管治療時、エンドゲージを探す手間を省きます。視線はそのまま、ミラーを持った手首を回すだけでエンドが計測できます。低反射素材のハンドルはライトの下でも乱反射を防ぎます。

片面タイプ



人間工学に基づいたグリップでミラーの角度調整をしやすい、しっかりと術野を確保していただけます。

両面タイプ



両面タイプのミラーはハンドルや手が術野をさまたげません。またチークリトラクターとして使用しながら反対面で口腔内を明るく照らします。

● 反射率99%の表面反射ミラー

ロジウムコーティング表面反射ミラー エンドゲージミラー



ミラー表面は30層のセラミックコーティングで高耐久・高反射率。反射率99%の表面反射ミラー。ロジウムコーティング表面反射ミラーと比較し40%明るいミラーです。

わずか13gの
超軽量ボディ

エンドゲージ付ミラー

商品コード	種類	入数	価格
CM141699	片面エンドゲージ付ミラー (No.4)		10,000円
CM141699D	両面エンドゲージ付ミラー (No.4)	6本	15,000円

販売名：エンドゲージ付ミラー 一般医療機器 届出番号：27B2X00268X00106

エンドゲージ付き