

premiumTM
plus JAPAN

DENTAL
MIRRORS
with FUNCTION

それぞれの特性を兼ね備えた3種のミラー



Air Flow Clear



Vacuum



End-Gauge



Air Flow Clear Mirror

エアフロークリアミラー

エアーを噴射し続けミラーに付く水滴と曇りを吹き飛ばし、クリアな状態を保ちます。
30層のセラミックコーティングで高反射率かつ高耐久のミラーです。



動画で製品特長を
ご覧ください

ミラーへの エアー噴射システム

噴射口よりエアーを
鏡面に向け吹き出し続け、
水滴と曇りを吹き飛ばします。



● カラーバリエーション

カラーバリエーションが豊富な6本カラーアソートと3本カラーアソートからお選びいただけます。



グレー

グリーン

パープル

レッド

イエロー

ブルー

● エアー噴射によるクリーンな視界



診療時の患者さんの呼気によるミラーの曇りや治療時の注水等による水滴の付着を防止することで、常にクリーンな視野を確保することができます。

● 反射率99%の表面反射ミラー

ロジウムコーティング
表面反射ミラー

エアフロークリアミラー





Vacuum Mirror

バキュームミラー

ミラーヘッドのバキューム孔から吸引し、どのような角度からでも吸い残しを許しません。お使いのバキュームに接続するだけでご使用いただけるのでスムーズに導入いただけます。ひとりでの診療時や補綴セット時、口腔内が狭い患者さんの診療時にもおすすめです。

※大きな切削片や歯石は吸引できない場合があります。




動画で製品特長を
ご覧ください

● 片面・両面タイプをご用意

● 3色カラーアソート

● 反射率99%の表面反射ミラー

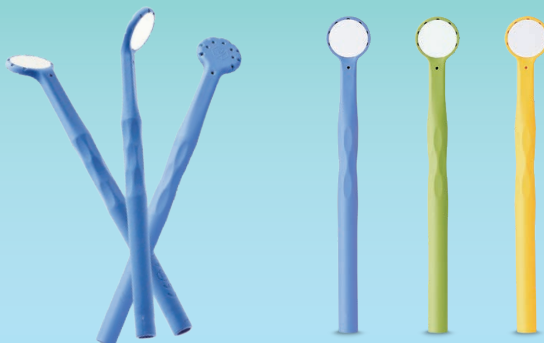

ロジウムコーティング
表面反射ミラー

バキュームミラー



ミラー表面は30層のセラミックコーティングで高耐久 & 高反射率。反射率99%の表面反射ミラー。ロジウムコーティング表面反射ミラーと比較し40%明るいミラーです。

片面タイプ



しっかりと術野を確保し、吸引しながらミラーをご使用いただけます。

両面タイプ




両面タイプのミラーは頬圧排時でもハンドルや手が術野をさまたげません。またチークリトラクターとして使用しながら反対面で口腔内を明るく照らします。

しっかり吸引

- ✓ お使いのバキュームに接続
- ✓ ひとり診療時
- ✓ 補綴セット時
- ✓ 口腔内の狭い患者さん

● バキューム接続

別売「バキュームミラー用チューブ」をユニットのバキュームに挿して使用します。付属の変換アダプターでφ16mmとφ11mmに対応可能です。

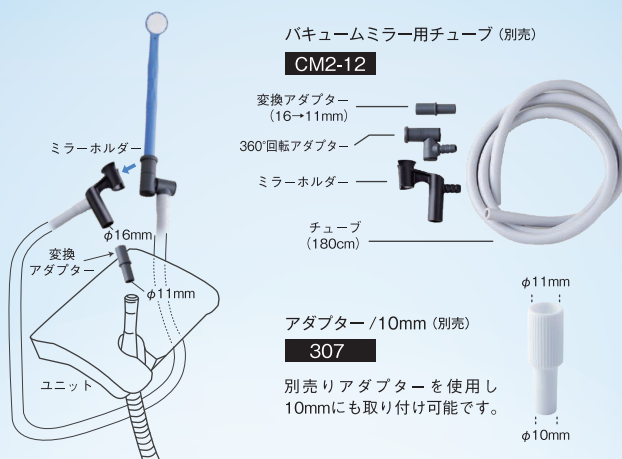

バキュームミラー用チューブ(別売)

CM2-12

変換アダプター
(16→11mm)

360°回転アダプター

ミラーホルダー

チューブ
(180cm)

アダプター/10mm(別売)

307

別売りアダプターを使用し
10mmにも取り付け可能です。



バキュームミラー

Vacuum Mirror



商品コード	種類	入数	価格
CM24J399	片面タイプ 3本カラーアソート(No.4)		20,000円
CM24J399D	両面タイプ 3本カラーアソート(No.4)	1セット	25,000円
CM2-12	バキュームミラー用チューブ180cm		22,000円
307	アダプター/10mm	1個	1,500円

販売名: バキュームミラー 一般医療機器 届出番号: 27B2X00268X00105
販売名: 排唾管アダプター 一般医療機器 届出番号: 27B2X00268000037




Dental Mirror with Endo Gauge

エンドゲージ付ミラー

ミラーグリップには30mmまで1mm刻みで測れるエンドゲージが付属しているので、診療効率を向上させます。ミラー表面は30層のセラミックコーティング加工されており、治療時撮影にも効果を発揮する高反射ミラーです。また、マイクロスコープ下での治療を妨げず、マイクロスコープでの根管治療に最適なミラーです。

● エンドゲージ

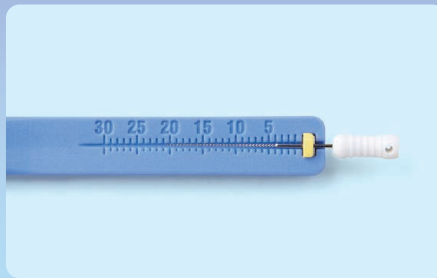

マイクロスコープを使用した根管治療時、エンドゲージを探す手間を省きます。視線はそのまま、ミラーを持った手首を回すだけでエンドが計測できます。低反射素材のハンドルはライトの下でも乱反射を防ぎます。

片面タイプ



人間工学に基づいたグリップでミラーの角度調整をやすく、しっかりと術野を確保していただけます。

両面タイプ



両面タイプのミラーはハンドルや手が術野をさまたげません。またチークリトラクターとして使用しながら反対面で口腔内を明るく照らします。

● 反射率99%の表面反射ミラー

ロジウムコーティング
表面反射ミラー

エンドゲージミラー



ミラー表面は30層のセラミックコーティングで高耐久・高反射率。反射率99%の表面反射ミラー。ロジウムコーティング表面反射ミラーと比較し40%明るいミラーです。

わずか **13g** の
超軽量ボディ

エンドゲージ付き

エンドゲージ付ミラー

Dental Mirror with Endo Gauge



商品コード	種類	入数	価格
CM141699	片面エンドゲージ付ミラー (No.4)	6本	10,000円
CM141699D	両面エンドゲージ付ミラー (No.4)		15,000円

販売名：エンドゲージ付きミラー 一般医療機器 届出番号：27B2X00268X00106

歯科ユニットにエア供給口があれば簡単に取り付けられます。

● 接続方法



● 接続構造



人間工学に基づいて設計されたジョイントは360°回転することで操作時のチューブのねじれを防ぎます。

● エアバルブでエア流量調整が可能



ジョイント部分のエアバルブを調節することで、エア流量の調整が可能です。



エアフロークリアミラー (6本カラーアソート)

オート
クレープ
OK

Air Flow Clear Mirrors

商品コード	種類	入数	価格
CM34J699	6本カラーアソート(No.4)	1セット	53,000円

販売名：エアクリーンミラー 一般医療機器 届出番号：27B2X00268X00114




エアフロークリアミラー (3本カラーアソート)

オート
クレープ
OK

Air Flow Clear Mirrors

商品コード	種類	入数	価格
CM34J399	3本カラーアソート(No.4)	1セット	28,000円

販売名：エアクリーンミラー 一般医療機器 届出番号：27B2X00268X00114

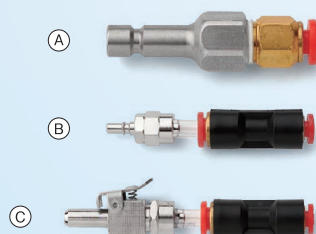

エアフロークリアミラー エアソースコネクター

Air Flow Clear Mirrors Air Source

商品コード	種類	入数	価格
CM3-12-2	モリタ・ヨシダ用		4,000円
CM3-12-3	タカラベルモント用	1個	
CM3-12-5	ユニバーサル1/4		5,000円



エアースホース

ミラーホルダー

エアフロークリアミラー アクセサリー

Air Flow Clear Mirrors Accessory

商品コード	種類	入数	価格
CM3-12	アクセサリパック	1セット	30,000円

注意

ご使用の際にはエア供給口が必要です。
ユニットにエア供給口がない場合はユニットメーカーにお問い合わせください。また、上記エアソースコネクターが接続できないエア供給口の場合もユニットメーカーにお問い合わせください。当社では設置作業・配管分岐作業の施工、手配は致しかねます。

premiumTM
plus JAPAN

Premium Plus Japan Co., Ltd.(プレミアムプラスジャパン株式会社)

〒560-0005 大阪府豊中市西緑丘1-1-31 5F

お問合せ窓口：06-6845-0050 9:00~17:00(土・日・祝祭日を除く)

商品センター：〒561-0805 大阪府豊中市原田南1丁目13番5号
(製造販売業)

商品のクオリティ維持・追求の為、スペック・カラー等を予告なく変更する場合がございます。掲載商品の写真は、印刷により実際のカラーと異なる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

※商品は税別価格です。

担当販売店

B2442304-01