



プレミアムプラスジャパン 株式会社
Premium Plus Japan Co., Ltd.

www.premiumplus.jp

日本本社
〒560-0005 大阪府豊中市西緑丘1-1-31 5F
〈お問合せ窓口〉
Tel.06-6845-0050
[9:00～17:00(土・日・祝祭日を除く)]

商品センター (製造販売業)
〒561-0805 大阪府豊中市原田南一丁目13番5号



プレミアムプラスジャパン SNS

当社の最新情報をfacebook、インスタグラムで発信しています。
下記QRコードからご覧ください。



商品のクオリティー維持・追求の為、スペック・カラー・価格等を予告なく変更する場合がございます。本カタログ掲載商品の写真は、印刷により実際のカラーと異なる場合がございますので、あらかじめご了承ください。
2025年4月発行

担当販売店

NEW PRODUCTS CATALOG 2025-2026



プレミアムプラスジャパン新商品をいち早くお届け



NEW PRODUCTS

LINE UP

P9 ~ P26

AM-2000 LIGHT
Dental Microscope



P8

AM-2000 LIGHT / AM-2000 / AM-5000
シーリングマウント
フロアマウント



P9

AM-2000 LIGHT / AM-2000 / AM-5000
エクステンションアーム



P9

AM-2000 LIGHT / AM-2000 / AM-5000
マイクロスコープ エクステンダー



P10

AM-2000 LIGHT / AM-2000 / AM-5000
マイクロスコープ
エクストラマニファイヤー



P10

AM-2000 LIGHT / AM-5000
マイクロスコープ
モバイルフォンアダプター



P11

AM-2000 LIGHT / AM-5000
マイクロスコープ
カメラアダプター




P11

AM-2000 LIGHT / AM-2000 / AM-5000
マイクロスコープ
モニターアーム



P12

AM-2000 LIGHT / AM-2000 / AM-5000
マイクロスコープ
シリコンカバー

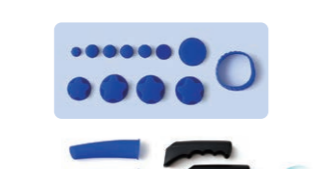

P12

AM-2000 LIGHT / AM-2000 / AM-5000
マイクロスコープ
別売りハンドル



P12

**MICROSCOPE
STOOL**



P13

Light1



P14

MT プレミアム モデルトリマ



P15

オーソガイドセット



P15

シンプロ



P16

シンプロアクセサリ



P16

ヘルボックス



P17

イージークリーン TEC



P18

イージークリーン TEC
アクセサリ



P18

ベーシッククラシック



P19

ベーシックモバイル



P19

ボルテックスコンパクト



P19

ミロプロ



P20

パワーピロー



P20

トップスピン



P21

トップスピン ドリルビット



P21

バリオ E



P22

ホッティ LED



P22

セーフティーバーナーエコ



P22

ワックスレトリックライト 2



P23

ワックスレトリック チップ




P23

GEO クラシック
ベーシックセット




P24

GEO クラシック

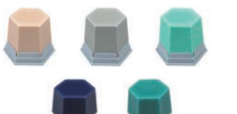


P24

GEO アバンギャルド

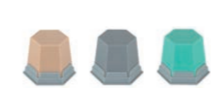


P25

GEO スペシャルワックス
ブロックアウト

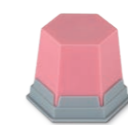


P25

GEO スペシャルワックス
サービカルワックス

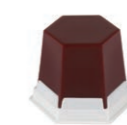


P25

GEO スペシャルワックス
ミリングワックス

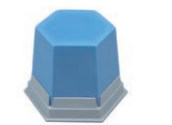


P25

GEO スペシャルワックス
スティッキーワックス

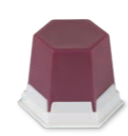


P26

GEO モデリングワックス

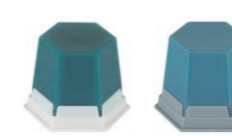

P26

GEO ホワイトワックス

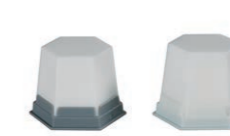

P26

GEO クラシックナチュラル



P26

NEW PRODUCTS LINE UP

P26 ~ P42

GEO ナチュラル



P26

GEO クローワックス



P27

GEO ディッピングワックス



P27

イソフィックス 2000



P27

GEO エキスパート
ファンクショナルワックス




P28

GEO ワックスワイヤー



P28

GEO クラスプワックス

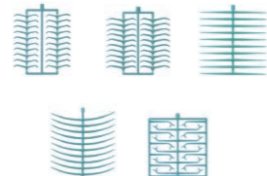


P29

GEO プレートワックス



P29

GEO リテンションワックス

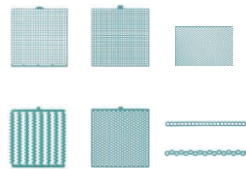

P30

GEO バーワックス
リンガルバー



P30

GEO ワックススプルー




P31

スマートピン



P31

ダイネックスプリリアント
グラインディングディスク

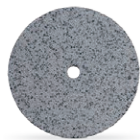

P31

研磨ペースト



P31

レンフェルト オールインワン
ポリッシング スターターキット



P32

レンフェルトポリッシュ



P32

オパール L



P33

シリコンポリッシャー



P33

コットンバフ



P33

バイソンブラシ



P33

コバルトクローム
ポリッシングブラシ



P33

ゴートヘアブラシ



P33

ピコセップ



P34

イソスティック



P34

レイアート トロピックプロ



P34

レイアート トロピック



P35

レイアート ナチュラル



P35

レイアート クリスタル



P35

パワースチーマー
スチームチューブ



P36

ツイスター アクセサリー



P36

マグニファイガラスシルバー



P36

集塵機 アクセサリー



P37

エリートダブル 8



P38

硬化ジェル



P38

ジンジファスト CAD
エラスチック




P38

エリートマスター



P39

ダイネックスプリリアント
グラインディングディスク

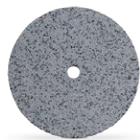

P31

研磨ペースト



P31

レンフェルト オールインワン
ポリッシング スターターキット



P32

レンフェルトポリッシュ



P32

オパール L



P33

シリコンポリッシャー



P33

コットンバフ



P33

バイソンブラシ



P33

エリートモデル ファスト



P39

ミキシングパッド



P39

プラチナム 75 CAD



P40

プラチナム 85



P40

プラチナム 85 タッチ



P41

フレキシブルコントラスター



P42

AFR ミニレグ



P42

AM-2000 LIGHT

Dental Microscope

AM-2000の軽い操作性はそのままに、内蔵カメラ、首振り機構などを除いたよりコンパクトな入門機をご用意しました。

ALLTION®



仕様一覧

対物レンズ	変倍システム	5段階 0.4x/0.6x/1.0x/1.6x/2.5x	照明	光源	LED照明
	総合倍率	1.7x~16.1x		照度 (Lux)	80,000
	視野径 (mm)	Φ13.6~Φ128.2mm		カラーフィルター	オレンジ / グリーン
	焦点距離 / 作動距離	250~430mm		色温度	5700K
接眼レンズ	倍率	12.5x	電気的定格	電源電圧	AC100V - 240V
	傾斜角度	0~180°		電源入力	DC12V 3A
	瞳孔距離調節範囲	50~75mm		周波数	50 / 60HZ
	調節範囲	±7D		電撃に対する保護の形式	クラスII機器
			重量	90kg	

クリアで明るい術野を実現するレンズ

AM-2000Lightは5段階ドラム式変倍システムを採用しています。

変倍システム	5段階 0.4x/0.6x/1.0x/1.6x/2.5x
総合倍率	1.7x~16.1x
視野径 (mm)	Φ13.6~Φ128.2mm
倍率	12.5x



ワンハンドオペレーション

フォーカス、倍率調節がハンドルを持ったまま片手で操作できるので診療の妨げになりません。




ビームスプリッター

ビームスプリッターからオプションアダプターを使用しカメラを外付けすることが可能です。




アポクロマティックレンズを採用し色収差を高精度で補正

全てのレンズには色収差(色ズレ)を高精度で補正するアポクロマティックレンズを採用し、鮮明な術野を確保します。

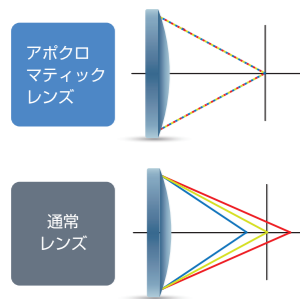

バリオスコープで広範囲の焦点距離調節が可能

250~430mmという広範囲(焦点距離180mm)をカバーするバリオスコープを標準搭載し、フォーカスをスムーズに合わせることができます。

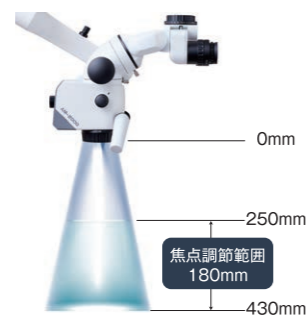

鏡筒本体もコンパクトな設計




マイクロスコープ AM-2000 ライト

Dental Microscope AM-2000 Light


商品コード	カラー	入数	価格
FC-0714	ホワイト	1台	2,100,000円

販売名: マイクロスコープ AM-2000ライト 一般医療機器 特定保守管理医療機器 届出番号: 27B2X00268X00192

付属品

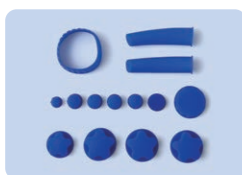

シリコンカバー(2セット)
※標準で2セット付属しています。
※パーツ単体販売はございません。

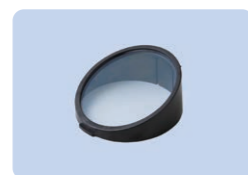

マイクロスコープ 対物レンズカバー
※標準で1個付属しています。

搬入組立について ●北海道、沖縄、離島、一部地域は別途送料お見積りします。 ●平日夜間(17:00以降)及び土日祝の搬入は別途お見積りします。 ●搬入時養生を必要とされる場合は別途お見積りします。

AM-2000 LIGHT / AM-2000 / AM-5000

シーリングマウント・フロアマウント

AM-2000、AM-5000、今回新発売のAM-2000ライトの全ての機種でシーリングマウントとフロアマウントでの設置の選択が可能となりました。

ALLTION®



※ALLTIONマイクロスコープすべての機種で対応可能です。
※本体ご注文時にのみ選択が可能です。ご注文後の変更はできませんのでご注意ください。

マイクロスコープ AM-2000 ライト

Dental Microscope AM-2000 Light

商品コード	種類	カラー	入数	価格
FC-0715	AM-2000 ライト シーリングマウント	ホワイト	1台	2,280,000円
FC-0716	AM-2000 ライト フロアマウント			

マイクロスコープ AM-2000

Dental Microscope AM-2000

商品コード	種類	カラー	入数	価格
FC-0717	AM-2000 シーリングマウント	ホワイト	1台	2,980,000円
FC-0718	AM-2000 フロアマウント			

マイクロスコープ AM-5000

Dental Microscope AM-5000

商品コード	種類	カラー	入数	価格
FC-0719	AM-5000 シーリングマウント	ホワイト	1台	3,780,000円
FC-0720	AM-5000 フロアマウント			
FC-0721	AM-5000 シーリングマウント	ブラック	1台	3,780,000円
FC-0722	AM-5000 フロアマウント			

販売名: マイクロスコープ AM-2000ライトマウントタイプ 一般医療機器 特定保守管理医療機器 届出番号: 27B2X00268X00193
販売名: マイクロスコープ AM-2000マウントタイプ 一般医療機器 特定保守管理医療機器 届出番号: 27B2X00268X00161
販売名: マイクロスコープ AM-5000マウントタイプ 一般医療機器 特定保守管理医療機器 届出番号: 27B2X00268X00162

※写真はAM-5000 ホワイトです。


搬入組立について ●北海道、沖縄、離島、一部地域は別途送料お見積りします。 ●平日夜間(17:00以降)及び土日祝の搬入は別途お見積りします。 ●搬入時養生を必要とされる場合は別途お見積りします。
●シーリングマウント、フロアマウントは別途専用業者による設置工事費用が発生します。
●マイクロスコープからモニターまでのHDMIケーブルの距離が3mを超える場合は別途部材費が発生します。

AM-2000 LIGHT / AM-2000 / AM-5000

エクステンションアーム

全てのマイクロスコープの標準の第一アームを650mmから950mmに拡張いただけます。

ALLTION®

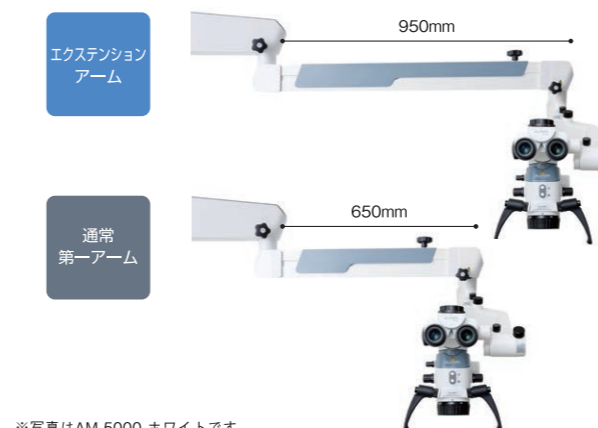

※ALLTIONマイクロスコープすべての機種に取り付けが可能です。
※本体ご購入時にのみ搭載が可能です。購入後の取り付けはできませんのでご注意ください。

マイクロスコープ エクステンションアーム

Microscope Extension Arm

商品コード	種類	カラー	入数	価格
FC-0708	フロアスタンド	ホワイト	1台	180,000円
FC-0709		ブラック		
FC-0710	シーリングマウント用	ホワイト	1台	180,000円
FC-0711		ブラック		
FC-0731	フロアマウント用	ホワイト	1台	180,000円
FC-0732		ブラック		

販売名: マイクロスコープ AM-5000(代表品)の付属品 一般医療機器 届出番号: 27B2X00268X00148

※写真はAM-5000 ホワイトです。



AM-2000 LIGHT / AM-2000 / AM-5000 マイクロ스코プ エクステンダー

マイクロ스코プの接眼レンズとの間の距離を延ばすエクステンダーです。3つのサイズ、カラーはブラックとホワイトの2色からお選びいただけます。上顎をみる角度の際にエクステンダーを使用することで、より体に負担の少ない体勢を維持できます。

ALLTION®

※ALLTIONマイクロSCOプすべての機種に取り付けが可能です。
※写真はAM-5000 ホワイトです。



マイクロSCOプ エクステンダー

商品コード	種類	カラー	入数	価格
FC-0691	25mm	ホワイト	1個	80,000円
FC-0692		ブラック		
FC-0693	35mm	ホワイト	1個	90,000円
FC-0694		ブラック		
FC-0695	50mm	ホワイト	1個	110,000円
FC-0696		ブラック		

販売名：マイクロSCOプ AM-5000(代表品)の付属品 一般医療機器 届出番号：27B2X00268X00148

AM-2000 LIGHT / AM-5000 マイクロSCOプ モバイルフォンアダプター

お手持ちのスマートフォンをビームスプリッターに装着し撮影ができるアダプターです。音声付き動画、静止画の撮影が可能です。

ALLTION®

※AM-5000/AM-2000ライトのみに取付可能です。
※ビームスプリッターに装着し使用します。
※写真はAM-5000 ホワイトです。



スマートフォンのカメラレンズをこの円に合わせるように調節してください。

スマートフォンのホルダーはスライド式の為、様々な機種に取り付けが可能です。

マイクロSCOプ モバイルフォンアダプター

商品コード	カラー	入数	価格
FC-0706	ブラック	1個	300,000円

販売名：マイクロSCOプ AM-5000(代表品)の付属品 一般医療機器 届出番号：27B2X00268X00148

AM-2000 LIGHT / AM-2000 / AM-5000 マイクロSCOプ エクストラマグニファイヤー


レバーを引くとレンズから見える映像の倍率が1.6倍に拡大され、最大倍率を上げることが可能です。カラーはブラックとホワイトの2色からお選びいただけます。

ALLTION®

※ALLTIONマイクロSCOプすべての機種に取り付けが可能です。
※写真はAM-5000 ホワイトです。



レバーを下に引くと倍率が1.6倍になります。

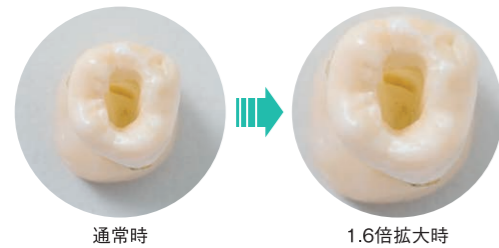

※拡大画像はイメージです。
※接眼レンズから見た場合のみ反映されます。

マイクロSCOプ エクストラマグニファイヤー

商品コード	カラー	入数	価格
FC-0697	ホワイト	1個	120,000円
FC-0698	ブラック		

販売名：マイクロSCOプ AM-5000(代表品)の付属品 一般医療機器 届出番号：27B2X00268X00148

AM-2000 LIGHT / AM-5000 マイクロSCOプ カメラアダプター

お手持ちのカメラで撮影が可能になるアダプターです。カラーはブラックとホワイトの2色からお選びいただけます。

ALLTION®

※AM-5000/AM-2000ライトのみに取付可能です。
※ビームスプリッターに装着し使用します。
※写真はAM-5000 ホワイトです。



Sony-E bayonet/Canon-EF/Nikon-F
F180/APS-C サイズ用(ホワイト)

Sony-E bayonet/Canon-EF/Nikon-F
F340/フルフレーム用(ホワイト)

マイクロSCOプ カメラアダプター

商品コード	種類	カラー	入数	価格
FC-0685	F180 APS-C ソニー	ホワイト	1個	220,000円
FC-0686		ブラック		
FC-0687	F340 フルフレーム ソニー	ホワイト	1個	300,000円
FC-0688		ブラック		
FC-0723	F180 APS-C キヤノン	ホワイト	1個	220,000円
FC-0724	F180 APS-C キヤノン	ブラック	1個	220,000円

商品コード	種類	カラー	入数	価格
FC-0725	F340 フルフレーム キヤノン	ホワイト	1個	300,000円
FC-0726		ブラック		
FC-0727	F180 APS-C ニコン	ホワイト	1個	220,000円
FC-0728	F180 APS-C ニコン	ブラック		
FC-0729	F340 フルフレーム ニコン	ホワイト	1個	300,000円
FC-0730	F340 フルフレーム ニコン	ブラック		

販売名：マイクロSCOプ AM-5000(代表品)の付属品 一般医療機器 届出番号：27B2X00268X00148

AM-2000 LIGHT / AM-2000 / AM-5000

マイクロスコープ モニターアーム

フロアスタンドタイプのマイクロスコープ支柱にモニターを取り付けるアームです。
カラーはブラックとホワイトの2色からお選びいただけます。

ALLTION®

※写真はAM-2000です。



マイクロスコープ モニターアーム

Microscope Monitor Bracket

商品コード	カラー	入数	価格
① FC-0689	ホワイト	1個	120,000円
② FC-0690	ブラック		

●耐荷重2~10kg
※フロアスタンド/フロアマウントへの設置用です。

AM-2000 / AM-5000

マイクロスコープ シリコンカバー

マイクロスコープのシリコンカバーをご用意しています。

ALLTION®

※本体購入時に2セット付属します。



マイクロスコープ シリコンカバー

Microscope Handgrip Silicone Cover

商品コード	種類	カラー	入数	価格
FC-0699	AM-5000シリコンカバーセット(ハンドルカバーなし)	ブルー	1セット(16パーツ)	15,000円
FC-0700	AM-2000シリコンカバーセット(ハンドルカバーなし)		1セット(13パーツ)	12,000円

商品コード	種類	カラー	入数	価格
FC-0701	ストレートハンドルカバー	ブルー	1セット	3,000円
FC-0702	90度ハンドルカバー	ブラック		

オート
クレープ
OK

AM-2000 LIGHT / AM-2000 / AM-5000

マイクロスコープ 別売りハンドル

ALLTIONのすべてのマイクロスコープがお好みのハンドルに付け替え可能になりました。

ALLTION®

※ALLTIONマイクロスコープすべての機種に取り付けが可能です。
※写真はAM-5000 ホワイトです。



マイクロスコープ 別売りハンドル

Microscope Operation Handgrip

商品コード	種類	カラー	入数	価格
① FC-0703	ストレートハンドル	ホワイト	1個	15,000円
② FC-0704	90度ハンドル	ブラック		15,000円
③ FC-0705	90度ハンドル センターパーツ ホワイト	ホワイト(センターパーツ部分) ブラック(ハンドル部分)		18,000円

MICROSCOPE STOOL

好評をいただいておりますマイクロスコープスツールに新色のブラックが登場です。

ALLTION®

New

ブラック



座面調整システム

使用前に少し前傾になっている座面は、体重をかけることによって水平になります。クッションの加減については座面調整レバーによって、施術者の体重に合わせて調整いただけます。また、座面調整レバーで座面を前傾のままに維持させることも可能です。



ヘッドレスト・座面・アームレストの高さ調節が可能



マイクロスコープスツール

Microscope Stool

商品コード	カラー	入数	価格
New FC-0707	ブラック	1脚	160,000円
FC-0661	グレー		

施術姿勢時の負担軽減と無重力アームレストシステム

人間工学に基づきデザインされているので、施術中の腰・背中・首・腕への負担を軽減します。腕の長さに合わせてアームレストの位置を調節してご使用いただけます。アームレストは左右に可動しますので施術時にも自由に腕を動かす事が可能です。




スツールサイズ

適用身長：155-180cm



座面サイズ

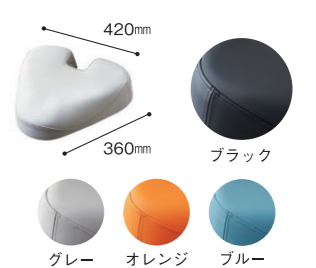

商品コード	カラー	入数	価格
FC-0659	オレンジ	1脚	160,000円
FC-0660	ブルー		

AM-2000 LIGHT / AM-2000 / AM-5000 / その他付属品

見学随時受付中!

見学受付時間 平日 10:00 ~ 17:00

お申し込み方法 TEL 06-6845-0050 (土・日・祝祭日を除く)

customer@premiumplus.jp

プレミアムプラスジャパン本社展示コーナーにて
実際にお試ください。

ご希望の日時の候補を第1候補から第3候補までお伝えください。

Light1

LIGHT1は様々な光学技術を搭載し、作業エリアにしっかりとした明るさを提供します。より見やすくすることで、作業をサポートします。


Renfert

保証：3年



動画で製品特長をご覧ください

最新の技術により、均一な配光、高い照度、鮮やかな色や表面の再現性を実現します。

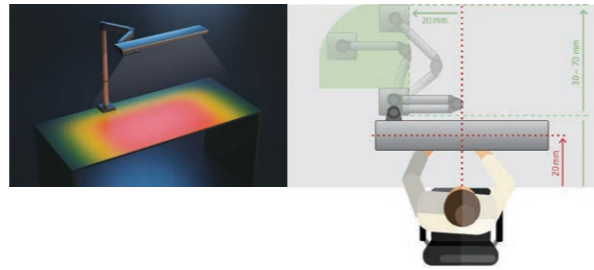

- 卓越した色再現性(CRI97、14色の拡張色合い対応)により、微細な色のニュアンスを最大限に精密でクリアに視認できます。
- 均一に同じ明るさで照らす長方形のライトが作業をサポートし目の疲労を軽減します。
- 複数のモードを搭載し状況に応じた使い分けが可能です。(シェードモード、コンボジットモードなど)
- 拡散光と指向性光をバランスよく組み合わせることで、最適な遠近感と表面テクスチャの表現を実現します。

ライト側面のスイッチ



① 電源	電源ボタン
② ホームモード	事前に設定した数値に戻ります
③ シェードモード	6000K(ケルビン)の昼光色です。カラーレンダリング(表現)に最適です
④ コンボジットモード	3,000Kのブルーライトを低減し、硬質レジン等の光硬化時間への影響を最小化します
⑤ 色温度	2,700 - 6,000Kの間で光の色温度を調整できます
⑥ 光量	光の輝度を調整できます

Light1

Light1

商品コード	種類	サイズ	入数	価格
① 25001600	テーブルトップマウント	最小寸法 W645×D235×H515mm (格納時) W660×D310×H88mm 最大寸法 W685×D660×H750mm (拡張時) W660×D515×H88mm	1台	420,000円

※標準装備はボルトによるテーブル固定型です。
※テーブルクランプ又はスタンドタイプご希望の場合はアクセサリパーツを装備ください。

Light1 アクセサリ

② テーブルクランプ



③ ランプスタンド



保証：3年

Light1 アクセサリ

Light1 accessory

商品コード	種類	入数	価格
② 25000510	テーブルクランプ	1個	30,000円
③ 25000520	ランプスタンド	1個	66,000円

MTプレミアム モデルトリマ

ワークライトとアクアストップ搭載のウェットトリマです。

Renfert

保証：3年

- 作業時に手元を明るく照らすライトを装備しています。
- オプションのオーソガイドを使用するとレーザーライト機能もご利用いただけます。
- アクアストップにより給水を中断することが可能です。
- テーブルに設けられたアングルラインにより、石膏模型の位置決めが容易です。
- 本体が10度傾いているため、模型の視認性が向上します。



製品特徴 使用方法
動画をご覧ください



セット内容

- ・MTプレミアム モデルトリマ
- ・ディスク
- ・給水ホース
- ・排水ホース



MTプレミアム モデルトリマ

MT Premium

商品コード	種類	サイズ	入数	価格
18072000	MTプレミアム クリティックスディスク付き	W305×D410 ×H330mm	1セット	330,000円
18072500	MTプレミアム マラソンディスク付き			475,000円

販売名：MT3 モデルトリマ 一般医療機器 届出番号：27B2X00268X00170

オーソガイドセット

モデルトリマ(MTプレミアム,MT3)に取り付け、矯正用のトリマとしてご使用いただけます。

Renfert

保証：3年

- 直感的に操作できるテンプレートと専用テーブルを使用して矯正用模型(平行模型)を短時間で咬合に合わせてトリミング可能です。
- ガイドライトを使用しレーザーライトで正中線の位置合わせが可能です。(MTプレミアムのみの機能です。)
- トリマに取り付ける際は工具などは不要で簡単に取り外しが可能です。




動画で製品特長をご覧ください



セット内容

- ・矯正模型テーブル
- ・テンプレート
- ・STEP-BY-STEP説明書
- ・上顎/下顎デモ用模型
- ・ガイドライト(MTプレミアムのみ)

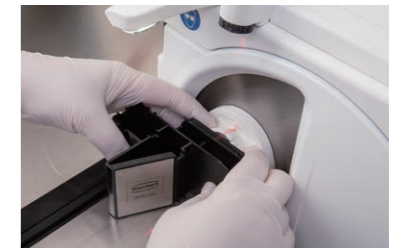

オーソガイドセット

ORTHO Guide Set

商品コード	種類	サイズ	入数	価格
18070100	MTプレミアム用	W25×D115×H42mm	1セット	140,000円
18080100	MT3用			85,000円

販売名：MT3 モデルトリマ 一般医療機器 届出番号：27B2X00268X00170

シンプロ

コンパクトな全自動義歯洗浄器で、可撤式補綴、矯正装置、スプリントのお手入れにも適しています。



- 35度に傾いたドラム式洗浄槽で、専用のクリーニングピンと洗浄液を使用し、頑固に付着した歯石やプラークを除去します。
- 簡単操作でどなたでもご使用いただける全自動義歯洗浄機です。

保証：3年

※シンプロ用ディスインフェクタブルピーカーは3年保証を除く。



シンプロとヘルペックスによるクリーニング前とクリーニング後



動画で製品特長をご覧ください

仕様

- ・回転数：1200RPM/1600RPM/2000RPM
- ・重量：3kg

セット内容

- ・シンプロ本体
- ・シンプロ用ディスインフェクタブルピーカー (洗浄槽・フタ付)
- ・プラスチックカップ (フタ付)
- ・クリーニングピン(75g) ・ピンセット
- ・マグネット ・電源ケーブル ・取扱説明書

シンプロ

SYMPRO

商品コード	サイズ	入数	価格
67001000	W140×D280×H240mm	1セット	210,000円

ヘルペックス

義歯、補綴物、矯正装置、スプリントの洗浄剤です。



- 補綴物、矯正装置、スプリントに付着した硬質および軟質の付着物、着色を簡単に効果的に除去します。
- ブラークP** プラークや歯石の除去ができるシンプロ用の洗浄剤です。クリーニングパウダーと水を混ぜて使用してください。(クリーニングピンと併用してご使用ください。) 使用後は付属の中和剤で洗浄液を中和し、簡単に廃棄することができます。

- ディスカラーF** 義歯に付着したタール、コーヒーや紅茶などの頑固なステインを落とす、すぐに使える洗浄剤(アルカリ性)です。全自動義歯洗浄器シンプロでプラークを除去した後、カップに浸漬して使用します。シンプロでは使用しないでください。



動画で製品特長をご覧ください



ブラークPを中和することで簡単に廃棄。
※廃棄の際は地域の指示に従ってください。



ヘルペックス洗浄液とシンプロ義歯洗浄ユニット

ヘルペックス

Helpex

商品コード	種類	内容量	入数	価格
67000000	ブラークP	クリーニングパウダー・20×20g 中和剤20×4.5g	1セット	15,000円
67000200	ディスカラーF	1L	1本	4,800円
18500007	プラスチック カップ蓋付き	—	1個	3,000円

シンプロ アクセサリー



(A)

シンプロの洗浄槽としてご使用いただけます。



(B)

回転する90°にカットされた薄型のスチール製クリーニングピンです。面取り加工されているため、義歯を優しく洗浄します。ピンが回転することにより、洗浄液の温度を約45℃に温め、より高い洗浄効果を発揮します。

シンプロアクセサリー

SYMPRO Helpex Accessory

商品コード	種類	入数	価格
65000450	ディスインフェクタブルピーカー	1個	9,000円
65000550	クリーニングピン	75g	13,000円

1回あたりの使用量



	ヘルペックス ブラークP	ヘルペックス ディスカラーF	クリーニングピン
	67000000	67000200	65000550
ディスインフェクタブルピーカー	クリーニングパウダー1袋 + 水200ml	—	75g
65000450			
プラスチックカップ 蓋つき	—	薬液に浸るまで	—
18500007			

イージークリーンTEC

イージークリーンTEC超音波洗浄機は、印象トレーやインスツルメントなどの歯科用器具類をパワフルかつシンプルに洗浄します。さらに、内蔵されたスイープ機能により、超音波を効果的に分散させ、洗浄効果をさらに向上させることができます。



- 超音波周波数は37 kHzで、最適な洗浄効果を得られます。「エコ」と「ダイナミック」の二つの超音波モードがあり、汚れのレベルに合わせて洗浄が可能です。
- ヒーターが内蔵されているため、洗浄効果を高め、頑固な汚れでも洗浄が容易です。
- ステンレス製タンクは耐キャビテーション性に優れ、長期間使用可能です。

保証：3年



仕様

- ・本体重量：3.3kg
- ・洗浄槽容量：2.7L
- ・洗浄槽サイズ：W240×D137×H100mm

セット内容

- ・本体1台
- ・プラスチックカバー
- ・ステンレスバスケット

イージークリーンTEC

Easyclean

商品コード	サイズ	入数	価格
18522000	W305×D190×H230mm	1台	158,000円

販売名：イージークリーン TEC 一般医療機器 届出番号：27B2X00268X00183

イージークリーンTEC アクセサリー



様々な器具類の洗浄に適しており、従来の石膏やアルジネート溶解剤に比べ、短時間で素早く徹底的に洗浄可能です。しつこい残留物などを洗浄槽で効率的に除去し、超音波装置でさらに素早く除去します。



動画で製品特長をご覧ください



保証：3年

ステンレス製タンクでの使用に適さない酸や液体に使用可能です。



保証：3年

洗浄用ビーカーまたはフタ付きプラスチックカップ用カバーです。



保証：3年

小さなものやデリケートなものの洗浄に使用できます。ステンレスカバーまたは洗浄用ビーカーと併用可能です。



保証：3年

追加洗浄液用(600ml)です。ステンレスカバーに使用できます。



保証：3年

小さな物の洗浄や酸を扱う作業に最適です。ステンレスカバーとの併用も可能です。シンプロ使用後のディスクカラー F 浸漬時にご使用いただけます。

イージークリーンTEC アクセサリー

Easyclean Accessory

商品コード	種類	入数	価格
20120000	器具洗浄液 GO 2011 speed 2L(石膏・アルジネート溶解剤)	1本	11,000円
18500002	ステンレスカバー	1枚	15,000円
18500004	ディッピングバスケット	1個	16,000円

商品コード	種類	入数	価格
18500005	耐酸性容器		20,000円
18500006	ビーカー 600ml	1個	8,400円
18500007	プラスチックカップ 蓋つき		3,000円

ベーシッククラシック

省スペース型のベーシックなサンドブラスターです。



保証：3年

- 特殊なミキシングチャンバー技術(venturi方式)により、コストパフォーマンスに優れています。
- LED照明で明るく、大きな作業スペース(14L)となっています。
- フットペダルでも操作が可能です。



ベーシッククラシック

Basic Classic

商品コード	タンク	サイズ	入数	価格
29474025	25~70 μm 1個 70~250 μm 1個	W355×D415×H270mm	1台	270,000円

ベーシックモバイル

Renfertのブラスト技術が集約された操作しやすい卓上型サンドブラスターです。



保証：3年

- 電源不要でコンプレッサーへの接続だけで、お使いいただけます。
- 空気圧式フットスイッチで操作が可能です。
- 1~6barのブラスト圧力、マノメーターによる圧力表示。



ベーシックモバイル

Basic Mobil

商品コード	タンク	サイズ	入数	価格
29143050	25~70 μm	W220×D130×H260mm	1台	140,000円
29143250	70~250 μm			

ボルテックスコンパクト

サンドブラスターやモデルトリマなどと連動してご使用いただける技工用集塵機です。集塵パワーの調整が可能で、キャスター付きのため移動も簡単です。



保証：3年

- 高性能なダブルフィルターシステム採用。
- フリーフィルターシステムのボタンを押せば、フィルターの容量が25%向上。
- 大容量で高強度のダストバッグ(15L)の採用で、集めたダストを捨てる時も汚れません。



ボルテックスコンパクト

Vortex Compact

商品コード	サイズ	入数	価格
29246000	W385×D480×H600mm	1台	190,000円

ボルテックスコンパクト アクセサリー

Vortex Compact Dust bag

商品コード	種類	入数	価格
29245003	ダストバッグ	5枚	16,000円

セット内容

- ・ボルテックスコンパクト1台
- ・ダストバッグ1枚
- ・集塵用ホース


ミロプロ

コンパクトなセンタートリマは、パワフルでメンテナンスフリーのモーター、高さ調節可能なカッターに加え、集塵機との接続が可能です。

Renfert

保証：3年

- バーの高さが調整可能でより安全に作業いただけます。
- コンパクトな設計で省スペース、移動も容易です。
- 付属のツールでカッター交換が簡単に行えます。
- 安定した基底面により傾くことなく作業できます。
- 集塵機に直接接続し連動させることが可能です。

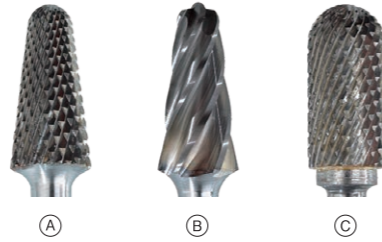

ミロプロ

Millo Pro

商品コード	サイズ	入数	価格
18051000	W214×D252×H207mm	本体1台、カーバイドバー(シングルカット6°)1本	270,000円

ミロプロ カーバイドバー

Millo Pro Cutter

商品コード	種類	入数	価格
① 18060001	カーバイドバー クロスカット6°		
② 18060002	カーバイドバー シングルカット6°	1本	30,000円
③ 18060003	カーバイドバー クロスカット0°		

トップスピン

トップスピンドリルは、さらなる精度、安全性、耐久性を実現するダウエルピン植立用穿孔器です。高い精度と特殊なドリル技術が特徴です。

Renfert

保証：3年

- 人間工学に基づいたテーブルデザインで作業中の体への負担を減らします。
- ドリル深さを0～20mmの範囲で無段階に設定できるため、樹脂プレートを使用したピンシステムの穴あけも可能です。
- 特殊なドリル形状により、穴あけ時の力を最大50%低減します。
- 高度なシャフトベアリング技術により軸ブレが少なく安定した作業を実現します。
- 8,000rpmと高い回転数です。



特殊なドリル形状によりドリリング時の力を50%以上低減し、歯列弓を破損するリスクを低減します。

トップスピン

Top Spin

商品コード	サイズ	入数	価格
18401000	W153×D175×H330mm	本体1台、ドリル1本	270,000円

パワーピロー

パワーピローは、スムーズな動きで補綴物を優しく、素早く、簡単に掘り出せるエアーカッターです。

Renfert

保証：3年

- 傷つきやすい補綴物(キャストリング、義歯)もパワフル且つ優しく掘り出すことができます。
- 手に伝わる振動を最小限に抑えることで、より快適な作業を提供します。
- 人工学に基づいたグリップの形状は高い操作性を発揮します。
- オイルフリーなため、メンテナンスも簡単です。



別売りチップ

仕様

- ・作業圧：1～6気圧
- ・コンプレッサー圧：4～6気圧
- ・エアー消費量：10L/min
- ・ホース長さ：2m
- ・エアー接続：φ8mm、φ10mm
- ・重量：398g

パワーピロー

Power Pilo

商品コード	種類	サイズ	入数	価格
50225000	-	本体サイズφ29×168mm	本体1台、チップ1本	115,000円
50220200	別売りチップ	-	1本	15,000円

トップスピンドリルビット

トップスピんに装着可能なドリルビットです。

Renfert



トップスピンドリルビット

Drill Bit

商品コード	種類	ヘッド長	先端直径	シャンク直径	入数	価格
① 3470000	バイスピンドリルビット	6.5mm	φ2.0mm	φ2.35mm	3本	23,000円
② 3670159	スマートM	10.5mm	φ1.57mm	φ3.00mm		15,000円

商品コード	種類	ヘッド長	先端直径	シャンク直径	入数	価格
③ 50100198	ステップS		φ1.98mm			
④ 50100200	ステップM	5.8mm	φ2.0mm	φ3.00mm	3本	26,000円
⑤ 50100202	ステップL		φ2.02mm			

バリオE

ワックスの粘度をクリーム状から流動状まで個別に設定できるワックスポットです。

Renfert

保証：3年

- ワックスポットごとに45℃～110℃まで温度の調節が可能です。
- 実測温度と設定温度はLEDディスプレイで表示されます。
- 予備加熱機能により30%時間を短縮できます。
- 深めのワックスポットなのでディッピング作業も容易です。
- 選択した設定温度に達するとLEDライトが赤から緑に変わります。



バリオE

Vario E

商品コード	サイズ	入数	価格
14521000	W178×D120×H54mm	1台	95,000円

ホッティ LED

LEDディスプレイとキーパッドにより、ディッピングワックスの加熱温度を均一にするワックスディッピングポットです。

Renfert

保証：3年

- 60～110℃に温度設定が可能でディッピングワックスに最適です。
- ワックスポットは1度単位で温度を設定可能です。
- 実測温度と設定温度がLEDディスプレイで表示されます。
- スピーディーに安定した加熱で作業時間を短縮。



ポットサイズ
直径35mm・深さ28mm



ホッティ LED

Hotty LED

商品コード	サイズ	入数	価格
14611000	W90×D98×H65mm	1台	53,000円

セーフティーバーナーエコ


セーフティーバーナーエコはプロパンガス及び都市ガス用の単管式セーフティーバーナーです。

Renfert

保証：3年

- センサー機能により、炎が消えると、ガス供給が自動的に遮断され、高い安全性を確保します。
- 簡単に取り外し可能なコレクタートレイで素早くお手入れができ、ワックスの汚れを防止します。
- DIN 30665-1に基づくDVGW型式検査証明書により、品質と安全性がテスト済みです。

※プロパンガス用センサーバーナーは、必ず固定設定(50mbar)の減圧器を使用してください。

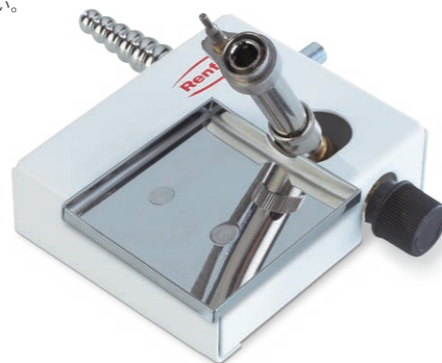

セーフティーバーナーエコ

Safety Burner Eco

商品コード	種類	サイズ	入数	価格
9340100	プロパンガス用	W141×D121×H102mm	1台	34,000円
9350100	都市ガス用			

ワックスレクトリックライト2

2つのハンドピースを同時に操作できるワックスレクトリックライト2はダイヤル式で温度調節が可能な電気ワックスペンです。効率的なワックスアップテクニックにお使いください。

Renfert

保証：3年

- 50℃から200℃まで温度設定できます。
- チップ内にヒーターがあるため、スピーディーな加熱が可能です。また、コルクの断熱性により持ち手部分が熱くなりません。
- ワックスのオーバーヒートなどを防ぐことでワックスパターンの収縮を抑制します。
- 各ハンドピースごとに個別に温度調節可能です。



ワックスレクトリックライト2

Waxelectric Light II

商品コード	サイズ	入数	価格
21511000	W91×D80×H53mm	本体1台、ハンドピース2本、チップ2本(スモール、ラージ)	59,000円

販売名：ワックスレクトリック 一般医療機器 届出番号：27B2X00268X00168

ワックスレクトリックライト用ホルダーセット。最大6つのカービング用チップにクイックアクセスできます。ハンドピースを清潔に収納し、取り外しが可能で、スチーム洗浄に対応した個々のパーツを簡単にクリーニングできます。

保証：3年



ワックスレクトリック アクセサリー


Waxelectric Accessory

商品コード	種類	価格
21511500	ホルダーセット (ワックスレクトリックライト用)	11,000円

ワックスレクトリックチップ

ワックスレクトリックシリーズにご使用いただけます。

Renfert

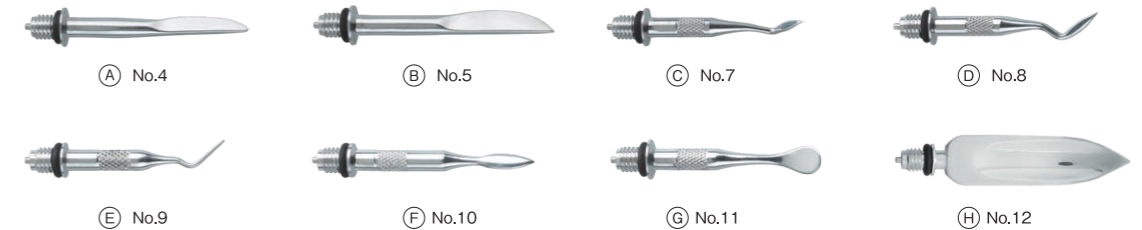

ワックスレクトリックチップ

Waxelectric Tip

商品コード	種類	入数	価格
(A) 21550104	No.4	1本	9,000円
(B) 21550105	No.5		
(C) 21550107	No.7		
(D) 21550108	No.8		

商品コード	種類	入数	価格
(E) 21550109	No.9	1本	9,500円
(F) 21550110	No.10		
(G) 21550111	No.11		
(H) 21550112	No.12		

販売名：ワックスレクトリック 一般医療機器 届出番号：27B2X00268X00168

GEO クラシック ベーシックセット

GEOクラシックワックスを各20gにしてアソートセットにしました。



セット内容 (各20g各1個入り)

- Ⓐ GEOクラシック ミントトランスベアレント
- Ⓑ GEOホワイトワックス オペーク
- Ⓒ GEOクラシックナチュラル デンチンオペーク
- Ⓓ GEO スペシャルワックスミリングワックス ブルーオーク
- Ⓔ GEO アバンギャルド グレーオペーク
- Ⓕ GEO クラシックサービカル/アンダーカットワックスレッドトランスベアレント



GEO クラシック ベーシックセット

商品コード	入数	価格
4930004	1セット	6,000円

販売名: GEO クラシック 一般医療機器 届出番号: 27B2X00268X00191

GEO クラシック


ブンゼンバーナー用のモデリングワックスです。



オペーク 溶けやすく、すぐに固まる性質を持ち、適度に粘りと硬さがあるため操作性に優れたワックスです。

トランスベアレント オールセラミック用で、特にプレスセラミックに適しています。酸化チタンフリーで残渣を残さないオーガニックワックスです。

融解温度: 64℃~75℃

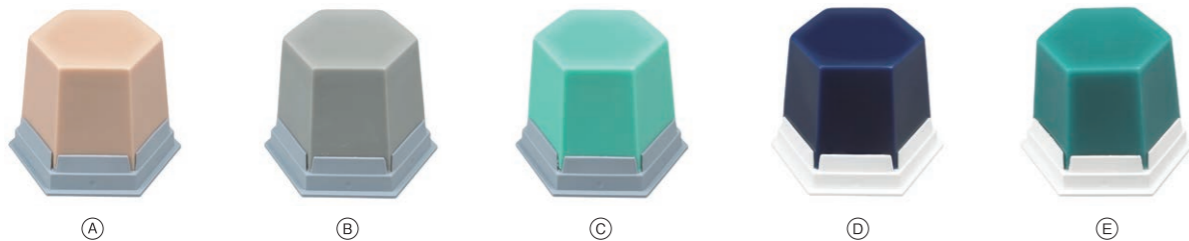

GEO クラシック

商品コード	種類	内容量	硬さ	入数	価格
Ⓐ 4970100	ベージュオペーク				
Ⓑ 4970200	グレーオペーク				
Ⓒ 4970300	ミントオペーク	75g	ハード	1個	3,300円
Ⓓ 4971200	ブルートランスベアレント				
Ⓔ 4971300	ミントトランスベアレント				


販売名: GEO クラシック 一般医療機器 届出番号: 27B2X00268X00191

GEO アバンギャルド

電気ワックスペン用のモデリングワックスです。
適度な流動性があり、広範囲のワックスアップ作業に適しています。



融解温度: 60℃~62℃

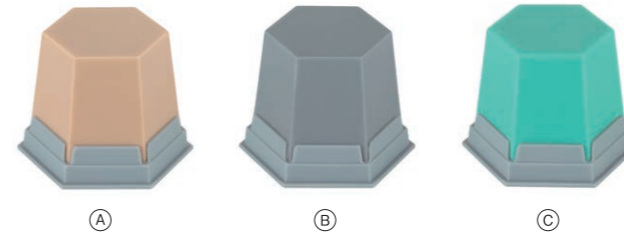

GEO アバンギャルド

商品コード	種類	内容量	硬さ	入数	価格
Ⓐ 4950100	ユニバーサル ベージュオペーク				
Ⓑ 4950200	ユニバーサル グレーオペーク	75g	ミディアム ハード	1個	3,000円
Ⓒ 4950300	ユニバーサル ミントオペーク				

販売名: GEO クラシック 一般医療機器 届出番号: 27B2X00268X00191

GEO スペシャルワックスブロックアウト

ブロックアウト用のワックスです。石膏模型のアンダーカット、気泡などのブロックアウトにも適しています。



- 湿った模型にも非常に高い接着性を発揮します。
 - 高融点のため、寒天印象材の温度の影響を受けません。
- 融解温度: 78℃~85℃



GEO スペシャルワックス ブロックアウト

商品コード	種類	内容量	入数	価格
6500000	ピンク オペーク	75g	1個	4,000円

販売名: GEO クラシック 一般医療機器 届出番号: 27B2X00268X00191

GEO スペシャルワックスサービカルワックス

酸化チタンフリーで残渣を残さないオーガニックワックスです。



融解温度: 59℃~67℃



GEO スペシャルワックスサービカルワックス

商品コード	種類	内容量	硬さ	入数	価格
4861000	レッド トランスベアレント	75g	ハード	1個	3,800円


販売名: GEO クラシック 一般医療機器 届出番号: 27B2X00268X00191

GEO スペシャルワックスミリングワックス

ミリング専用ワックスです。



融解温度: 65℃~67℃

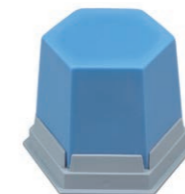

GEO スペシャルワックスミリングワックス

商品コード	種類	内容量	硬さ	入数	価格
4851000	ブルー オペーク	75g	ハード	1個	3,800円


販売名: GEO クラシック 一般医療機器 届出番号: 27B2X00268X00191

GEO スペシャルワックススティッキーワックス

義歯のパーツを固定したり、修理や蝋着作業を準備するための仮着固定用のワックスです。



- あらゆる歯科材料に対して適切な粘着性能を保ち固定でき、ワックススプルーやプレハブワックスパターンの固定や位置決めに適しています。
- 融解温度: 85℃~91℃

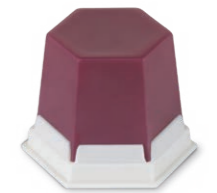

GEO スペシャルワックススティッキーワックス

商品コード	種類	内容量	入数	価格
4881000	ピンク トランスベアレント	75g	1個	4,000円

販売名: GEO クラシック 一般医療機器 届出番号: 27B2X00268X00191

GEO モデリングワックス

ワックスアップ用モデリングワックスです。



スタンダードワックス 透明性があり外形線が見やすいのでシートワックスやリテンションワックスにマッチします。


ハードオベークワックス 輪郭の細部をより表現しやすい硬さなので操作が容易です。

融解温度：スタンダードトランスベアレント67℃～69℃
ハードオベーク70℃～72℃

GEO モデリングワックス

商品コード	種類	内容量	入数	価格
(A) 6490000	スタンダード トランスベアレント	75g	1個	4,000円
(B) 6491000	ハード オベーク			

販売名：GEO クラシック 一般医療機器 届出番号：27B2X00268X00191

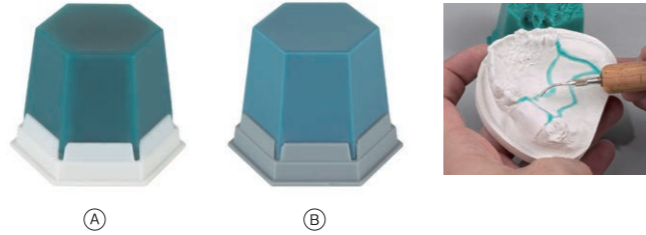

GEO ホワイトワックス



オベーク 遮蔽効果が高く、メタルコアやメタルフレーム上でも金属色が出にくい色調です。患者さんへの説明用プランニングワックスアップに適しています。

トランスベアレント 残渣を残さず焼却することができるのでプレスセラミックに適しています。

融解温度：73℃～75℃

GEO ホワイトワックス

商品コード	種類	内容量	硬さ	入数	価格
(A) 4990101	オベーク	75g	ミディアム	1個	3,700円
(B) 4990201	トランスベアレント		ハード		

販売名：GEO クラシック 一般医療機器 届出番号：27B2X00268X00191



GEO クラシックナチュラル

オールセラミック用で特にプレスセラミックに適したモデリングワックスです。



●酸化チタンフリーで残渣を残さないオーガニックワックスです。

融解温度：64℃～75℃

GEO クラシックナチュラル

商品コード	種類	内容量	硬さ	入数	価格
4990400	デンチントランスベアレント	75g	ハード	1個	3,800円

販売名：GEO クラシック 一般医療機器 届出番号：27B2X00268X00191



GEO ナチュラル

審美的なワックスアップを作成するための硬質なモデリングワックスです。
流動性とモデリング特性に優れています。



●人工歯のシェードと同等のA2のシェードを使用しています。患者さんへの説明用プランニングワックスアップに適しています。

融解温度：64℃～75℃

GEO ナチュラル

商品コード	種類	内容量	硬さ	入数	価格
4990300	デンチンオベーク	75g	ハード	1個	3,700円

販売名：GEO クラシック 一般医療機器 届出番号：27B2X00268X00191



GEO クローワックス

クラウン&ブリッジテクニックや耐火模型に使用できる便利な缶入りのワックスです。収縮率が低く、高い精度と正確性があり、材料特性の調整により、優れた造形と彫刻の実現が可能です。



●ブンゼンバーナーと電気ワックスペンにご使用いただけます。

融解温度：70℃～73℃ (サービカルワックスのみ62℃～64℃)



GEO クローワックス

商品コード	種類	内容量	硬さ	入数	価格
(A) 4750100	グリーン トランスベアレント				
(B) 4750200	ブルー トランスベアレント	80g	ミディアム	1個	2,900円
(C) 4750300	レッドトランスベアレント		ハード		
(D) 4750400	ベージュ オベーク				

商品コード	種類	内容量	硬さ	入数	価格
(E) 4750500	グレー オベーク		ミディアムハード		
(F) 4750600	サービカルワックスレッド トランスベアレント	80g	ソフト/ ミディアムハード	1個	2,900円

販売名：GEO クローワックス 一般医療機器 届出番号：27B2X00268X00177

GEO ディッピングワックス

あらゆるクラウン&ブリッジに使用できる、収縮の少ないソフトなディッピングワックスです。



●弾性があり裂けにくいワックスコーピングのため、支台歯から外す時にも作業が容易です。

●残渣を残さないオーガニックワックスなので、プレスセラミックに最適です。

●90℃～92℃でご使用いただくと厚さ0.5mmのコーピングが得られます。

GEO ディッピングワックス

商品コード	種類	内容量	入数	価格
4823000	イエロー	200g	1個	7,000円
4823300	グリーン			

販売名：GEO ディッピングワックス 一般医療機器 届出番号：27B2X00268X00176



イソフィックス2000

作業模型製作時に使用する石膏分離剤です。



●石膏表面に浸透し、被膜を作らずに分離効果を発揮します。

●理想的な分離特性を持ちシーリング可能です。

イソフィックス2000

商品コード	内容量	入数	価格
17202000	1L	2本	17,000円



GEO エキスパートファンクショナルワックス


D.シュルツのNAT(ナチュラルワックスアップテクニック)に従ったファンクショナルワックスアップ用の高品質モデリングワックスです。



- フローと造形特性の調整により、色分けされた咬合面を最適にポジショニング可能です。
- ワックスレトリックシリーズやバーナーを使用したワックスアップに適しています。

A セット内容

- ・クリアカバー、取扱説明書付きのワックスプレゼンテーションパレット
- ・GEO エキスパートファンクショナルワックス：グレー、ブルー、グリーン、イエロー各40g
- ・GEO エキスパートファンクショナルワックス：レッド、オレンジ各4g×4
- ・オクルーザルコンパス A5シート2枚(各シート24ラベル付)

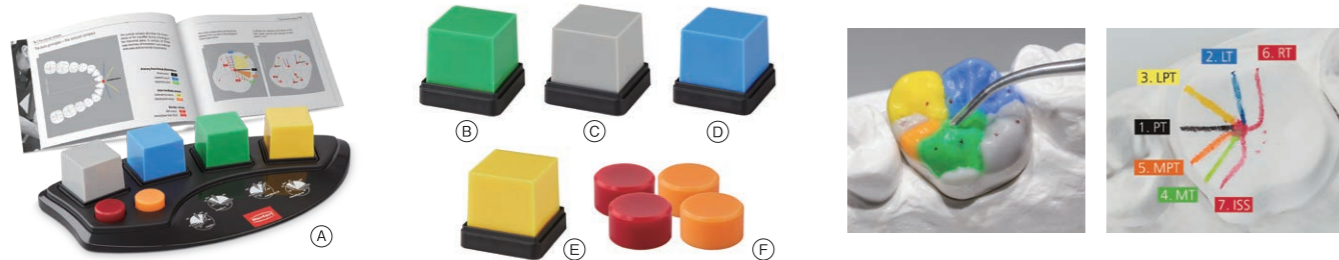

GEO エキスパートファンクショナルワックス

GEO Expert Functional Wax

商品コード	種類	内容量	入数	価格
(A) 6340901	セット	セット内容参照	1セット	22,000円
(B) 6340910	グリーン	40g	1個	5,000円
(C) 6340940	グレー	40g	1個	5,000円

商品コード	種類	内容量	入数	価格
(D) 6340920	ブルー	40g	1個	5,000円
(E) 6340930	イエロー	40g	1個	5,000円
(F) 6340960	リフィルレッド/オレンジ	各4g	4個	2,500円


販売名：GEO エキスパートファンクショナルワックス 一般医療機器 届出番号：27B2X00268X00180

GEO クラスプワックス

圧接による形態安定性が高いクラスプワックスで、作業中の変形も防止します。



- 気泡や段差の無い滑沢な表面です。
- すべてのワックスパターンは残渣なく焼却できます。

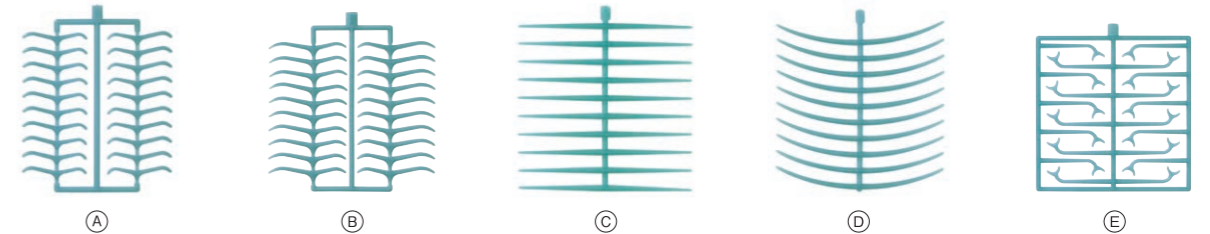

GEO クラスプワックス 接着剤付き

GEO Clasps Wax

商品コード	種類	入数	価格
(A) 6383002	小臼歯用クラスプ		
(B) 6383003	大臼歯用クラスプ		
(C) 6383004	リングクラスプストレート	10枚	3,600円
(D) 6383005	リングクラスプ		
(E) 6383010	ローチクラスプ		

販売名：GEO クラスプワックス 一般医療機器 届出番号：27B2X00268X00175

GEO クラスプワックス

GEO Clasps Wax

商品コード	種類	入数	価格
(A) 6883002	小臼歯用クラスプ		
(B) 6883003	大臼歯用クラスプ		
(C) 6883004	リングクラスプストレート	10枚	3,300円
(D) 6883005	リングクラスプ		
(E) 6883010	ローチクラスプ		

販売名：GEO クラスプワックス 一般医療機器 届出番号：27B2X00268X00175

GEO ワックスワイヤー

特殊なワックス配合により変形しづらいワックスワイヤーです。ミディアムハードとハードの2種類からお選びいただけます。



GEO ワックスワイヤー ターコイズハード

GEO Wax Wire Hard

商品コード	種類	内容量	入数	価格
6762020	2.0mm	250g	1個	3,000円
6762025	2.5mm			
6762030	3.0mm			
6762035	3.5mm			
6762040	4.0mm			
6762050	5.0mm			

販売名：GEO ワックスワイヤー 一般医療機器 届出番号：27B2X00268X00174

GEO ワックスワイヤー ブルー ミディアムハード

GEO Wax Wire Medium Hard

商品コード	種類	内容量	入数	価格
6783020	2.0mm	250g	1個	3,000円
6783025	2.5mm			
6783030	3.0mm			
6783035	3.5mm			
6783040	4.0mm			
6783050	5.0mm			

販売名：GEO ワックスワイヤー 一般医療機器 届出番号：27B2X00268X00174

GEO プレートワックス

ターコイズブルーの半透明なシートワックスは高品質のワックスによりストレスのない圧接が可能です。接着剤付きのシートワックスはアンダーカットに適しています。



(A) 無地 シートサイズ：75×150mm
 (B) 細地 シートサイズ：75×150mm
 (C) 中粗 シートサイズ：75×150mm
 (D) 粗地 シートサイズ：100×100mm 接着剤付き

GEO プレートワックス

GEO Casting Wax


商品コード	種類	厚さ	入数	価格
(A) 6403040	シートワックス	0.40mm	15枚	3,300円
6403050		0.50mm		
(B) 6413040	ステップルファイン	0.40mm	15枚	3,300円
6413050		0.50mm		

商品コード	種類	厚さ	入数	価格
(C) 6433040	ステップルコース	0.40mm	15枚	3,300円
6433050		0.50mm		
(D) 4453005	キャストリングワックス	0.50mm	32枚	13,000円
4453006		0.60mm		


販売名：GEO プレートワックス 一般医療機器 届出番号：27B2X00268X00173

GEO リテンションワックス


すべてのワックスパターンは残渣なく焼却できます。テンションフリーで使いやすいリテンションワックスです。安定性が高いため、形状や構造が変化しません。

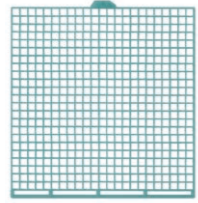


① シートサイズ：70×70mm
プレート厚さ：0.75mm

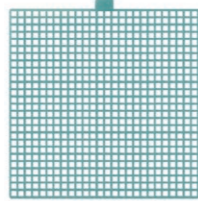


② シートサイズ：70×70mm
プレート厚さ：0.7mm

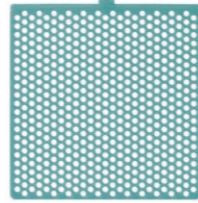

③ シートサイズ：70×70mm
プレート厚さ：0.8mm

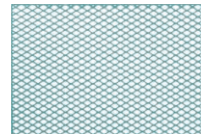

④ シートサイズ：70×70mm
プレート厚さ：0.95mm

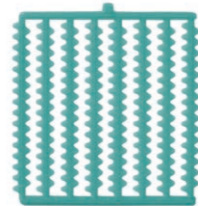

⑤ シートサイズ：70×70mm
プレート厚さ：1.3mm



⑥ サイズ：長さ135mm
厚さ：1.3mm



⑦ サイズ：長さ130mm
厚さ：1.3mm

GEO リテンションワックス 接着剤付き

商品コード	種類	入数	価格
① 6383007	グリッド粗目	20枚	6,300円
② 6383008	グリッドファイン		
③ 6383009	グリッドメッシュ		
④ 6383011	グリッド対角線状	10枚	3,700円
⑤ 6383006	下顎用リテンション		

販売名：GEO リテンションワックス 一般医療機器 届出番号：27B2X00268X00172

GEO リテンションワックス

商品コード	種類	入数	価格
① 6883007	グリッド粗目	20枚	4,700円
② 6883008	グリッドファイン		
③ 6883009	グリッドメッシュ		
④ 6883011	グリッド対角線状	10枚	3,200円
⑤ 6883006	下顎用リテンション		

販売名：GEO リテンションワックス 一般医療機器 届出番号：27B2X00268X00172

GEO リテンションワックス ホールリテンション

商品コード	種類	入数	価格
① 6643000	ホールリテンション ストレート	40個	5,200円
② 6623000	ホールリテンション		

販売名：GEO リテンションワックス 一般医療機器 届出番号：27B2X00268X00172

GEO バーワックス リンガルバー

リンガルバー成形用プロファイルです。



- 高い形態安定性のため作業中の変形を防止します。
 - 圧接も簡単です。
- 形状：半洋ナン状



GEO バーワックス リンガルバー

商品コード	サイズ	硬さ	内容量	価格
6673042	4×2mm	ミディアム	65g	2,900円

販売名：GEO バーワックス リンガルバー 一般医療機器 届出番号：27B2X00268X00178

GEO ワックススプルー

金属の流れを考慮した形状です。



GEO ワックススプルー

商品コード	入数	価格
5011100	200個	5,300円

販売名：GEO ワックススプルー 一般医療機器 届出番号：27B2X00268X00179



スマートピン

金属スリーブへの挿入に最適な、細くて短いモデルピンです。




スマートピン

商品コード	種類	入数	価格
① 3662000	スマートピン	1,000本	11,000円
② 3662100	スマートピン スリーブ		

- 極細ピンとスリーブのコンビネーションを実現しました。ピンのヘッド部分がφ1.6mmと細い形態です。
- 下顎前歯等の狭いスペースにご使用いただけます。
- 低いモデルベース用のピンにより、石膏を節約して使用することができます。
- スプリットキャストに適しています。

仕様

- ・ヘッド：φ1.6mm
- ・ヘッド長：5.5mm
- ・ピン長：12.5mm

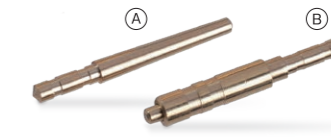

ダイネックスブリリアント グラインディングディスク

ガラス繊維強化ダイヤモンドの研削用ディスクは、セラミック材料の加工とトリミングのために作られ、特にニケイ酸リチウムに適しています。また、発熱が少なくジルコニアの形態修正にも適しています。





ダイネックスブリリアント グラインディングディスク

商品コード	サイズ	入数	価格
560820	直径：φ20mm 厚さ：0.8mm	1枚	4,500円

販売名：ダイネックスブリリアント 一般医療機器 届出番号：27B2X00268X00167

- 振動と熱衝撃が小さく、材料へのダメージが少ないです。
 - 非常に高い研削能力により、プレス後のスプルーをより安全にトリミングできます。
- 最大回転数：50,000 rpm

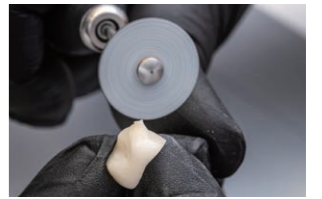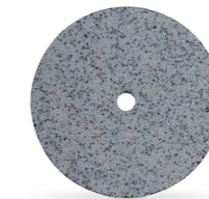

研磨ペースト




研磨ペースト

商品コード	種類	内容量	入数	価格
① 5131000	ユニバーサルポリッシングペースト	200g	6個	12,000円

- ① 義歯などのアクリルレジンと鏡面仕上げ用硬質研磨ペーストです。安定した細かな粒子サイズで、長くご使用いただけます。



- ② 貴金属、コバルトクロム用ルージュ、金属用研磨ペーストです。ポリソフトを使用した粗研磨とバイソングラスで理想的な仕上がりになります。

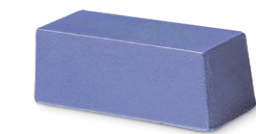

商品コード	種類	内容量	入数	価格
② 5150000	サファイア	50g	1個	5,300円

販売名：研磨ペースト 一般医療機器 届出番号：27B2X00268X00190

レンフェルト オールインワン ポリッシング スターターキット

レンフェルトの100周年を記念し人気のレンフェルトポリッシュとブラシをセットにしました。ダイヤモンド粒子入り研磨ペーストと様々なブラシをお試しいただけます。



セット内容

- Ⓐ レンフェルト ポリッシュ オールインワン18g ×1
- Ⓑ シリコンポリッシャー ×1
- Ⓒ バイソンブラシ ×2
- Ⓓ ゴートヘアブラシ ×1
- Ⓔ コットンバフ ×1



レンフェルト オールインワン ポリッシング スターターキット

Renfert All-In-One Starter Kit

商品コード	入数	価格
5100103	1セット	19,000円

販売名: レンフェルト オールインワン ポリッシング スターターキット 一般医療機器 届出番号: 27B2X00268X00184



レンフェルトポリッシュ

ダイヤモンド粒子入り研磨ペーストです。ポーセレン、ジルコニア、プレスセラミックス、硬質レジンなどにご使用いただけます。



- 幅広い材料の研磨に対応するオールインワン及び、ジルコニア用、プレスセラミックス用、ハイブリッドセラミック用の4種類をご用意いたしました。
- ブラシ研磨時に補綴物表面がくもらず、綺麗な表面に仕上げます。
- 特に咬合面の届きにくい深い溝も、短時間で研磨できます。
- 少量で簡単に素早く研磨が可能です。



動画で製品特長をご覧ください



レンフェルトポリッシュ

Renfert Polish

商品コード	種類	内容量	入数	価格
Ⓐ 5103000	ハイブリッド	14ml	1個	7,500円
Ⓑ 5100100	オールインワン			
Ⓒ 5101100	ジルコニア			
Ⓓ 5102100	プレスセラミックス			

販売名: レンフェルトポリッシュ 一般医療機器 届出番号: 27B2X00268X00181



オパール L

硬質レジン研磨用ペーストです。



- 光重合材料の研磨に最適で、形態を変化させずに表面を素早く滑沢にします。
- ロビンソンブラシやバフホイール等につけて使用します。



オパール L

Opal L

商品コード	内容量	入数	価格
5200001	35g	1個	2,600円

販売名: オパール L 一般医療機器 届出番号: 27B2X00268X00182

コットンバフ

金属・レジン・陶材の最終仕上げ研磨に適したバフです。



- 研磨ペーストをしっかり吸収します。
- 優れた耐久性を有しています。



コットンバフ

Cotton Buff

商品コード	サイズ	入数	価格
2051000	φ22mm	12本	6,600円

販売名: コットンバフ 一般医療機器 届出番号: 27B2X00268X00186

コバルトクロームポリッシングブラシ

ポリッシングペーストを使ったクロム・コバルトフレームの研磨に適しています。



- ブラシ幅が狭く、どの部分にも簡単に毛先が届きます。
- 強力で短いブラシ(10mm)で、耐久性に優れています。



コバルトクロームポリッシングブラシ

Special Brush

商品コード	サイズ	入数	価格
1991000	φ65mm	12枚	8,500円

販売名: コバルトクロームポリッシングブラシ 一般医療機器 届出番号: 27B2X00268X00187

シリコンポリッシャー

セラミックや金属の中仕上げ用のポリッシャーです。



- セラミック表面に汚れが付着しにくい仕様です。
- メタルとポーセレンの境目の使用に最適です。

最大回転数: 15,000rpm



シリコンポリッシャー

Silicone Polishers

商品コード	サイズ	入数	価格
860000	直径:φ22mm 厚さ:3.2mm	100枚	17,000円

販売名: シリコンポリッシャー 一般医療機器 届出番号: 27B2X00268X00185


バイソンブラシ

陶材、金属、レジンなど補綴物全般の仕上げ研磨にお使いいただけるハンドピース用の研磨ブラシです。



- 独自のブラシ配合により、合金、ポーセレン、アクリルをバフワルかつ素早く高光沢に磨き上げることが可能です。
- 密度の高い植毛で、耐久性に優れ、研磨剤の乗りも良く、歯間や咬合面の研磨に適しています。

最大回転数: 15,000rpm

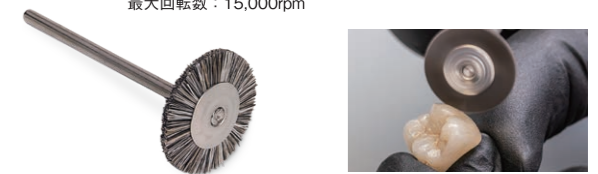

バイソンブラシ

Bison Brush

商品コード	サイズ	入数	価格
7661000	φ18mm	25本	8,200円

販売名: バイソンブラシ 一般医療機器 届出番号: 27B2X00268X00189


ゴートヘアブラシ

プレシャスメタルやレジンの表面研磨用のブラシです。



- 研磨ペーストの乗りが良く、研磨性に優れています。

最大回転数: 15,000rpm

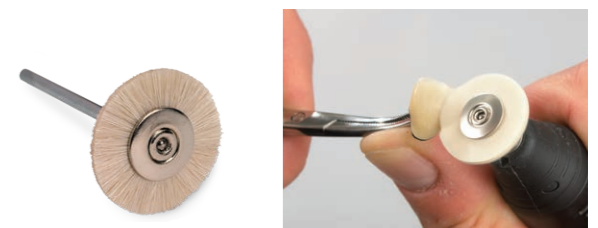

ゴートヘアブラシ

Goat Hair Brush

商品コード	サイズ	入数	価格
2040000	φ19mm	12本	4,700円

販売名: ゴートヘアブラシ 一般医療機器 届出番号: 27B2X00268X00188

ピコセップ

石膏とワックス、陶材を分離させる薄いシリコンベースの分離剤です。



ピコセップ

Picosep

商品コード	内容量	入数	価格
15520030	30ml	1本	2,600円

イソスティック

両サイド使える実用的なペンタイプのポーセレン及びワックス用分離剤です。



- あらかじめ模型に塗布することで築盛したポーセレンを簡単に模型から分離できます。
- 先端はソフトとハードの2種類となっており、用途に合わせてご使用ください。



イソスティック

Iso Stick

商品コード	内容量	入数	価格
17093000	4.5ml	1本	5,800円

レイアート トロピックプロ

均質で拡散性のある透水性セラミックトレイを使用した技工用パレットです。



- 特殊セラミックの湿潤作用によりパレット表面全体に水分がいきわたり、理想的な水分量を維持します。
- 表面を滑沢に仕上げているので、ブラシに優しい仕様です。
- 傾斜面を利用することによりパウダーの水分量を調節出来るようになっています。



レイアート トロピックプロ

Lay Art Tropic Pro

商品コード	種類	サイズ	入数	価格
10450000	XL	ケース：W291×D223×H36mm トレイ：W220×H120mm	1個	34,000円
10451000	S	ケース：W211×D147×H28mm トレイ：W159×H90mm	1個	22,000円

レイアート トロピック

毛細管現象により陶材が表面全体に均質に湿らされ、トレイにはさらに2つのグレース加工されたウェルを備えた技工用パレットです。



- トレー材の毛細管現象により、陶材は最適な湿潤状態を保ちます。
- ステインとミキシングリキッド用にグレース加工されたウェルも備えて実用的です。



レイアート トロピック

Lay Art Tropic

商品コード	種類	サイズ	入数	価格
10440000	XL	ケース：W291×D223×H36mm トレイ：W220×H120mm	1個	34,000円
10441000	S	ケース：W211×D147×H28mm トレイ：W159×H90mm	1個	22,000円

レイアート ナチュラル

天然のメノウ石から作られた特別なミキシングトレイを採用。



- 非常に高い材料の硬度と、滑沢に磨かれた表面により筆先を保護します。
- トレーの一つ一つが手作りで同じデザインが2つとない高級潤滑れる技工用パレットです。



レイアート ナチュラル

Layart Natural

商品コード	サイズ	入数	価格
10460000	ケース：W211×D147×H28mm トレイ：W159×H90mm	1個	34,000円

レイアート クリスタル

モダンなデザインが特徴のガラス製の技工用パレットです。



- 特徴のあるカラーのプレートは材料とのコントラストが明確になり作業をより快適にします。
- 滑らかな表面、プレートにはフロートガラスを採用し、ブラシへの摩擦が少なく優しい設計です。
- 分割線が描かれているので、作業効率がアップします。



レイアート クリスタル

Layart Crystal

商品コード	サイズ	入数	価格
10430000	ケース：W291×D223×H36mm トレイ：W220×H120mm	1個	16,000円

パワースチーマー スチームチューブ

スチーム洗浄時に使用する便利なポータブル型のチューブです。



- 小さな補綴物をキャッチするフィルター付きで作業中の紛失を防ぎます。
- シンク内に置く事もできるコンパクトな設計でワックスなどの飛散を防止し周囲を汚さず、清潔な作業エリアを保つことができます。



パワースチーマー スチームチューブ

商品コード	サイズ	重量	入数	価格
18420000	W270×D400×H300~390mm	3kg	本体1台・排水ホース	70,000円

ツイスター アクセサリー

ツイスター用の石膏・埋没材・複模型用シリコン攪拌カップです。



※ツイスター本体の情報はHP又はRenfertカタログをご参照ください。

ツイスター アクセサリー

商品コード	種類	入数	価格
18200220	攪拌用カップ 200ml		11,000円
18200520	攪拌用カップ 500ml	1個	13,000円
18206500	攪拌用カップバドル付き 65ml		32,000円
商品コード	種類	入数	価格
18200700	攪拌用カップバドル付き 700ml		40,000円
18201001	攪拌用カップバドル付き 1000ml	1個	53,000円
18230500	アルジネート印象材専用カップ 500mL		53,000円

マグニファイグラスシルバー

レンズ部の折りたたみ可能な1.5倍拡大鏡です。



- 無反射強化ミネラルガラスを採用。
- 38gの軽量ボディです。
- メガネの上から装着することができます。

マグニファイグラスシルバー

商品コード	サイズ	入数	価格
12620001	φ19mm	1個	46,000円



アクセサリ



サイレントパワー CAM/EC2用ダストバッグ

商品コード	対応機種	入数	価格
29340014	サイレントパワー CAM EC用、サイレントEC2	25枚	2,300円



保証：3年

サイレントアクセサリ エキストラクタースイッチ

商品コード	種類	サイズ	入数	価格
29260000	1 エキストラクタースイッチ マフラー4個(ホース含まず) 0 吸引金具	内側/外側 35mm/40mm (1.38インチ/1.57インチ) 0 マフラー 内側/外側 38mm/46mm (1.50インチ/1.81インチ)	1セット	49,000円



ITノズルチップ

商品コード	対応機種	サイズ	入数	価格
900031739	ベーシックアトロ ベーシックマスター ベーシッククラシック ベーシックエコ パリオベーシック	φ1.5mm×3.5mm	1本	24,000円

保証：3年

パリオベーシック 追加タンク

商品コード	種類	入数	価格
29540050	右側25~70 μ 0.8mmノズル付き		
29540051	左側25~70 μ 0.8mmノズル付き		
29540250	右側70~250 μ 1.2mmノズル付き	1個	58,000円
29540251	左側70~250 μ 1.2mmノズル付き		



保証：3年

サイレントアクセサリ エキストラクター用ガラス

商品コード	種類	入数	価格
29251000	ガラスシールド1枚(ホルダー付き)	1セット	22,000円

保証：3年

サイレントパワー CAM/EC2用モーター

商品コード	対応機種	入数	価格
900021678	サイレントパワー CAM EC用、サイレントEC2	1個	155,000円

保証：3年

ベーシックアトロ追加タンク

商品コード	種類	入数	価格
29580050	25~70 μ 0.8mmノズル付き		
29580250	70~250 μ 1.2mmノズル付き	1個	60,000円

エリートダブル 8

弾力性に優れており、アンダーカットのある模型にも使用可能です。



- 流動性が高いため細部に流し込みやすく、伸びや破れに強いです。

複模型用シリコン印象材



色調 ピンク

テクニカルデータ

練和時間(23℃)	約60秒
機械練和時間(23℃)	約30秒
操作時間(23℃)	約10分
硬化時間(23℃)	約20分
硬度(24時間後)	8 Shore A
細線再現性	2μm
寸法変化(24時間後)	0,05%

エリートダブル 8

Elite Double 8

商品コード	包装内容	入数	価格
C400830	1kg(ベース)/1kg(キャタリスト)	1セット	26,000円

販売名: エリートダブル 一般医療機器 届出番号: 27B2X00268Z00018

硬化ジェル

口腔内用縮合型シリコン印象材のキャタリストです。




- オランウォッシュL/LV、及びゼタプラス/ソフトに対応する硬化材です。
- 技工用シリコン印象材(ゼタラボ・タイタニウム)には、硬化ラボをご使用ください。

口腔内用縮合型シリコン印象材 色調 ピンク
硬化材



硬化ジェルの使用方法

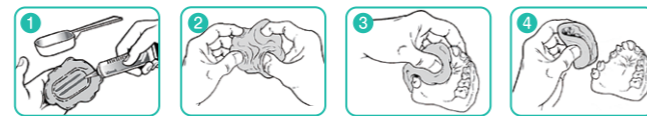

1. パテに計量スプーンの型を付け、型の2本分を注出。

2. 手で練和する

3. 石膏模型にパテを盛る

4. 完成

硬化ジェル

Indurent Gel

商品コード	内容量	入数	価格
C100700	60ml	1本	2,400円

販売名: 硬化ジェル 一般医療機器 届出番号: 27B2X00268Z00027

ジンジファスト CAD エラスチック

デジタルCAD/CAMシステムで読み取り可能な、歯肉再現模型用シリコン材です。




- 可撤性粘膜パーツ(模型用)の製作に適していて、寸法安定性に優れています。
- 弾性があり、アンダーカット部分などに適しています。

技工用付加型シリコン印象材
歯肉再現用模型材

色調 ピンク

テクニカルデータ

操作時間(23℃)	約2分
硬化時間(23℃)	約10分
硬度(1時間後)	40 Shore A

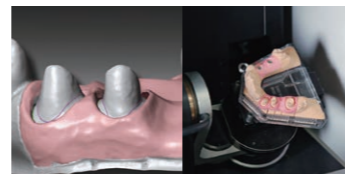

ジンジファスト CAD エラスチック

Gingifast CAD Elastic

商品コード	包装内容	入数	価格
C203227	カートリッジ50ml×2本 ミキシングチップ(オレンジ)×12本 分離材10ml×1本 スプレーノズル付	1セット	9,000円

販売名: ジンジファスト CAD 一般医療機器 届出番号: 27B2X00268Z00030

エリートマスター

CAD/CAM対応の超硬石膏です。



- CAD/CAMシステムで読み込みが可能であり、インプラントなどの精度が要求される症例に最適な超硬石膏です。膨張率が低く、操作性にも優れています。

超硬石膏

テクニカルデータ

混水比	20 ml / 粉100g
硬化時間	14分
硬化膨張率(2時間後)	0,08%
硬化膨張率(48時間後)	0,19%
圧縮強さ(1時間後)	50 MPa
圧縮強さ(48時間後)	75 MPa



エリートマスター

Elite Master

商品コード	内容量	カラー	入数	価格
Ⓐ C410410	3kg	サンディブラウン	1パック	6,500円
Ⓑ C410402		デザートサンド		

販売名: エリートマスター 一般医療機器 届出番号: 27B2X00268Z00029

エリートモデル ファスト

汎用性が高く、チキソトロピー性に優れています。



硬石膏

- 適用
一般模型、対合歯列模型、
可撤性補綴物の埋没用

テクニカルデータ

混水比	30 ml / 粉100g
硬化時間	8分
硬化膨張率(2時間後)	0,10%
硬化膨張率(48時間後)	0,10%
圧縮強さ(1時間後)	36 MPa
圧縮強さ(48時間後)	65 MPa



エリートモデル ファスト

Elite Model Fast

商品コード	内容量	カラー	入数	価格
Ⓐ C410063	3kg	ホワイト	1パック	2,500円
Ⓑ C410065		スカイブルー		
Ⓒ C410067		ライトクリーム		

販売名: エリートモデル 一般医療機器 届出番号: 27B2X00268Z00016

ミキシングパッド

頑丈で薄く、湿気に強いペーパーです。メモ帳のように切り離してご使用いただけます。



ミキシングパッド

Mixing Pad

商品コード	サイズ	入数	価格
C207201	109×170mm	20枚	1,000円

プラチナム75 CAD

デジタルCAD/CAMシステムで読み取り可能な技工用シリコン印象材です。


※硬化阻害を起こすため、ラテックス製グローブを使用しないでください。



- 寸法変化が低いいため、診断用ワックスアップを伴うインプラントなど長時間のプロセスに使用いただけます。
- 200℃までの耐熱性により、熱可塑性素材にも使用可能です。
- ライトカラーで不純物などが識別しやすくなっています。口腔内では使用できません。

- ▶ 技工用付加型シリコン印象材
- ▶ 技工用シリコン印象材

色調	ベース：ライトブルー キャタリスト：ホワイト
テクニカルデータ	練和時間 約30秒 操作時間(23℃) 約1分 硬化時間(23℃) 約7分 硬度(24時間後) 75 Shore A 弾性回復 99.50% 細線再現性 20μm 寸法変化(24時間後) 0.05% 耐熱性 200℃

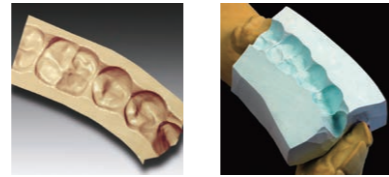

プラチナム75 CAD

Platinum 75 CAD

商品コード	包装内容	入数	価格
C400741	ベース800g+キャタリスト800g 計量スプーン2個付	1セット	20,000円

販売名：プラチナム75 一般医療機器 届出番号：27B2X00268Z00031

プラチナム85

優れた寸法安定性、作業時間が短縮でき、使いやすさが特徴です。

※硬化阻害を起こすため、ラテックス製グローブを使用しないでください。



- 寸法変化が低いいため、診断用ワックスアップを伴うインプラントなど長時間のプロセスに使用いただけます。
- トリミングなど形態の修正が容易です。

- ▶ 技工用付加型シリコン印象材
- ▶ 技工用シリコン印象材

色調 ベース：グリーン
キャタリスト：ホワイト

テクニカルデータ

練和時間	約30秒
操作時間(23℃)	約2分
硬化時間(23℃)	約8分
硬度(24時間後)	85 Shore A
弾性回復	99.50%
細線再現性	20μm
寸法変化(24時間後)	0.05%
耐熱性	200℃



プラチナム85

Platinum 85

商品コード	包装内容	入数	価格
Ⓐ C400727	ベース450g+キャタリスト450g 計量スプーン2個付	1セット	6,000円

商品コード	包装内容	入数	価格
Ⓑ C400725	ベース1kg+キャタリスト1kg 計量スプーン2個付	1セット	10,000円

販売名：プラチナム85 一般医療機器 届出番号：27B2X00268Z00032

プラチナム85 タッチ

寸法変化が低いいため、診断用ワックスアップを伴うインプラントなど長時間のプロセスに使用できます。

※硬化阻害を起こすため、ラテックス製グローブを使用しないでください。



- トリミングなど形態の修正が容易です。
- 細部まで正確に再現可能です。

色調 ベース：ブルー
キャタリスト：ホワイト

テクニカルデータ

練和時間	約30秒
操作時間(23℃)	約1分
硬化時間(23℃)	約7分
硬度(24時間後)	85 Shore A
弾性回復	99.50%
細線再現性	20μm
寸法変化(24時間後)	0.05%
耐熱性	200℃

- ▶ 技工用付加型シリコン印象材
- ▶ 技工用シリコン印象材



プラチナム85 タッチ

Platinum 85 Touch

商品コード	包装内容	入数	価格
C400751	ベース200g+キャタリスト200g 計量スプーン2個付	1セット	4,000円

販売名：プラチナム85 タッチ 一般医療機器 届出番号：27B2X00268Z00033

プラチナム95

操作が簡単で正確な印象が採れる、超硬タイプの技工用付加型シリコンパテです。

※硬化阻害を起こすため、ラテックス製グローブを使用しないでください。



- ▶ 技工用付加型シリコン印象材
- ▶ 技工用シリコン印象材

色調 ベース：ライトブルー
キャタリスト：ホワイト

テクニカルデータ

練和時間	約30秒
操作時間(23℃)	約2分
硬化時間(23℃)	約8分
硬度(24時間後)	95 Shore A
弾性回復	99.50%
細線再現性	20μm
寸法変化(24時間後)	-0.05%
耐熱性	200℃



プラチナム95

Platinum 95

商品コード	包装内容	入数	価格
Ⓐ C400720	ベース450g+キャタリスト450g 計量スプーン2個付	1セット	6,000円

商品コード	包装内容	入数	価格
Ⓑ C400700	ベース1kg+キャタリスト1kg 計量スプーン2個付	1セット	10,000円

販売名：プラチナム95 一般医療機器 届出番号：27B2X00268Z00007

Product features


製品	加熱重合型義歯床用レジンを用いた義歯制作	流し込みレジンを用いた補綴物製作	間接法での歯内用シリコン模型製作	テンポラリークラウンレジンを用いたプロビジョナル製作	可挿式義歯等の修理
プラチナム75CAD			○	○	
プラチナム85	◎	◎	◎	◎	○
プラチナム85タッチ	○	○	○	◎	○
プラチナム95	○			○	○

フレキシブルコントラスター

フレキシブルに形状を自由に変えることができ、シリコン製の為口腔内にも優しい仕様です。被写体背景を黒くすることで、歯の形状、色調をよりハッキリと撮影することが可能です。



口腔内と撮影箇所に合わせて、形状を自由に変化させられます。

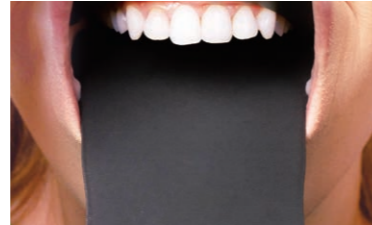

フレキシブル コントラスター

Flexible Contrast



商品コード	カラー	入数	価格
FC-0684	ブラック	1個	11,500円

販売名：コントラスター 一般医療機器 届出番号：27B2X00268X00157

AFRミニレグ

下顎の限界運動を記録し、水平的顎間関係を定めるためにご利用いただけるゴシックアーチ描記装置です。一つのサイズでどの顎形状にも装着でき、簡単にご利用いただけます。記録の保管も可能なスケールラベル付きです。

※パウシュ 8μmアルティフォルと一緒にご使用ください。



- ワンサイズでシンプル設計。
- 事前準備も少なく大幅時間短縮。
- はっきりとしたゴシックアーチが描記でき、CRの位置関係も正確に記録。



使用方法



※スケールラベルを使用の際は、記録を必要とする際はスケールラベルを両面シールで描記板に貼付し、パウシュ アルティフォル8μmを描記計と描記板の接点にあて記録する。



ゴシックアーチ スターターセット10

- ・描記板×10
- ・描記針×10
- ・スケールラベル×20
- ・両面シール×20

AFRミニレグ

AFR-Mini-Reg



商品コード	種類	入数	価格
AFR103	ゴシックアーチ スターターセット10	1セット	9,000円

販売名：AFR ミニレグ 一般医療機器 届出番号：27B3X00271000007

AM-2000 LIGHT / AM-2000 / AM-5000 / その他付属品

見学随時受付中!

見学受付時間 平日 10:00 ~ 17:00

お申し込み方法 TEL 06-6845-0050 (土・日・祝祭日を除く)
 customer@premiumplus.jp

プレミアムプラスジャパン本社展示コーナーにて
 実際にお試ください。

ご希望の日時の候補を第1候補から第3候補までお伝えください。

100 years making work easy | 3+1 年保証

**Renfert 100周年記念
 プラス1年保証**

期間：2025年1月1日(水)~12月31日(水)

対象期間内にRenfert製品をご購入いただくと、通常の保証期間に加えてプラス1年間の追加保証をいたします。
 (Renfertウェブサイトへ登録、追加保証の申請が必要となります。)

追加保証に関する詳細は商品に同梱されるステップガイドをご確認ください。

※一部対象外製品もございます。 ※当社が取り扱っているRenfert製品についてはホームページ・カタログをご覧ください。

Renfert Catalog 2024

本誌掲載のRenfert新商品の他、当社では多くのRenfert製品を取り揃えております。詳しくは、下記QRコードより、Renfertカタログをご覧ください。

カタログをご希望の方はお問合せ窓口までご連絡ください。

プレミアムプラスジャパン お問合せ窓口
 〒560-0005 大阪府豊中市西緑丘1-1-31 5F Tel.06-6845-0050 [9:00 ~ 17:00(土・日・祝祭日を除く)]