

プレミアムプラスジャパン本社展示コーナーにて
AM-5000 / AM-2000 / AM-2000 LIGHT
Dental Microscope

見学随時受付中!
実際にお試してください。

見学受付時間 平日 10:00 ~ 17:00

お申し込み方法 TEL 06-6845-0050 (土・日・祝祭日を除く)

mail customer@premiumplus.jp

ご希望の日時の候補を第1候補から第3候補までお伝えください。

Premium Plus Japan Co., Ltd. (プレミアムプラスジャパン株式会社)
〒560-0005 大阪府豊中市西緑丘1-1-31 5F
お問合せ窓口: 06-6845-0050 9:00~17:00 (土・日・祝祭日を除く)

商品センター: 〒561-0805 大阪府豊中市原田南一丁目13番5号
(製造販売業)

プレミアムプラスジャパン SNS

当社の最新情報をfacebook、Instagramで発信しています。
右記QRコードからご覧ください。



商品のクオリティ維持・追求の為、スペック・カラー等を予告なく変更する場合がございます。掲載商品の写真は、印刷により実際のカラーと異なる場合がございますので、あらかじめご了承ください。
※商品は税別価格です。

担当販売店

B4792501-02

premiumTM
plus JAPAN



Dental Microscope

— Related Products — 【関連製品カタログ】



歯科用手術顕微鏡

ALLTION®

洗練されたスリム設計により、省スペース設置も可能

ベース、ポール、アームすべてのパーツがスリム設計で洗練されたデザインを演出します。
そして、クリニックの空間デザインへも圧迫感を与えることなく、省スペースでの設置が可能です。

AM-5000

Dental Microscope



ブラック

ホワイト

拡張性を備えたプレミアムモデル

第3アームにバランスアームを採用し、外付けカメラなど追加機器を装着してもバランス調整により安定した操作性を確保します。さらに、広い可動域を持ち自由なポジショニングを可能にします。

- 内蔵4Kカメラ
- 首振り機構
- 被写界深度調整機構
- バランスアーム
- ビームスプリッタ

※AM5000は標準色のホワイトに加えブラックエディションも選択いただけます。

AM-5000 SD ARM

Dental Microscope



ブラック

ホワイト

第3アームを進化させたプレミアムモデル

第3アームにストレートダウンアームを採用し、水平方向に回しても視野がブレにくい、アシスタントの方々とも干渉しづらく、チーム全体にとって快適な設計です。

- 内蔵4Kカメラ
- 首振り機構
- 被写界深度調整機構
- ストレートダウンアーム
- ビームスプリッタ

※AM5000 SD ARMは標準色のホワイトに加えブラックエディションも選択いただけます。

ALLTIONのマイクロスコープ全ての機種で天井固定のシーリングマウントと床固定のフロアマウントに対応しています。
本体ご注文時にのみ選択が可能となっております。

AM-2000

Dental Microscope



ホワイト

ライトウエイトで軽くスムーズなモデル

軽量でコンパクトながら4Kカメラを内蔵し、対物レンズを傾斜させても、接眼レンズは一定の角度に保てるので術者の負担を和らげます。必要な機能をしっかりパッケージしたオールインワン設計です。

- 内蔵4Kカメラ
- 首振り機構
- 被写界深度調整機構

AM-2000 LIGHT

Dental Microscope



ホワイト

ラインナップの中で最もコンパクトな入門モデル

AM-2000の軽い操作性はそのままに、内蔵カメラ、首振り機構などを除いたよりコンパクトな入門機をご用意しました。ビームスプリッタからオプションアダプターを使用しカメラ等を外付けすることが可能です。





- ビームスプリッタ

ALLTIONのマイクロスコープ全ての機種で天井固定のシーリングマウントと床固定のフロアマウントに対応しています。
本体ご注文時にのみ選択が可能となっております。

仕様一覧		AM-5000 SD ARM	AM-2000	AM-2000 LIGHT
対物レンズ	変倍システム	6段階 0.3x/0.5x/0.8x/1.2x/2x/3x	5段階 0.4x/0.6x/1.0x/1.6x/2.5x	
	総合倍率	1.4x~22.8x	1.7x~19.1x	1.7x~16.1x
	視野径 (mm)	Φ9.6~Φ158.4mm	Φ11.5~Φ132mm	Φ13.6~Φ128.2mm
	焦点距離 作動距離	198~455mm		250~430mm
接眼レンズ	倍 率	12.5x		
	傾斜角度	0°~180°		
	瞳孔間距離 調節範囲	50~75mm		
	調節範囲	±7D		
照 明	光 源	LED照明		
	照度 (Lux)	90,000	80,000	
	カラー フィルター	オレンジ / グリーン		
	色温度	5500K		5700K

		AM-5000 AM-5000 SD ARM	AM-2000	AM-2000 LIGHT
カメラ	投 影	4K, 60FPS		カメラ非搭載
	動 画	4K, 30FPS / 1080P, 30FPS		
	画 像	800万画素 / 200万画素		
	アスペクト比	16 : 9		
ビームスプリッタ		あり	なし	あり
首振り機構		あり	あり	なし (アングルローテーション)
電氣的定格	電源電圧	AC100V - 240V		
	電源入力	60 - 75VA	50 - 65VA	25 - 60VA
	周波数	50 / 60HZ		
	電撃に対する保護の形式	クラス II 機器		
重 量		90kg		

各機種サイズ

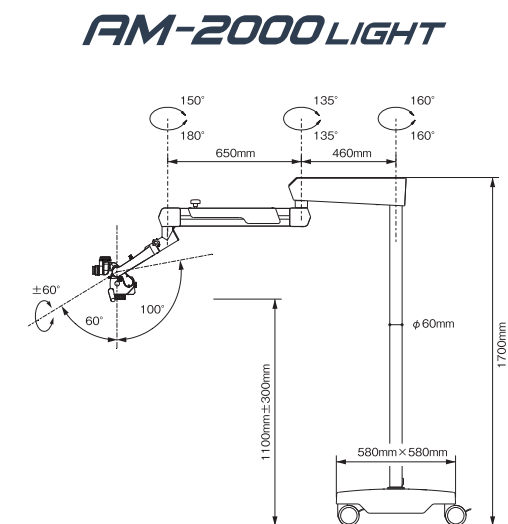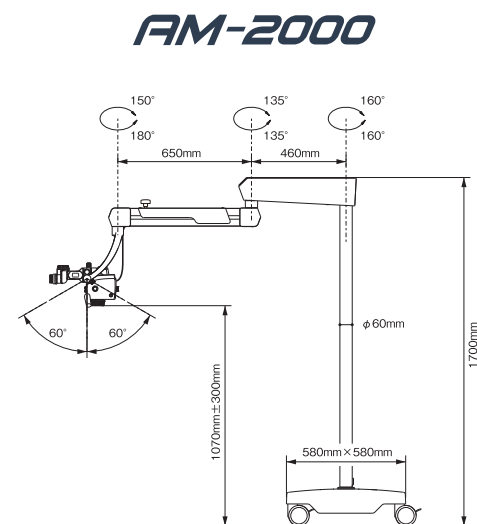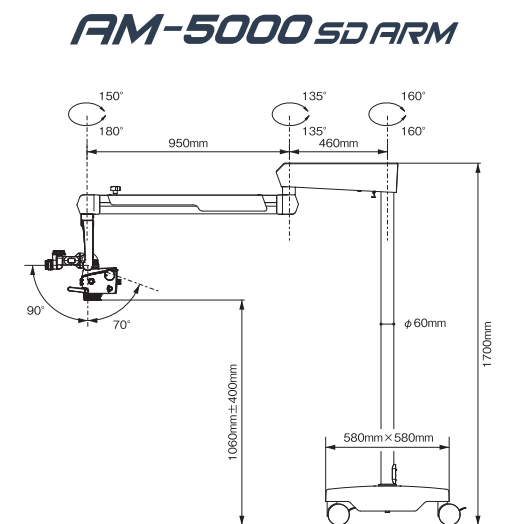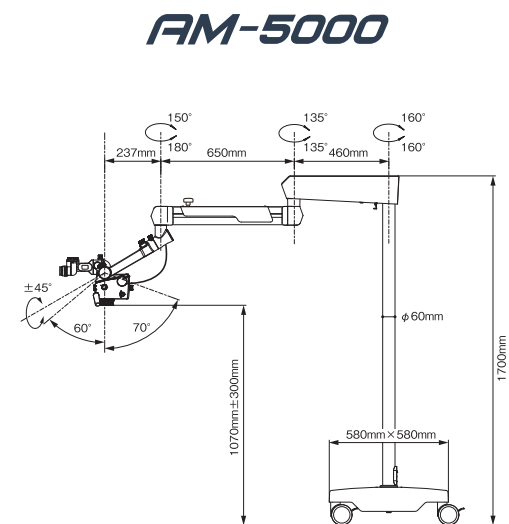

※写真はAM-5000 ホワイトです。



AM-5000

Dental Microscope

バランスアーム、ビームスプリッタも搭載した
拡張性のあるプレミアムモデルです。

■内蔵4Kカメラ

正面に配置された撮影ボタン、または無線接続されたマウス操作、別売のフットペダルで動画および静止画を撮影でき、撮影データについてはメインアーム下部に挿入しているUSBメモリに保存いただけます。
ソフトウェアを使用しHDMIで接続しているモニターでも撮影データの確認をすることができます。

投 影	4K,60FPS
動 画	4K,30FPS / 1080P,30FPS
画 像	800万画素 / 200万画素
アスペクト比	16 : 9



撮影ボタン




挿入されたUSBメモリ

■被写界深度調整機構を標準装備したクリアで明るい術野を実現するレンズ

ピントが合っている範囲を広くする被写界深度調整機構を標準装備しているので根管治療等でも細やかなフォーカス調整を実現します。AM-5000は6段階ドラム式変倍システムを採用しています。

変倍システム	6段階 0.3x/0.5x/0.8x/1.2x/2x/3x
総合倍率	1.4x~22.8x
視野径(mm)	Φ9.6~Φ158mm
倍 率	12.5x

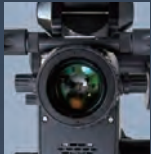

対物レンズ



接眼レンズ

■ビームスプリッタ・バランスアーム

カメラ等を外付け可能にするビームスプリッタとバランスと重量調節可能なバランスアームを標準装備。



■首振り機構と前方・後方への広い回転領域

対物レンズを傾斜させても、接眼レンズは一定の角度に保てるので術者の負担を和らげます。さらに、広い範囲に鏡筒を回転させることができます。

	首振り機構	回転領域
AM-5000	左右19°	前60° 後70°




首振り機構

前方・後方への広い回転領域

■モニターに映した映像で様々な調整が可能

お手持ちのモニターとマイクロスコープをHDMIケーブルで接続し様々な機能をもったソフトウェアをご使用いただけます。

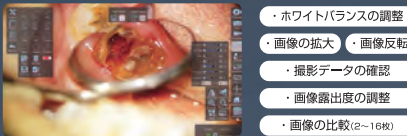

■アポクロマティックレンズを採用し色収差を高精度で補正

全てのレンズには色収差(色ズレ)を高精度で補正するアポクロマティックレンズを採用し、鮮明な術野を確保します。



アポクロマティックレンズ

通常レンズ

歯科用マイクロスコープ AM-5000

Dental Microscope

ホワイトエディション	FC-0648	価 格 3,600,000円
	FC-0719	シーリングマウント 価 格 3,850,000円
	FC-0720	フロアマウント 価 格 3,850,000円
ブラックエディション	FC-0649	価 格 3,600,000円
	FC-0721	シーリングマウント 価 格 3,850,000円
	FC-0722	フロアマウント 価 格 3,850,000円

販売名：マイクロスコープ AM-5000 一般医療機器 特定保守管理医療機器 届出番号：27B2X00268X00148
販売名：マイクロスコープ AM-5000 マウントタイプ 一般医療機器 特定保守管理医療機器 届出番号：27B2X00268X00162

搬入組立について ●北海道、沖縄、離島、一部地域は別途送料お見積りします。 ●平日夜間(17:00以降)及び土日祝の搬入は別途お見積りします。 ●搬入時養生を必要とされる場合は別途お見積りします。



AM-5000 SD ARM

Dental Microscope

AM-5000のスペックをそのままに
コネクティングアームの形状をストレートダウン型、
アーム長を950mmを標準装備したモデルを
ご用意いたしました。

■ストレートダウンアーム



ストレートダウンアームは、回転軸が本体の中心に近いので、本体を左右に回しても光軸のズレが少なく、術者にとって扱いやすい構造となっています。また、この形状は周囲のスペースを取りにくく、歯科衛生士やアシスタントとも干渉しにくいので、チーム全体にとっても快適な設計です。

■カラーフィルター&スポット照明

LED照明は最大90,000Luxの明るさで術野を明るく照らします。ホワイトライトは3段階の大きさ、フィルターはオレンジとクリーンのカラーモードを搭載しています。



■ビームスプリッタ・バランスアーム


カメラ等を外付け可能にするビームスプリッタとストレートダウンアームを標準装備。



■首振り機構と前方・後方への広い回転領域

対物レンズを傾斜させても、接眼レンズは一定の角度に保てるので術者の負担を和らげます。さらに、広い範囲に鏡筒を回転させることができます。

	首振り機構	回転領域
AM-5000 SD アーム	左右19°	前90° 後70°

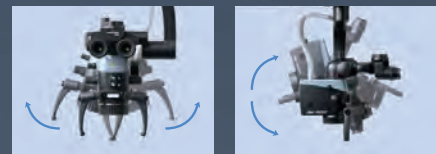

首振り機構

前方・後方への広い回転領域

付属品



シリコンカバー(2セット)
※標準で2セット付属しています。
※パーツ単体販売はございません。



マイクロスコープ 対物レンズカバー
※標準で1個付属しています。

歯科用マイクロスコープ AM-5000 SD ARM

Dental Microscope

ホワイトエディション	FC-0848	価 格 3,600,000円
	FC-0850	シーリングマウント 価 格 3,850,000円
	FC-0849	フロアマウント 価 格 3,850,000円
ブラックエディション	FC-0851	価 格 3,600,000円
	FC-0853	シーリングマウント 価 格 3,850,000円
	FC-0852	フロアマウント 価 格 3,850,000円

販売名：マイクロスコープ AM-5000 SDアーム 一般医療機器 特定保守管理医療機器 届出番号：27B2X00268X00196
販売名：マイクロスコープ AM-5000 SDアーム マウントタイプ 一般医療機器 特定保守管理医療機器 届出番号：27B2X00268X00197

搬入組立について ●北海道、沖縄、離島、一部地域は別途送料お見積りします。 ●平日夜間(17:00以降)及び土日祝の搬入は別途お見積りします。 ●搬入時養生を必要とされる場合は別途お見積りします。



AM-2000

Dental Microscope

必要な機能をしっかりパッケージした
エントリーしやすいスタンダードモデルに仕上げました。

内蔵4Kカメラ

正面に配置された撮影ボタン、または無線接続されたマウス操作、別売のフットペダルで動画および静止画を撮影できます。撮影データの保存については本体背面に挿入しているUSBメモリにバックアップいただけます。

投 影	4K, 60FPS
動 画	4K, 30FPS / 1080P, 30FPS
画 像	800万画素 / 200万画素
アスペクト比	16 : 9




撮影ボタン

挿入されたUSBメモリ

被写界深度調整機構を標準装備したクリアで明るい術野を実現するレンズ

ピントが合っている範囲を広くする被写界深度調整機構を標準装備しているので根管治療でも細やかなフォーカス調整を実現します。AM-2000は5段階ドラム式変倍システムを採用しています。

変倍システム	5段階 0.4x/0.6x/1.0x/1.6x/2.5x
総合倍率	1.7x~19x
視野径 (mm)	Φ11.5~Φ132mm
倍 率	12.5x




対物レンズ

接眼レンズ


ワンハンドオペレーション

撮影ボタン、フォーカス、倍率調節がハンドルを持ったまま片手で操作できるので診療の妨げになりません。



首振り機構と前方・後方への広い回転領域

対物レンズを傾斜させても、接眼レンズは一定の角度に保てるので術者の負担を和らげます。さらに、前方60度、後方60度と広い範囲に鏡筒を回転させることができます。

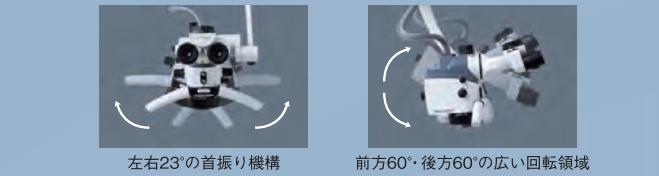


モニターに映した映像で様々な調整が可能

お手持ちのモニターとマイクロスコープをHDMIケーブルで接続し様々な機能をもったソフトウェアをご使用いただけます。




アポクロマティックレンズを採用し色収差を高精度で補正

全てのレンズには色収差(色ズレ)を高精度で補正するアポクロマティックレンズを採用し、鮮明な術野を確保します。

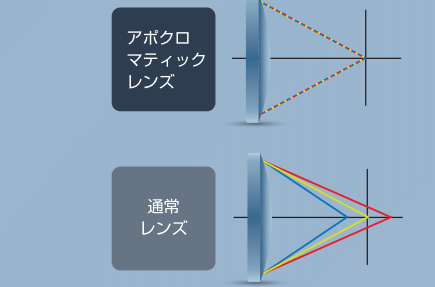

バリオスコープで広範囲の焦点距離調節が可能

198~455mmという広範囲(焦点距離257mm)をカバーするバリオスコープを標準搭載し、フォーカスをスムーズに合わせることができます。

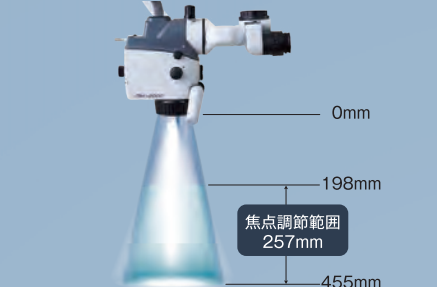

付属品



歯科用マイクロスコープ Dental Microscope <i>AM-2000</i>			
ホワイト エ디션	FC-0646	価 格 2,800,000円	
	FC-0717	シーリングマウント	価 格 3,050,000円
	FC-0718	フロアマウント	価 格 3,050,000円

販売名：マイクロスコープ AM-2000 一般医療機器 特定保守管理医療機器 届出番号：27B2X00268X00147
販売名：マイクロスコープ AM-2000マウントタイプ 一般医療機器 特定保守管理医療機器 届出番号：27B2X00268X00161

搬入組立について ● 北海道、沖縄、離島、一部地域は別途送料お見積りします。 ● 平日夜間(17:00以降)及び土日祝の搬入は別途お見積りします。 ● 搬入時養生を必要とされる場合は別途お見積りします。



AM-2000 LIGHT

Dental Microscope

AM-2000の軽い操作性はそのままに、
内蔵カメラ、首振り機構などを除いた
よりコンパクトな入門機をご用意しました。

クリアで明るい術野を実現するレンズ

変倍システム	5段階 0.4x/0.6x/1.0x/1.6x/2.5x
総合倍率	1.7x~16.1x
視野径 (mm)	Φ13.6~Φ128.2mm
倍 率	12.5x




対物レンズ

接眼レンズ

AM-2000Lightは5段階ドラム式変倍システムを採用しています。


ワンハンドオペレーション

フォーカス、倍率調節がハンドルを持ったまま片手で操作できるので診療の妨げになりません。



接眼部と前方・後方への広い回転領域

±60度回転するコネクティングアームで可動域が広く、さらに、前方60度、後方100度と広い範囲に鏡筒を回転させることができます。

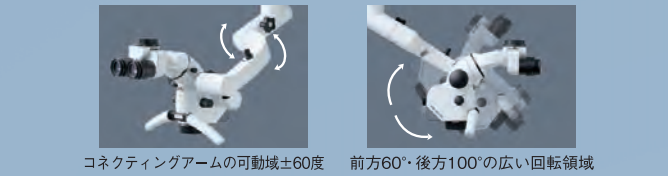

ビームスプリッタ

ビームスプリッタからオプションアダプターを使用しカメラ等を外付けすることが可能です。




付属品




アポクロマティックレンズを採用し色収差を高精度で補正

全てのレンズには色収差(色ズレ)を高精度で補正するアポクロマティックレンズを採用し、鮮明な術野を確保します。

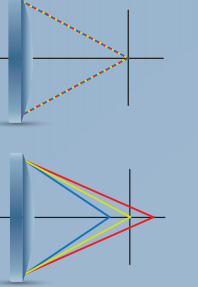

バリオスコープで広範囲の焦点距離調節が可能

250~430mmという広範囲(焦点距離180mm)をカバーするバリオスコープを標準搭載し、フォーカスをスムーズに合わせることができます。

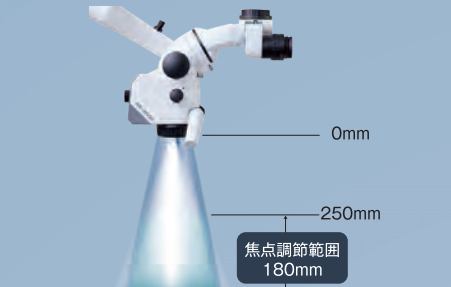

歯科用マイクロスコープ Dental Microscope <i>AM-2000 LIGHT</i>			
ホワイト エ디션	FC-0714	価 格 2,100,000円	
	FC-0715	シーリングマウント	価 格 2,350,000円
	FC-0716	フロアマウント	価 格 2,350,000円

販売名：マイクロスコープ AM-2000ライト 一般医療機器 特定保守管理医療機器 届出番号：27B2X00268X00192
販売名：マイクロスコープ AM-2000ライトマウントタイプ 一般医療機器 特定保守管理医療機器 届出番号：27B2X00268X00193

搬入組立について ● 北海道、沖縄、離島、一部地域は別途送料お見積りします。 ● 平日夜間(17:00以降)及び土日祝の搬入は別途お見積りします。 ● 搬入時養生を必要とされる場合は別途お見積りします。

ALLTIONのマイクロスコープ全ての機種でシーリングマウントとフロアマウントでの設置の選択が可能です。

ALLTION®



※ALLTIONマイクロスコープすべての機種に対応可能です。
※写真はAM-5000 ホワイトです。

※本体ご注文時にのみ選択が可能です。
ご注文後の変更はできませんのでご注意ください。

シーリングマウント

フロアマウント



マイクロスコープ AM-5000 【マウントオプション】

Dental Microscope AM-5000

商品コード	種 類	カラー	入 数	価 格
FC-0719	AM-5000 シーリングマウント	ホワイト	1台	3,850,000円
FC-0720	AM-5000 フロアマウント			
FC-0721	AM-5000 シーリングマウント	ブラック		
FC-0722	AM-5000 フロアマウント			

マイクロスコープ AM-2000 【マウントオプション】

Dental Microscope AM-2000

商品コード	種 類	カラー	入 数	価 格
FC-0717	AM-2000 シーリングマウント	ホワイト	1台	3,050,000円
FC-0718	AM-2000 フロアマウント			

搬入組立について

- 北海道、沖縄、離島、一部地域は別途送料お見積りします。
- 平日夜間(17:00以降)及び土日祝の搬入は別途お見積りします。
- 搬入時養生を必要とされる場合は別途お見積りします。
- シーリングマウント、フロアマウントは別途専用業者による設置工事費用が発生します。
- マイクロスコープからモニターまでのHDMIケーブルの距離が3mを超える場合は別途部材費が発生します。

マイクロスコープ AM-5000 SD アーム 【マウントオプション】

Dental Microscope AM-5000 SD Arm

商品コード	種 類	カラー	入 数	価 格
FC-0850	AM-5000 SD アーム シーリングマウント	ホワイト	1台	3,850,000円
FC-0849	AM-5000 SD アーム フロアマウント			
FC-0853	AM-5000 SD アーム シーリングマウント	ブラック		
FC-0852	AM-5000 SD アーム フロアマウント			

マイクロスコープ AM-2000 ライト 【マウントオプション】

Dental Microscope AM-2000 Light

商品コード	種 類	カラー	入 数	価 格
FC-0715	AM-2000 ライト シーリングマウント	ホワイト	1台	2,350,000円
FC-0716	AM-2000 ライト フロアマウント			

販売名：マイクロスコープ AM-2000ライトマウントタイプ 一般医療機器 特定保守管理医療機器 届出番号：27B2X00268X00193
販売名：マイクロスコープ AM-2000マウントタイプ 一般医療機器 特定保守管理医療機器 届出番号：27B2X00268X00161
販売名：マイクロスコープ AM-5000マウントタイプ 一般医療機器 特定保守管理医療機器 届出番号：27B2X00268X00162
販売名：マイクロスコープ AM-5000 SDアーム マウントタイプ 一般医療機器 特定保守管理医療機器 届出番号：27B2X00268X00197

AM-5000、AM-2000、AM-2000ライトで標準の第2アームを650mmから950mmに拡張いただけます。

ALLTION®




※AM-5000 SD アームは950mmアームが標準装備です。
※写真はAM-5000 ホワイトです。

※本体ご注文時にのみ選択が可能です。
ご注文後の変更はできませんのでご注意ください。

エクステンション
アーム

通常
第一アーム

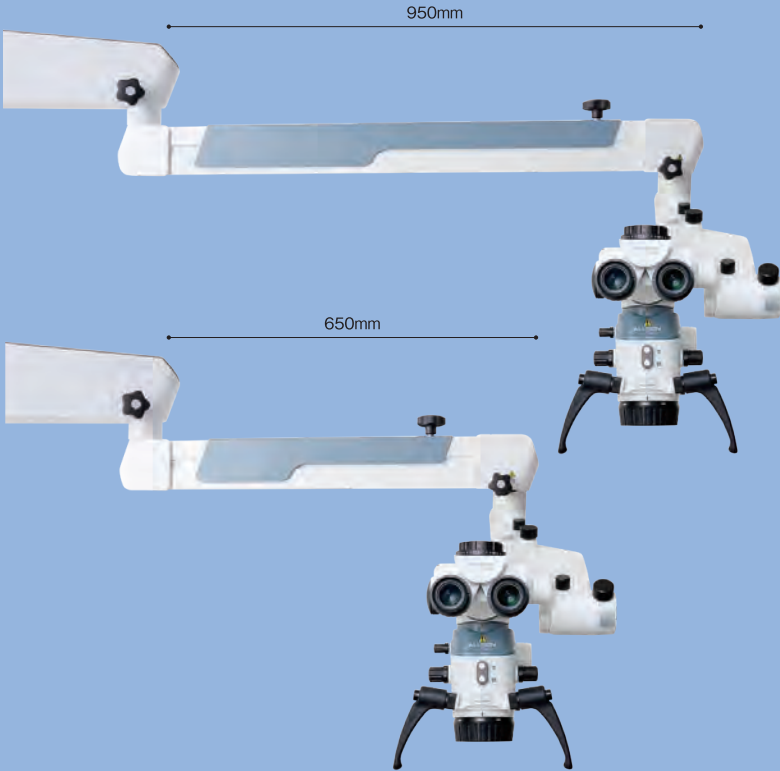

マイクロスコープ エクステンションアーム

Microscope Extension Arm

商品コード	種 類	カラー	入 数	価 格
FC-0708	フロアスタンド用	ホワイト	1台	180,000円
FC-0709		ブラック		
FC-0710	シーリングマウント用	ホワイト		
FC-0711		ブラック		

商品コード	種 類	カラー	入 数	価 格
FC-0731	フロアマウント用	ホワイト	1台	180,000円
FC-0732		ブラック		

販売名：マイクロスコープ AM-5000(代表品) 一般医療機器 届出番号：27B2X00268X00148

Bluetooth接続で撮影をコントロールできます。

ALLTION®

※ALLTIONマイクロスコープのカメラ内蔵モデルすべての機種に対応可能です。



Bluetooth™

マイクロスコープ フットコントロール

Microscope Foot Control


商品コード	入 数	価 格
FC-0652	1個	120,000円

販売名：マイクロスコープ AM-5000(代表品) 一般医療機器 届出番号：27B2X00268X00148

対物レンズを切削刃等から保護します。

ALLTION®

※ALLTIONマイクロスコープすべての機種に対応可能です。

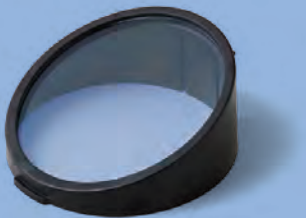

マイクロスコープ 対物レンズカバー

Microscope Lens cover



商品コード	入 数	価 格
FC-0653	1個	15,000円

マイクロスコープの接眼レンズの距離を延ばすエクステンダーです。3つのサイズ、カラーはブラックとホワイトの2色からお選びいただけます。上顎をみる角度などの際にエクステンダーを使用することで、より体に負担の少ない姿勢を維持できます。

ALLTION®



※ALLTIONマイクロスコープすべての機種に対応可能です。
※写真はAM-5000 ホワイトです。

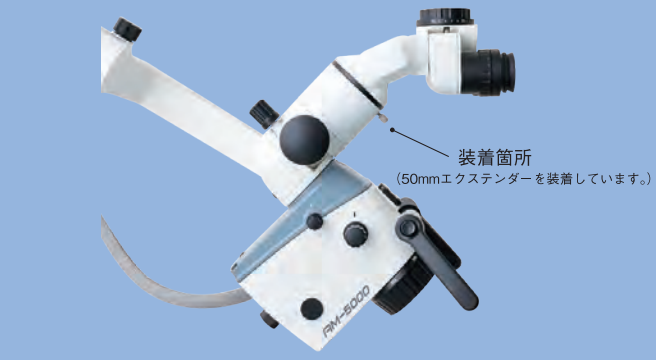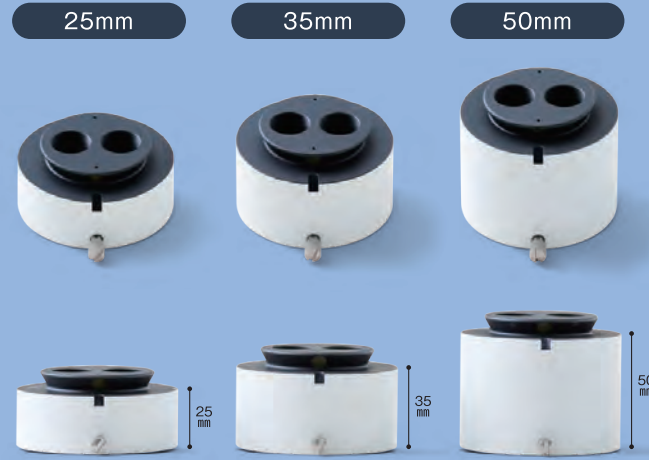

マイクロスコープ エクステンダー

商品コード	種 類	カラー	入 数	価 格
FC-0691	25mm	ホワイト	1個	80,000円
FC-0692		ブラック		
FC-0693	35mm	ホワイト	1個	90,000円
FC-0694		ブラック		
FC-0695	50mm	ホワイト	1個	110,000円
FC-0696		ブラック		

販売名：マイクロスコープ AM-5000(代表品) 一般医療機器 届出番号：27B2X00268X00148

レバーを引くとレンズから見える映像の倍率が1.6倍に拡大され、最大倍率を上げることが可能です。カラーはブラックとホワイトの2色からお選びいただけます。

ALLTION®



※ALLTIONマイクロスコープすべての機種に対応可能です。
※写真はAM-5000 ホワイトです。



レバーを下に引くと倍率が1.6倍になります。



マイクロスコープ エクストラマグニファイヤー

商品コード	カラー	入 数	価 格
FC-0697	ホワイト	1個	120,000円
FC-0698	ブラック		

販売名：マイクロスコープ AM-5000(代表品) 一般医療機器 届出番号：27B2X00268X00148

※拡大画像はイメージです。
※接眼レンズから見た場合のみ反映されます。

お手持ちのスマートフォンをビームスプリッタに装着し撮影ができるアダプターです。音声付き動画、静止画の撮影が可能です。

ALLTION®



※AM-5000/AM-5000 SD アーム/AM-2000ライトに取付可能です。
※ビームスプリッタに装着し使用します。
※写真はAM-5000 ホワイトです。



スマートフォンのホルダーはスライド式の為、様々な機種の取り付けが可能です。



マイクロスコープ モバイルフォンアダプター

商品コード	カラー	入 数	価 格
FC-0706	ブラック	1個	300,000円

販売名：マイクロスコープ AM-5000(代表品) 一般医療機器 届出番号：27B2X00268X00148

お手持ちのカメラで撮影が可能になるアダプターです。カラーはブラックとホワイトの2色からお選びいただけます。

ALLTION®



※AM-5000/AM-5000 SD アーム/AM-2000ライトに取付可能です。
※ビームスプリッタに装着し使用します。
※写真はAM-5000 ホワイトです。



Sony-E bayonet/Canon-EF/Nikon-F
F180/APS-C サイズ用(ホワイト)

Sony-E bayonet/Canon-EF/Nikon-F
F340/フルフレーム用(ホワイト)



マイクロスコープ カメラアダプター

商品コード	種 類	カラー	入 数	価 格
FC-0685	F180 APS-C ソニー	ホワイト	1個	220,000円
FC-0686	F180 APS-C ソニー	ブラック		300,000円
FC-0687	F340 フルフレーム ソニー	ホワイト		
FC-0688	F340 フルフレーム ソニー	ブラック	1個	220,000円
FC-0723	F180 APS-C キャノン	ホワイト		300,000円
FC-0724	F180 APS-C キャノン	ブラック		

商品コード	種 類	カラー	入 数	価 格
FC-0725	F340 フルフレーム キャノン	ホワイト	1個	300,000円
FC-0726	F340 フルフレーム キャノン	ブラック		220,000円
FC-0727	F180 APS-C ニコン	ホワイト		
FC-0728	F180 APS-C ニコン	ブラック	1個	300,000円
FC-0729	F340 フルフレーム ニコン	ホワイト		300,000円
FC-0730	F340 フルフレーム ニコン	ブラック		

販売名：マイクロスコープ AM-5000(代表品) 一般医療機器 届出番号：27B2X00268X00148

フロアスタンドタイプのマイクロスコープ支柱にモニターを取り付けるアームです。
カラーはブラックとホワイトの2色からお選びいただけます。



※ALLTIONマイクロスコープすべての機種に対応可能です。
(シーリングマウントを除く)
※写真はAM-2000です。



マイクロスコープのシリコンカバーをご用意しています。



※本体購入時に2セット付属します。



マイクロスコープ シリコンカバー

Microscope Handgrip Silicone Cover

商品コード	種類	カラー	入数	価格
FC-0699	AM-5000シリコンカバーセット (ハンドルカバーなし)	ブルー	1セット (16パーツ)	15,000円
FC-0700	AM-2000シリコンカバーセット (ハンドルカバーなし)		1セット (13パーツ)	12,000円
FC-0857	AM-2000ライトシリコンカバーセット (ハンドルカバーなし)		1セット (12パーツ)	11,000円

商品コード	種類	カラー	入数	価格
FC-0987	AM-5000SDアームシリコンカバーセット (ハンドルカバーなし)	ブルー	1セット (13パーツ)	12,000円
FC-0701	ストレートハンドル用カバー	ブラック	1セット	3,000円
FC-0702	90度ハンドル用カバー			

ALLTIONのすべてのマイクロスコープがお好みのハンドルに付け替え可能になりました。



※ALLTIONマイクロスコープすべての機種に対応可能です。
※写真はAM-5000 ホワイトです。



MICROSCOPE STOOL

マイクロスコープでの治療時に腕を固定し精密な操作を行えるようにデザインされたマイクロスコープ用のスツールです。
また、人間工学に基づいて設計されているので、身体に負担の少ない自然な姿勢で座ることができます。



座面調整システム

使用前に少し前傾になっている座面は、体重をかけることによって水平になります。
クッションの加減については座面調整レバーによって、施術者の体重に合わせて調整いただけます。また、座面調整レバーで座面を前傾のままに維持させることも可能です。



施術姿勢時の負担軽減と無重力アームレストシステム

人間工学に基づきデザインされているので、施術中の腰・背中・首・腕への負担を軽減します。
腕の長さに合わせてアームレストの位置を調節してご使用いただけます。アームレストは左右に可動しますので施術時にも自由に腕を動かす事が可能です。



ヘッドレスト・座面・アームレストの高さ調節が可能



マイクロスコープスツール

Microscope Stool

グレー	FC-0661	価格 160,000円
オレンジ	FC-0659	価格 160,000円
ブルー	FC-0660	価格 160,000円
ブラック	FC-0707	価格 160,000円



お使いのバキュームに簡単接続いただくことで、ミラーヘッドから吸引できるミラーです。



Vacuum Mirror

バキュームミラー

ミラーヘッドのバキューム孔から吸引し、どのような角度からでも吸い残しを許しません。お使いのバキュームに接続するだけでご使用いただけるのでスムーズに導入いただけます。ひとりでの診療時や補綴セット時、口腔内が狭い患者さんの診療時にもおすすめです。

※大きな切削片や歯石は吸引できない場合があります。




接続方法と吸引力を動画でご覧ください



片面・両面の2タイプをご用意しております。

● バキューム接続

別売「バキュームミラー用チューブ」をユニットのバキュームに挿して使用します。付属の変換アダプターでφ16mmとφ11mmに対応可能です。

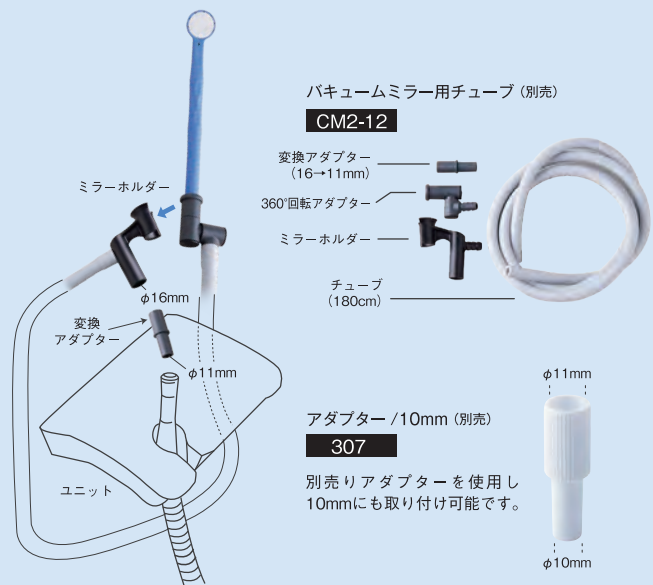

● 反射率99%の表面反射ミラー



ミラー表面は30層のセラミックコーティングで高耐久・高反射率。反射率99%の表面反射ミラー。ロジウムコーティング表面反射ミラーと比較し40%明るいミラーです。

バキュームミラー

Vacuum Mirror

商品コード	種 類	入 数	価 格
CM24J399	片面タイプ 3本カラーアソート (No.4)		20,000円
CM24J399D	両面タイプ 3本カラーアソート (No.4)	1セット	25,000円
CM2-12	バキュームミラー用チューブ180cm		22,000円
307	アダプター / 10mm	1個	1,500円

販売名：バキュームミラー 一般医療機器 届出番号：27B2X00268X00105
販売名：排唾管アダプター 一般医療機器 届出番号：27B2X00268000037



歯科ユニットにエア供給口があれば簡単に取り付けられます。噴射口よりエアを鏡面に向け吹き出し続け、水滴と曇りを吹き飛ばします。



Air Flow Clear Mirrors

エアフロークリアミラー

エアを噴射し続けミラーに付く水滴や唾液を吹き飛ばし、クリアな状態を保ちます。30層のセラミックコーティングで高反射率かつ高耐久のミラーです。




動画で製品特長をご覧ください

● エア噴射によるクリーンな視界



診療時の患者さんの呼気によるミラーの曇りや治療時の注水等による水滴の付着を防止することで、常にクリーンな視界を確保することができます。

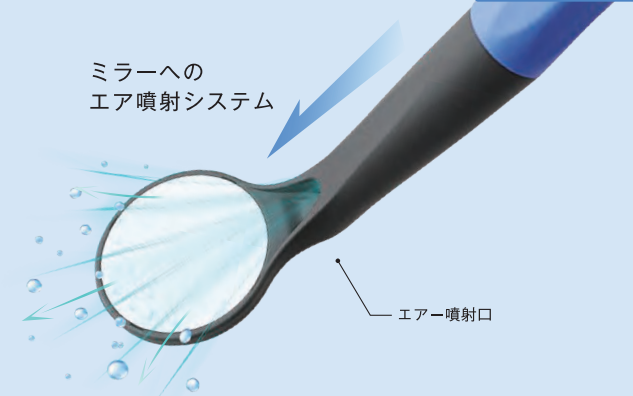

Ⅰ 接続方法



Ⅱ エアバルブでエア流量調整が可能



Ⅲ 反射率99%の表面反射ミラー



エアフロークリアミラー (6本カラーアソート)

Air Flow Clear Mirrors 6pcs

商品コード	種 類	入 数	価 格
CM34J699	6本カラーアソート (No.4)	1セット	53,000円

販売名：エアクリーンミラー 一般医療機器 届出番号：27B2X00268X00114



エアフロークリアミラー (3本カラーアソート)

Air Flow Clear Mirrors 3pcs

商品コード	種 類	入 数	価 格
CM34J399	3本カラーアソート (No.4)	1セット	28,000円

販売名：エアクリーンミラー 一般医療機器 届出番号：27B2X00268X00114

エアフロークリアミラー エアソースコネクター

Air Flow Clear Mirrors Air Source connector

商品コード	種 類	入 数	価 格
CM3-12-2	モリタ・ヨシダ用	1個	4,000円
CM3-12-3	タカラベルモント用		
CM3-12-5	ユニバーサル 1/4		5,000円



エアフロークリアミラー アクセサリー


Air Flow Clear Mirrors Accessory

商品コード	種 類	入 数	価 格
CM3-12	アクセサリパック	1セット	30,000円


注 意

ご使用の際にはエア供給口が必要です。ユニットにエア供給口がない場合はユニットメーカーにお問い合わせください。また、上記エアソースコネクターが接続できないエア供給口の場合もユニットメーカーにお問い合わせください。当社では設置作業・配管分岐作業の施工、手配は致しかねます。

エンドゲージを備えた、わずか13gの軽量ミラーです。
ミラー表面は30層のセラミックコーティング加工で高反射率、高耐久を実現しました。

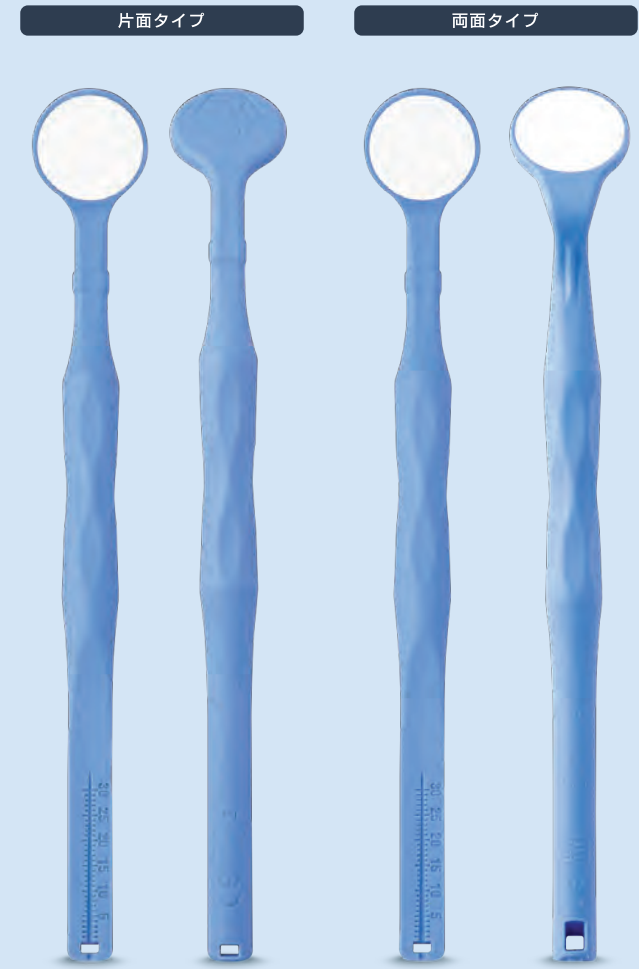

■ エンドゲージ

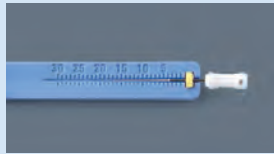

エンドゲージ付

マイクロスコープを使用した根管治療時、エンドゲージを探す手間を省きます。視線はそのまま、ミラーを持った手首を回すだけでエンドが計測できます。低反射素材のハンドルはライトの下でも乱反射を防ぎます。

■ 反射率99%の表面反射ミラー



ミラー表面は30層のセラミックコーティングで高耐久＆高反射率。反射率99%の表面反射ミラー。ロジウムコーティング表面反射ミラーと比較し40%明るいミラーです。

エンドゲージ付ミラー

Dental Mirror with Endo Gauge

商品コード	種 類	入 数	価 格
CM141699	片面エンドゲージ付ミラー (No.4)	6本	10,000円
CM141699D	両面エンドゲージ付ミラー (No.4)		15,000円

販売名：エンドゲージ付きミラー 一般医療機器 届出番号：27B2X00268X00106



歯内療法、小窩裂溝の開拡など低侵襲な窩洞形成を実現するMIダイヤモンドバーです。
細く長いネックと小さなヘッドはマイクロスコープでの治療時に視野を妨げません。




MIダイヤモンドバー

Minimal Invasive

販売名：MIダイヤモンドバー 一般医療機器 届出番号：27B2X00268X00139




通常のラウンドバーとMIダイヤモンドバーの比較

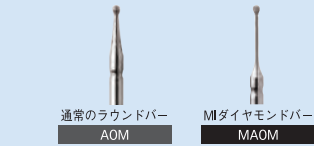

ヘッドサイズが同じ通常のラウンドバーと比べ、MIダイヤモンドバーの細く長いネックは術野を妨げません。

FG用

ミディアム

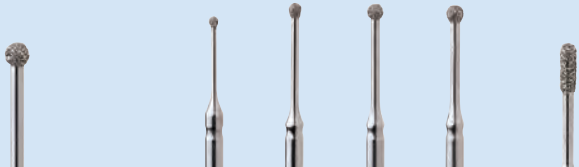

A group of five MA series dental burs with different head sizes, and one MAB series bur with a larger head size.

商品コード	MA0M	MA1M	MA2M	MA25M
ISO No.	001・009	001・012	001・014	001・016
ヘッドサイズ	9	12	14	16
ヘッド長	—			
全 長	21	22		
入 数	3本			
価 格	4,800円			



Two MAB series dental burs with different head sizes.

商品コード	MAB0M	MAB3M
ISO No.	237・008	237・010
ヘッドサイズ	8	10
ヘッド長	2.5	
全 長	19	
入 数	3本	
価 格	4,800円	



A group of four MA-D and MA-E series dental burs with different head sizes.

商品コード	MA-D082FRM	MA-E073M	MA-E143M	MA-K123M
ISO No.	138・008	540・007	254・014	257・012
ヘッドサイズ	8	7	14	12
ヘッド長	2	2.6	3	2.4
全 長	21			
入 数	3本			
価 格	4,800円			

カストロビージョタイプのマイクロシザーズは、繊細な操作をサポートします。



① 直



② 曲



マイクロシザーズ

Micro Scissor

商品コード	種 類	サイズ	入 数	価 格
① FC-0435	直	全長149mm	1本	8,000円

商品コード	種 類	サイズ	入 数	価 格
② FC-0436	曲	全長149mm	1本	8,000円


販売名：マイクロシザーズ 一般医療機器 届出番号：27B2X00268X00066

ラウンドハンドルで手に馴染みやすい形状のカストロビージョタイプのマイクロニードルホルダーです。

① 直



② 曲

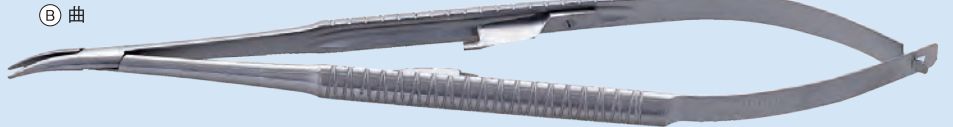

マイクロニードルホルダー

Micro Needle Holder with Round Handle

商品コード	種 類	サイズ	入 数	価 格
① FC-0437	直	全長180mm	1本	10,000円

商品コード	種 類	サイズ	入 数	価 格
② FC-0438	曲	全長180mm	1本	10,000円

販売名：マイクロニードルホルダー 一般医療機器 届出番号：27B2X00268X00067

豊富な先端バリエーションを持ったマイクロピンセットです。
ダイヤモンドコーティング付は滑りにくく対象をしっかりと把持します。



① ギザ付



③ 先端リング ダイヤモンドコーティング



② ダイヤモンドコーティング



④ 鉤付 ダイヤモンドコーティング



マイクロピンセット

Micro Tweezer

商品コード	種 類	サイズ	入 数	価 格
① FC-0431	ギザ付	全長185mm	1本	15,000円
② FC-0432	ダイヤモンドコーティング	全長183mm		18,000円

商品コード	種 類	サイズ	入 数	価 格
③ FC-0433	先端リング ダイヤモンドコーティング	全長180mm	1本	18,000円
④ FC-0434	鉤付 ダイヤモンドコーティング	全長183mm		

販売名：マイクロピンセット 一般医療機器 届出番号：27B2X00268X00065